

INFRAEAZ

návlek pro terapii infračerveným a červeným světlem



Swedish Posture®

CZ Perfektní kombinace návleku se 60 LED diodami využívajícími jak terapii červeným světlem, tak infračerveným světlem.

Infračervená terapie (850 nm) se používá k úlevě od bolesti, regeneraci svalů a snížení zánětu, protože proniká hluboko do buněčných tkání.

Terapie červeným světlem (660 nm) působí na kožní buňky a pomáhá s tvorbou kolagenu, vráskami a stařeckými skvrnami.

Používejte InfraEaz podle potřeby v 20minutových terapiích. Pro optimální výsledky používejte denně po dobu 4 týdnů. Používejte přímo na kůži.

UPOZORNĚNÍ: Infračervené světlo je pro lidské oko neviditelné, takže se může zdát, že LED diody nesvítí, i když je infračervené světlo ve skutečnosti zapnuté.

Počet LED diod: 60 × 0,5 W

Jmenovitý výkon: 30 W

Výdrž baterie: 115 minut

Doba ošetření: 20 minut

Doba nabíjení baterie: 3 hodiny

Nabíjení: USB-C

Vlnové délky: 660 nm – 850 nm

Materiál: neopren



Indikace vybití baterie: Kontrolka nabíjení začne blikat červeně

Tlačítko napájení: Zelená kontrolka

- Stiskněte tlačítko jednou = zapne se terapie červeným i infračerveným světlem.
- Stiskněte tlačítko znovu = zapne se pouze červené světlo, infračervené se vypne.
- Stiskněte tlačítko znovu = zapne se pouze infračervené světlo, červené se vypne (infračervené je neviditelné).
- Stiskněte tlačítko znovu pro vypnutí.



Tlačítko napájení: Modré světlo pro pulzní terapii. Podržte tlačítko déle než 3 sekundy.


- Stiskněte tlačítko jednou = zapne se terapie červeným i infračerveným světlem.
- Stiskněte tlačítko znovu = zapne se pouze červené světlo, infračervené se vypne.
- Stiskněte tlačítko znovu = zapne se pouze infračervené světlo, červené se vypne (infračervené je neviditelné).
- Stiskněte tlačítko znovu = vypne se zařízení.



K jemnému čištění pásu a elastického popruhu použijte vlhký hadřík. Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od napájení a vypnuté. Čistěte pouze textilní část pásu, nikoli přímo LED diody. Neponořujte pás do vody. Nechte pás volně uschnout na vzduchu.

- Není určeno pro děti a těhotné ženy.
- Nepřekračujte dobu ošetření 30 minut.
- Nedívejte se přímo do světla.
- Nikdy nenabíjejte pás bez dozoru.

- Terapie červeným a infračerveným světlem
- Nastavitelný pás pro jakoukoli část těla
- Bezdrátové použití
- Vhodné při bolesti svalů a kloubů
- Stimuluje tvorbu kolagenu

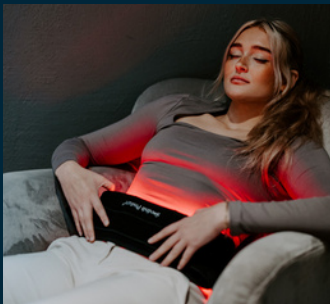





Úleva od bolesti



Regenerace



20minutová ošetření

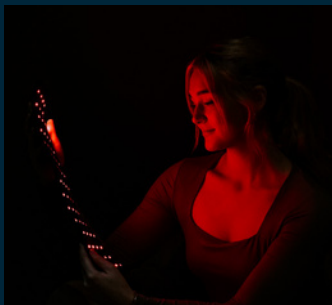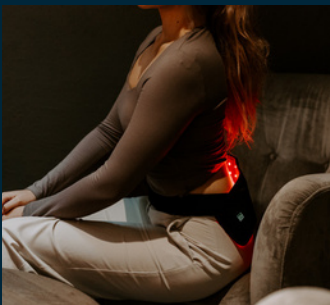

Inspirera & Co AB/Swedish Posture
Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm,
Sweden
info @ p o s t u r e . s e

Simply good posture.

Swedish Posture®