

VITAMMY®

babycinno

váha pro novorozence, kojence, děti a rodiče

ODNÍMATELNÁ VÁŽÍCÍ PLOCHA PRO DOJČATA

SBS-30322



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

⚠ Před použitím si pozorně přečtěte pokyny.


ÚVOD

Ďakujeme, že jste si vybrali naši digitální váhu pro kojence. Před prvním použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a upozornění.

Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům, abyste předešli nehodám a/ nebo poškození výrobku při jeho používání.

Tento domácí spotřebič je užitečný pro všechny členy rodiny. Je vhodný k vážení novorozenců, kojenců, dětí i dospělých.

POPIS ZAŘÍZENÍ

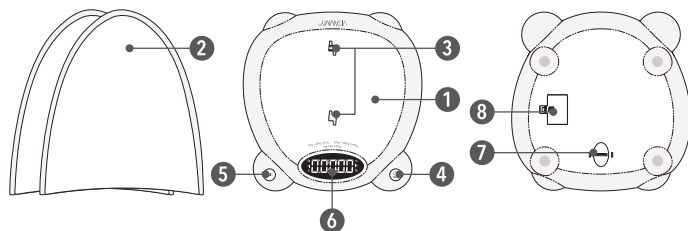

1. Váha
2. Nástavec pro novorozence a kojence
3. Zdiřky na připevnění nástavce
4. Tlačítko Zapnout / Vypnout / Tare


5. Tlačítko pro změnu jednotek UNIT
6. LED obrazovka
7. Ochrana misky váhy
8. Prostor pro baterie

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALACE BATERIÍ

⚠ Před prvním použitím vložte baterie.


1. Otevřete kryt baterie a vyjměte izolátor z přihrádky na baterie.
2. Vložte 3 baterie AAA (1,5 V) v souladu s vyznačenou polaritou.
3. Zavřete kryt baterie.

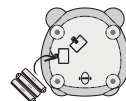

SCALE

⚠ Pro novorozence nebo kojence použijte nástavec na vážení.

1. Umístěte části nástavce do otvorů.
2. Části nástavce položte paralelně k sobě a poté každou část posuňte opačným směrem, aby se spojily do jedné plochy.
3. Zajistěte nástavec proti vypadnutí stisknutím ochrany na spodní straně váhy.

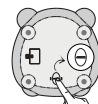


4. Když nástavec nepotřebujete, odblokujte ochranu nástavce, odsuňte jeho části od sebe a poté nástavec sundejte z váhy. Uložte na suchém místě.

VÁŽENÍ KOJENCŮ

1. Položte váhu na tvrdý, rovný a vodorovný povrch.

⚠ Váhu neumísťujte na měkké povrchy, jako jsou podložky nebo koberce, protože to může ovlivnit výsledek vážení.

2. Váhu zapnete tlačítkem Zapnout / Vypnout / Tare.
3. Když se na obrazovce objeví nuly a vážící jednotka, může začít kontrolní vážení.
4. Chcete-li změnit jednotku hmotnosti, (kg / lb / st) stiskněte tlačítko UNIT
5. Chcete-li otočit obsah obrazovky, stiskněte a podržte tlačítko UNIT po dobu přibližně 2 sekund.
6. **Položte dítě na váhu. Výsledek se zobrazí na displeji. Pokud nechcete dítě položit přímo na váhu, nejprve na váhu položte ručník, stiskněte tlačítko Zapnout/ Vypnout/Tara a po vynulování položte dítě na váhu.**

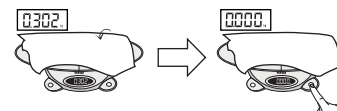

7. Vypněte váhu stisknutím tlačítka On/Off/Tara nebo počkejte, až se váha sama vypne asi po 60 sekundách.

- △ Chcete-li po odstranění dítěte z váhy provést další měření, před dalším měřením váhu vynulujte stisknutím tlačítka On/Off/Tare.

VÁŽENÍ VĚTŠÍCH DĚTÍ A DOSPĚLÝCH

1. Položte váhu na tvrdý, rovný a vodorovný povrch.

- △ Váhu neumísťujte na měkké povrchy, jako jsou podložky nebo koberce, protože to může ovlivnit výsledek.

2. Váhu zapněte tlačítkem ON/OFF/Tara.

3. Když se na obrazovce objeví nuly a vážící jednotka, může začít kontrolní vážení.

4. Chcete-li změnit jednotku hmotnosti, (kg / lb / st) stiskněte tlačítko UNIT.

5. Chcete-li otočit obrazovku displeje, stiskněte a podržte tlačítko UNIT asi 2 sekundy.

6. Postavte se na váhu a přečtěte si výsledky na displeji.

7. Vypněte váhu stisknutím tlačítka ON/OFF/Tara nebo počkejte, až se váha sama vypne po 60 sekundách.



FUNKCE AUTOLOCK

Když se dítě neklidně chová a pohybuje, váha se automaticky stabilizuje a výsledek se zobrazí po trojitém zablikání číslice na displeji.

TARE

Váhou VITAMMYBABYCINNO lze vážit více než jedno dítě. Před dalším měřením odstraňte dítě z váhy, stiskněte tlačítko ON/OFF/Tara, a po vynulování položte další dítě.



ZMĚNA JEDNOTKY HMOTNOSTI

Chcete-li změnit jednotku hmotnosti (kg / lb / st), stiskněte tlačítko UNIT



INDIKÁTOR PŘESAHUJÍCÍ LIMIT

Pokud váha dítěte překročí maximum pro hmotnost (120 kg), na obrazovce se zobrazí „0-Ld“.



NÍZKÝ STAV BATERIE Váha je indikována stavem vybití baterie, který zobrazuje na displeji symbol „Lo“.



△ UPOZORNĚNÍ

△ Při používání položte váhu na rovný, suchý, stabilní a tvrdý povrch.

△ Tento spotřebič použijte doma podle určení. Váhu

△ nepřetěžujte, maximální zatížení je 120 kg. Vyhněte

△ se otřesům nebo nárazům na vaši váhu.

△ Neponořujte váhu do vody.

△ Optimální teplota pro manipulaci a skladování je od 5 do 40 °C.

SPECIFIKACE

⚠ Jakékoliv úpravy na zařízení nejsou povolené

MODEL	SBS-30322
POUŽITÝ MATERIÁL	ABS
TYP ZOBRAZENÍ	LED 90×26 mm
ROZMĚRY	650 × 320 × 88 mm
OBSAH BALENÍ	Váha, manuál, 3 baterie AAA 1,5V
PROVOZNÍ TEPLOTA, SKLADOVÁNÍ DOPRAVA	5 - 40 °C
SNÍMAČE	4 přesné tenzometry
MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ	120 kg
PŘESNOST	U hmotnosti <20 kg d = 5 g, v rozmezí hmotnosti 20 ~ 120 kg d = 50 g
NAPÁJENÍ	3 baterie typu AAA 1,5V

ZÁRUKA

ZAŘÍZENÍ: VITAMMY babycinno (model SBS-30322)

RUČITEL: MLongauer, sro Farská 12, 949 01, Nitra

TECHNICKÁ PODPORA: +421940404831

E-MAIL: reklamacie@mlongauer.sk

ZÁRUKA: Garant ujistí kupujícího, že přístroj VITAMMY, na který se vztahuje tato záruka, byl navržen a vyroben v souladu s vysokými standardy kvality a dobré kvality přístroje, bez materiálových nebo výrobních chyb, které by mohly bránit jeho správné funkci.

V případě jakýchkoliv závad, poškození a odhalených chyb během trvání této záruky, garant bezplatně opraví nebo vymění nové zařízení ve lhůtě nepřesahující 30 dní.

TYP ZÁRUKY: Tato záruka předpokládá, že předmětné zařízení bude kupujícím dodáno na náklady servisu, bezplatně opraveno a bezplatně vráceno kupujícím.

ZÁRUČNÍ DOBA: 24 měsíců na zařízení.

Bez záruky Části a příslušenství podléhající běžnému používání: baterie.

ZÁRUČNÍ LHŮTA: Záruka je platná dnem nákupu potvrzeným dokladem o koupi, který je třeba přiložit k záručnímu listu.

OBLAST ZÁRUKY: Tato záruka se vztahuje na území ČR.

Spuštění reklamačního řízení. V rámci reklamačního řízení je třeba zaslat reklamované zařízení na adresu servisu s přiložením tohoto záručního listu a dokladu o koupi.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Pro zachování platnosti záruky je třeba spolu s reklamovaným zařízením uvést na jméno zakoupeného zařízení i tento záruční list (správně vyplněný a podepsaný) a pokladní doklad s datem nákupu.

OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ZÁRUK:

- Záruka neposkytuje žádnou kompenzaci za přímé nebo nepřímé škody způsobené osobám nebo zařízením, když zařízení nefunguje nebo je v servisu.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení a škody způsobené:
 - nevhodným jednáním (v rozporu s určeným použitím) nebo jednáním způsobem, který není v souladu s návodem k použití
 - nesprávným skladováním a údržbou (např. použití nevhodných čistících prostředků) a používání nevhodného spotřebního materiálu
 - zásahy neoprávněným servisem, neoprávněnými opravami, změnami a konstrukčními změnami
 - vnější příčiny (atmosférické jevy, nedostatečné napájení atd.)
- Záruka se nevztahuje na poruchy výrobku v důsledku změn vlastností (zhoršení kvality) komponent, které podléhají přirozenému opotřebení.
- Záruční oprava a úkony související s údržbou a čištěním zařízení jsou popsány v Návodu k obsluze.

Razítko a podpis
prodejce zákazníka

Datum

Podpis

LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO ZAŘÍZENÍ DOMÁCIMI UŽIVATELI EVROPSKÉ UNIE



Přítomnost tohoto symbolu na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nelze likvidovat jako domácí odpad. Proto nesete odpovědnost za likvidaci nepotřebných zařízení a jste povinni je předat do autorizovaného recyklačního místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení. Třídění, likvidace a recyklace nepotřebných zařízení pomůže chránit přírodní zdroje a zajistí, aby se recyklace prováděla v souladu se zásadami respektování zdraví lidí a životního prostředí. Chcete-li získat další informace o sběrných místech pro vaše odpadní zařízení, obraťte se na místní úřady nebo místní službu likvidace domovního odpadu.



Výrobek má certifikát CE

KONTAKTNÍ INFORMACE**VÝROBCE:** AEAMAXXCO., LTD

4F, BuildingA, DonghustrialPark, No61, DongpuErRoad, Tianhe District, Guangzhou,
People's Republic of China

DISTRIBUTOR:

MLongauer, sro, Frská 12, 949 01, Nitra

Provoz:

Baby's, Hlavní 43, 951 53 Babindol

kontakt: +421940404831

mail: reklamacie@mlongauer ,sk

Vyrobeno v Číně / Made inChina

Verze manuálu: 01.02 / 26.04.2021