


- 2 Pevně zatlačte koncovku do přístroje, dokud nezapadne na místo. Chcete-li koncovku vyjmout, stiskněte tlačítko pro vysunutí koncovky.

Pozor: Netiskněte tlačítko pro vysunutí koncovky, pokud je přístroj v provozu.




- 3 Odpojte nabíjecí kabel USB od přístroje. Před plněním vodou a během používání se ujistěte, zda je kryt nabíjecího portu na svém místě. Zvedněte odklápěcí víčko nádrčky a naplňte ji vlažnou vodou.

Doplňte podle potřeby.

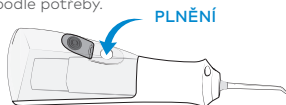


ÚSTNÍ SPRCHA

- 4 Nakloňte se nad umyvadlo a zavřete rty natolik, abyste zabránili rozstříkávání vody a zároveň nechali vodu vytékat z úst do umyvadla.

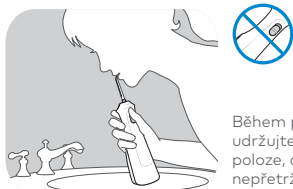


Během používání udržujte přístroj ve svislé poloze, aby byl zajištěn nepřetržitý průtok vody.

- 5 Při prvním použití nastavte tlak na hodnotu LOW(I).

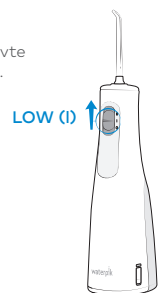

TECHNIKA

- 6 Směřujte vodu na linii dásní pod úhlem 90 stupňů. Sledujte linii dásní a krátce se zastavte mezi zuby.

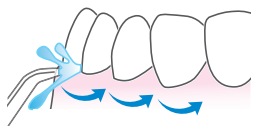

**ABYSTE SE VYHNULI NEPOŘÁDKU:
PONECHTE KONCOVKU V ÚSTECH, KDYŽ JE PŘÍSTROJ ZAPNUTÝ.**

Ortodontická koncovka (OD-100E)
Vyměňujte každé 3 měsíce

Koncovka Pik Pocket™ (PP-100E)
Vyměňujte každé 3 měsíce

Koncovka Plaque Seeker™ (PS-100E)
Vyměňujte každé 3 měsíce

Koncovka s klasickou tryskovou (JT-100E)
Vyměňujte každé 3 měsíce

Čistič jazyka (TC-100E)
Vyměňujte každé 3 měsíce

Nabíjecí kabel USB
20030405-2 bílý



Kompletní sortiment náhradních dílů a příslušenství lze zakoupit online na adrese www.waterpik.com nebo telefonicky od společnosti Water Pik, Inc. na čísle 1-800-525-2774

Specifikace přístroje

Jmenovitý příkon: 5,0 VDC, max. 1,0 A
Dobíjecí baterie: Lithium-iontová, nevyměnitelná

Máte dotazy nebo potřebujete další informace?

- ÚPLNÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- ČISTĚNÍ
- KONCOVKY
- ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
- ČASTÉ OTÁZKY

Pomůžeme vám začít!

Máme mnoho užitečných nástrojů, abychom vám poskytli Navštivte stránky: waterpik.com/enhance



Servisní údržba

Ústní sprchy a zubní kartáčky Waterpik® nemají žádné elektrické prvky, které by mohl opravovat spotřebitel, a nevyžadují běžnou servisní údržbu. Veškeré příslušenství najdete na adrese www.waterpik.com. Můžete také zavolat na naše bezplatné číslo zákaznického servisu 1-800-525-2774 (USA). Ve veškeré korespondenci uvádějte sériová čísla a čísla modelů.

Tato čísla jsou umístěna na spodní straně přístroje. Máte ještě otázky? Navštivte stránky www.waterpik.com.

Čištění

Přístroj nikdy neponořujte do vody. Před čištěním vypojte zástrčku z elektrické zásuvky, vyjměte nabíjecí kabel z nabíjení portu a nasaďte zpět kryt nabíjecího portu. V případě potřeby výrobek očistěte pomocí měkkého hadříku a jemného neabrazivního čistícího prostředku na vnější straně.

Nádržka na vodu je vyjímatelná pro snadné čištění a lze ji mýt v horním stojanu myčky nádobí.

Doporučuje se nádržku každý týden vyjmout a vyčistit.

Odstraňování usazenin z tvrdé vody / celkové čištění

V závislosti na obsahu minerálů ve vaší vodě se mohou v přístroji tvořit usazeniny z tvrdé vody. Pokud tomu nebudete věnovat pozornost, může to omezit výkon.

Čištění vnitřních částí: do plné nádrčky teplé vody přidejte 2 polévkové lžice bílého octa. Nasměrujte rukojeť a koncovku do dřezu. Zapněte přístroj a nechte jej běžet, dokud se nádržka nevyprázdní. Vypláchněte opakovaním postupu s nádržkou plnou čisté teplé vody.

Tento proces by se měl provádět každé 1 až 3 měsíce, aby byl zajištěn optimální výkon.

Péče o baterii

POKUD má být ústní sprcha skladována delší dobu (šest měsíců nebo déle), nezapomeňte ji před uskladněním plně nabít.

Nevystavujte baterii ani spotřebič nadměrným teplotám.

Likvidace/recyklace

Tento výrobek obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii. Baterie není vyměnitelná. Po skončení životnosti výrobku jej nevyhazujte do domácího odpadu ani do recyklačních kontejnerů. Recyklujte jej v nejbližším recyklačním centru nebo odevzdejte na sběrném místě nebezpečného odpadu, abyste dodrželi místní a státní předpisy.


V případě dotazů se obraťte na místní odbor správy odpadů.

Poznámka: Dobíjecí baterie není vyměnitelná, vyjměte ji až na konci životnosti výrobku. Tento proces není vratný a ruší záruku na výrobek.


Vyjmutí baterie

Chcete-li dobíjecí baterii vyjmout za účelem recyklace, před vyjmutím ji zcela vybijte.

Při provádění níže uvedeného postupu dodržujte základní bezpečnostní opatření. Nezapomeňte si chránit oči, ruce, prsty a povrch, na kterém pracujete.

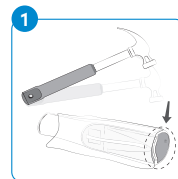


1. Vyjměte nádržku a zabalte přístroj do ručníku. Tlučte kladivem, dokud spodní kryt neodpadne.

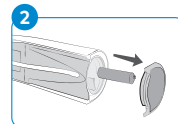

2. Vytáhněte baterii, přestřihněte dráty. Přestřihněte vodiče baterie jeden po druhém.

POZNÁMKA: NESTŘÍHEJTE OBA VODIČE BATERIE NAJEDNOU.

Waterpik® Ústní sprcha řady WF-21

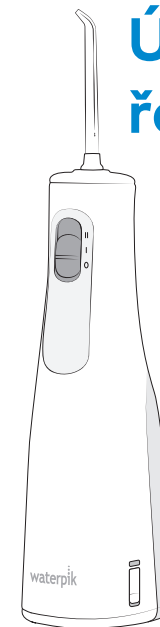

POMŮŽEME VÁM ZAČÍT!

Máme mnoho užitečných nástrojů, abychom vám poskytli ten nejlepší možný uživatelský zážitek. Naskenujte QR kód nebo navštivte stránky waterpik.com/enhance



Tel: 1-800-525-2774 (USA)

Pondělí-pátek
7:00 - 17:00 hodin MST
Chat nebo e-mail service@waterpik.com



SPOJTE SE S NÁMI @WATERPIK



Tel.: 1-800-525-2774 (USA)

www.waterpik.com

waterpik®

Water Pik, Inc., dceřiná společnost
Church & Dwight Co., Inc.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA 1-800-525-2774 (USA)
www.waterpik.com



Navrženo a testováno v USA. Vyrobeno v Číně.

Formulář č. 20032740-F AA
©2023 Water Pik, Inc.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

- Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti.

Při používání elektrických výrobků, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

NEBEZPEČÍ:

Snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

- Výrobek neumísťujte ani neskladujte na místech, kde by mohl spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
- Se síťovou nabíječkou USB, která není součástí balení, nemanipulujte mokřými rukama.
- Nevkládejte ani neházejte přístroj nebo síťovou nabíječku USB, která není součástí balení, do vody nebo jiné tekutiny.
- Před prvním použitím a v průběhu životnosti výrobku kontrolujte, zda nabíjecí kabel a síťová nabíječka USB nejsou poškozeny.

UPOZORNĚNÍ:

Snížení rizika popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Tento výrobek používejte pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu nebo podle doporučení zubního lékaře.
- Používejte pouze koncovky a příslušenství doporučené společností Water Pik, Inc.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud byl upuštěn, poškozen nebo spadl do jakékoli kapaliny. Kontaktujte společnost Pik, Inc. na čísle 1-800-525-2774 nebo navštivte stránky www.waterpik.com.
- Nabíjecí kabel a USB síťovou nabíječku, která není součástí balení, uchovávejte mimo vyhřívané povrchy.
- Do žádného otvoru nebo hadičky nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte výrobek ve venkovním prostředí ani v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde se podává kyslík.
- Nevystavujte baterii ani spotřebič nadměrným teplotám.
- K nabíjení tohoto zařízení musí být použita síťová nabíječka USB-A (napájecí adaptér) s bezpečnostním certifikátem (IPX4, třída II) a jmenovitým výstupem **5,0 VDC, max. 1,0 A**. Nabíječka není součástí balení.
- Nezapojte toto zařízení do jiné napěťové soustavy, než je uvedeno na zařízení nebo nabíječe.
- Nepoužívanou nabíječku USB odpojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte ústní sprchu déle než pět minut během dvou hodin.
- Nesměřujte vodu pod jazyk, do ucha, nosu nebo na jiná citlivá místa. Tento výrobek je schopen vyvinout tlak, který může v těchto oblastech způsobit vážné poškození.
- Nesměřujte vodu do nosu nebo do ucha. Potenciálně smrtelná améba Naegleria fowleri se může vyskytovat v některých vodách z vodovodu nebo v nechlorované studniční vodě a může být smrtelná, pokud se dostane do nosu nebo do ucha.
- Pokud vám lékař před stomatologickým zákrokem doporučí antibiotickou premedikaci, měli byste se před použitím tohoto výrobku nebo jakékoli jiné pomůcky pro ústní hygienu poradit se svým zubním lékařem.

- Nádržku naplňujte pouze teplou vodou nebo jinými roztoky doporučenými zubním lékařem.
- V tomto výrobku nepoužívejte jód, solný roztok ani ve vodě nerozpustné koncentrované esenciální oleje. Jejich použití může snížit výkon a zkrátit životnost výrobku.
- Pokud se koncovka Pik Pocket™ (není součástí všech modelů) z jakéhokoli důvodu oddělí od hřídele, vyhodte koncovku i hřídel a vyměňte je za novou koncovku Pik Pocket™.
- Před použitím tohoto přípravku odstraňte veškeré šperky z úst.
- Nepoužívejte výrobek, pokud máte otevřenou ránu na jazyku nebo v ústech.
- V tomto výrobku nejsou žádné elektrické součásti, které by mohl spotřebitel sám opravovat. Výrobek nevyžaduje údržbu.
- Před plněním nádržky vyjměte z přístroje nabíjecí kabel a nasadte kryt nabíjecího portu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, která je k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

ULOŽTE SI TENTO NÁVOD

SYMBOLY	
Na výrobku a/nebo obalu se mohou objevit následující symboly. Některé z těchto symbolů nemusí být ve vašem regionu relevantní a jsou uvedeny pouze pro informaci.	
Symbol	Definice
	Viz návod k použití
	Výrobce
IPX7 or IPX4	Stupeň krytí
	Zařízení třídy II podle normy IEC
	Odpojitelný napájecí zdroj
	Napětí stejnosměrného proudu (DC)
	Napětí střídavého proudu (AC)
	Neponořujte tento přístroj do žádné kapaliny.
	Nepoužívejte tento přístroj ve sprše ani ve vaně a neponořujte jej do žádné kapaliny.
	Autorizované zastoupení v Evropském společenství
	Označení shody CE
	Posouzení shody ve Spojeném království
	Značka shody s právními předpisy
	Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Omezená dvouletá záruka

Společnost Water Pik, Inc. zaručuje původnímu spotřebiteli tohoto nového výrobku, že je bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu. Spotřebitel je povinen předložit originální doklad o koupi jako důkaz o datu nákupu, a pokud je to požadováno, i celý výrobek, aby doložil nárok na záruku. Společnost Water Pik, Inc. vymění výrobek podle svého uvážení za předpokladu, že výrobek nebyl po zakoupení podroben nevhodnému zacházení, nesprávně používán, pozměněn nebo poškozen, byl používán v souladu s pokyny a byl používán pouze s příslušenstvím nebo spotřebními díly schválenými společností Water Pik, Inc. Tato omezená záruka se nevztahuje na příslušenství nebo spotřební díly, jako jsou koncovky atd. Použití s nesprávným napětím vede k poškození výrobku a ke NEPLATNOSTI záruky.

Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. V závislosti na zákonech platných v místě vašeho bydliště můžete mít i další práva.

SPOLEČNOST WATER PIK, INC. ODMÍTÁ VŠECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, MIMO JINÉ VČETNĚ VŠECH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JSOU OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. NĚKTERÉ STÁTY NEBO PROVINCE NEMUSÍ POVOLOVAT OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

POUZE PRO USA

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
(2) a toto zařízení musí snášet jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění: Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Water Pik, Inc., mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytném prostředí.

Rozhodčí řízení ve všech záležitostech spravuje Americká rozhodčí asociace (American Arbitration Association) a vede je jeden rozhodce v souladu se spotřebitelskými rozhodčími pravidly Americké rozhodčí asociace platnými v době podání žádosti. Místem konání všech takových rozhodčích řízení je stát Colorado a všechna taková rozhodčí řízení podléhají federálnímu zákonu o rozhodčích řízeních (Federal Arbitration Act) a zákonům státu Colorado.

VZDÁNÍ SE PRÁVA ÚČASTNIT SE HROMADNÝCH ŽALOB NEBO UPLATŇOVAT NÁROKY V ZASTOUPENÍ.

Dále zakoupením, instalací nebo používáním tohoto výrobku souhlasíte s tím, že rozhodčí řízení musí být individuální. To znamená, že ani vy, ani my se nemůžeme připojit k arbitrážním nárokům jiných kupujících nebo uživatelů výrobků společnosti Water Pik, Inc. nebo široké veřejnosti, ani je konsolidovat.

Kromě toho nesmíte vést soudní nebo rozhodčí řízení o jakýchkoli nárocích jako zástupce nebo člen skupiny nebo jako údajný zástupce jménem široké veřejnosti, ostatních kupujících nebo uživatelů tohoto výrobku, jiných osob nebo subjektů v podobné situaci nebo jako soukromý právní zástupce.

Blahopřejeme!

Nyní jste na cestě k lepšímu zdraví ústní dutiny!

- ZAREGISTRUJTE SE A UŠETŘETE**
Zaregistrujte svůj výrobek a získáte více než 50 dolarů úspory. waterpik.com/registration
- JSME TU, ABYCHOM VÁM POMOHLI**
Doufáme, že se vám nová ústní sprcha líbí. Pokud z jakéhokoli důvodu nejste spokojeni nebo máte jakékoli dotazy k výrobku, obraťte se prosím na náš rychlý a přátelský tým zákaznického servisu se sídlem ve Fort Collins v Coloradu.

Tel.: 1-800-525-2774
Pondělí-pátek
7.00–17.00 hodin MST

Chat nebo e-mail
service@waterpik.com

Stručný průvodce spuštěním

ZAČÍNÁME

- Když je přístroj vypnutý (O), připojte nabíjecí kabel k dodávané síťové nabíječce USB. Zapojte nabíječku do zásuvky, poté připojte druhý konec nabíjecího kabelu k přístroji a nabíjejte.

Poznámka: Požadované specifikace síťové nabíječky USB naleznete v části DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

- Před otevřením krytu nabíjecího portu a připojením nabíječky se ujistěte, zda je přístroj suchý. Po nabíjení nasadte kryt nabíjecího portu a ujistěte se, že je zcela usazen (v jedné rovině s vnějším povrchem rukojeti).**

- Před prvním použitím přístroje**
- 4 hodiny nabíjejte.**