

# NEX Pro

## O'Yeet US

### návod k použití

#### **BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE**

Snažili jsme se, aby byl přístroj NEX Pro co nejbezpečnější. Jedná se o pokročilý mechanický nástroj s elektronickými součástkami. Pokud přístroj NEX Pro včetně příslušenství není správně udržován, hrozí riziko požáru, elektrického zkratu nebo zranění při používání přístroje. Následující pokyny je třeba dodržet za všech okolností:

#### **POUŽÍVEJTE POUZE PODLE POKYNŮ.**

Přístroj NEX Pro používejte výhradně tak, jak je uvedeno v tomto návodu k použití. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které jsou pro přístroj NEX Pro doporučené. Neprovádějte žádnou jinou údržbu, než jaká je u přístroje NEX Pro uvedena.

#### **NENÍ URČENO PRO DĚTI.**

Přístroj NEX Pro a nabíječ k němu nejsou určeny pro děti a pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a rozhodovacími schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby. Nedovolte, aby byl přístroj NEX Pro používán jako hračka. Je-li přístroj používán v blízkosti dětí, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Děti musí mít být pod dohledem, aby si s přístrojem NEX Pro a s jeho nabíječem nehrály.

#### **OMEZTE RIZIKO ZRANĚNÍ.**

Přístroj O'Yeet NEX pro nabíjejte výhradně prostřednictvím dodávaného nabíjecího kabelu. Jiné nabíjecí kabely mohou způsobit zranění či škody na majetku. Nepřipojujte přístroj NEX Pro do elektrické zásuvky, ani k cigaretovému zapalovači. Mohlo by dojít k trvalému poškození vestavěného akumulátoru.

#### **MÍSTA PRO NABÍJENÍ.**

Přístroj NEX Pro musí být nabíjen v dobře větraných, suchých vnitřních prostorách. Nenabíjejte přístroj NEX Pro venku, v koupelně nebo ve vzdálenost menší než 3,1 metru od vany či bazénu. Nepoužívejte přístroj NEX Pro a jeho nabíječ na mokřím povrchu a nevystavujte nabíječ vlhku, dešti a sněhu. Přístroj NEX Pro a nabíječ nepoužívejte v místech, kde existuje riziko výbuchu (plynné výpary, prach, hořlavé materiály). Mohou vznikat jiskry, které by mohly způsobit požár.

#### **ODPOJTE NABÍJECÍ KABEL.**

Tahejte za vidlici, nikoliv za kabel, abyste omezili riziko poškození elektrické vidlice a kabelu. Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami. Nepoužívejte a nenabíjejte přístroj s vadným kabelem. Nenatahujte nabíjecí kabel a nevystavujte jej zátěži. Kabel uchovávejte mimo teplé povrchy. Nemanipulujte s nabíjecím kabelem, ani s přístrojem NEX Pro mokřými rukama.

Nepoužíváte-li nabíječ, odpojte jej od elektřiny. Nabíječ odpojte ze zásuvky, nebudete-li jej delší dobu používat. Nabíjecí kabel musí být na takovém místě, aby se na něj nešlapalo, nezakopávalo se o něj a aby nebyl jinak namáhán. Pokud dojde k poškození nabíjecího kabelu, neprodleně jej vyměňte.

#### **VENTILAČNÍ OTVORY MOTORU NECHÁVEJTE VOLNÉ.**

Do ventilačních otvorů nekládejte žádné překážky. Nepoužívejte přístroj, má-li blokováné ventilační otvory. Ventilační otvory udržujte bez prachu, vláken, vlasů či jiných nečistot, které by omezovaly proudění vzduchu. K ventilátorům a pohyblivým částem nepřibližujte vlasy, volné oděvy a prsty.

#### **NESPALUJTE A NEZAPALUJTE PŘÍSTROJ NEX Pro.**

Mohlo by dojít k výbuchu akumulátoru, ke zranění osob a škodám na majetku. Při hoření akumulátoru vznikají jedovaté výpary a materiály.

#### **NESTLAČUJTE, NESHAZUJTE A NEPOŠKOZUJTE NABÍJECÍ KABEL PŘÍSTROJE.**

Nabíječ nepoužívejte, pokud byl vystaven úderu ostrým předmětem, upadl na zem, převrhl se či byl jinak poškozen. CHEMIKÁLIE Z AKUMULÁTORU MOHOU ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POPÁLENINY. Vestavěný akumulátor nesmí nikdy přijít do kontaktu s pokožkou, očima a ústy. Pokud z poškozeného akumulátoru uniknou chemikálie, použijte k jejich likvidaci gumové nebo neoprenové rukavice. Jestliže je kapalinám z akumulátoru vystavena pokožka, omyjte ji mýdlem a vodou a opláchněte octem. Pokud došlo k zasažení očí chemikáliemi z akumulátoru, okamžitě je začněte vyplachovat proudem vody, pokračujte ve vyplachování po dobu 20 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte a zlikvidujte znečištěné oděvy.

#### **NEPOUŽÍVEJTE POD PŘIKRÝVKOU ČI POLŠTÁŘEM.**

Docházelo by k nadměrnému zahřívání, mohl by vzniknout požár, elektrický zkrat či zranění.

#### **SKLADOVÁNÍ PŘÍSTROJE NEX Pro.**

Přístroj skladujte na chladném, suchém místě. Přístroj NEX Pro nabíjejte jen při teplotách ovzduší v rozmezí od 0 °C do 40 °C. Přístroj neskladujte tam, kde by teploty překračovaly 40 °C – například na přímém slunečním světle, ve vozidle, v kovovém přístřešku během léta apod.

#### **NEROZEBÍREJTE.**

Rozebírání a nesprávné složení přístroje může mít za následek elektrický zkrat, požár nebo únik chemikálií z akumulátoru. Pokud byl přístroj NEX Pro nebo jeho nabíječ demontován či nějaká část přístroje odstraněna, pozbývá platnosti záruka.

## SLUŽBY.

Jestliže přístroj NEX Pro nepracuje správně, dostal ránu, byl upuštěn na zem, poškozen, ponechán ve venkovních prostorách nebo spadl do vody, nepoužívejte jej a obraťte se na firmu OYeeet s žádostí o opravu a služby prostřednictvím elektronické pošty [help@oyeeet.com](mailto:help@oyeeet.com). Nesnažte se přístroj OYeeet NEX Pro opravovat či rozebírat, hrozí riziko elektrického zkratu a požáru.

## NEPOUŽÍVEJTE PŘI KOUPÁNÍ, VE VANĚ NEBO V UMYVADLE.

Neumísťujte přístroj NEX Pro či jeho nabíječ tak, že by mohl spadnout do vany či umyvadla. Neumísťujte přístroj do vody a nenechte do něj natéct vodu či jiné kapaliny. Nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Okamžitě jej vypněte ze zásuvky.


## TEPLOTNÍ OMEZOVAČ.

Přístroj NEX Pro má automaticky teplotní omezovač, který přístroj vypne dřív, než dojde k jeho přehřátí a k požáru.

## TECHNICKÉ ÚDAJE PŘÍSTROJE OYeeet NEX Pro

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                       | MG-S1                                                                                         |
| Frekvence:                 | 4 nastavitelné rychlosti + režim autorotace 1600–3500 ot./min.                                |
| Hloubka záběru:            | 12 mm                                                                                         |
| Maximální přitlačná síla:  | >27,2 kg                                                                                      |
| Li-ion akumulátor:         | 16,8 V 4 x1650 mAh                                                                            |
| Nabíjecí kabel:            | USB pro stejnosměrný proud 5 V/1,5 A                                                          |
| Doba nepřetržité činnosti: | >4 hodiny při normální zátěži (pod 2,3 kg)<br>>1 hodina při vysoké zátěži (2,3 – 5,4 kg)      |
| Motor:                     | NEXPower™ QP38 by OYeeet Dynamic Lab,<br>3fázový, 14pólový se 3 senzory,<br>neodymové magnety |


## SOUČÁSTI DODÁVKY

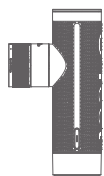

NEX Pro




nabíjecí  
podstavec

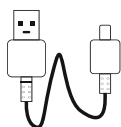


nabíjecí  
kabel




cestovní  
brašna

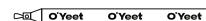

poutko  
k brašně

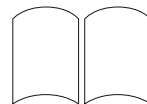


návod  
k použití

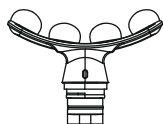

PROHNUTÁ S POLŠTÁŘKY




KOVOVÁ PLOCHÁ

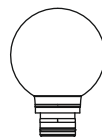


KULOVÁ



MĚKKÁ KULOVÁ

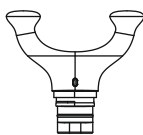

VIDLICOVÁ

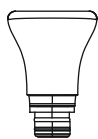

KLÍNOVÁ



KUŽELOVÁ



PROJEKTILOVÁ

## SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJEM OYee NEX Pro

špičková technologie  
NEXPower QP38 Moto

dvojí hřídel 2.0

výměnná hlavice


rukojeť

vestavěný akumulátor  
NEX 1650 mAh x 4

vypínač  
4 nastavitelné rychlosti  
+ režim autorotace s optimálním tlakem

krhový LED ukazatel tlakového senzoru  
pro terapie a lékaře

nabíjecí konektor

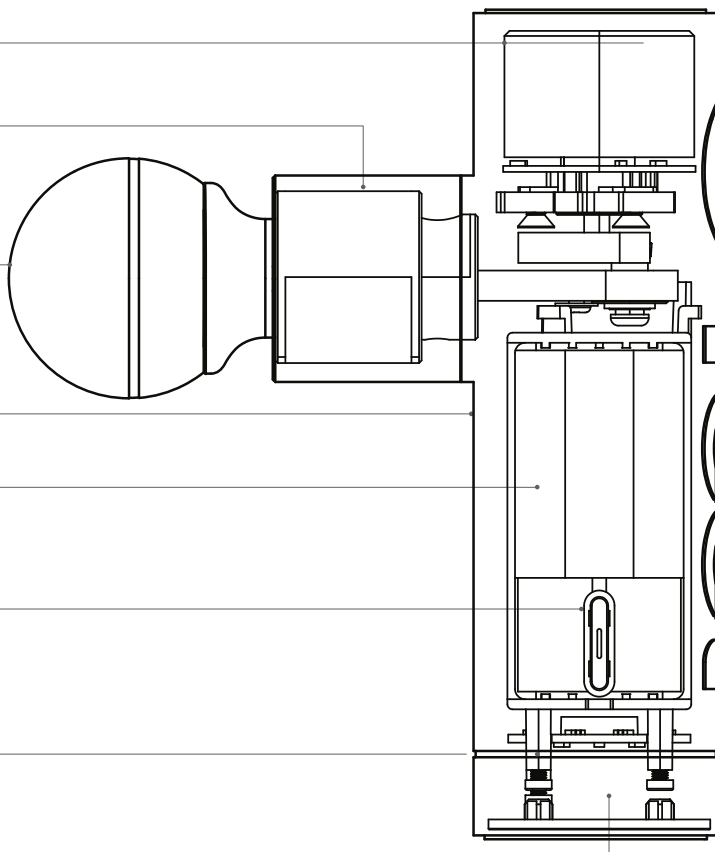


## POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE OYee NEX Pro

1. Přístroj NEX Pro zapnete pevným stiskem a přidržením vypínače.
2. Stiskem vypínače zvýšíte rychlost, snížíte rychlost nebo zapnete autorotační režim.  
Přístroj NEX Pro má 4 nastavení rychlosti a autorotační režim s rozsahem 1600–3500 ot./min.

\* Je-li zapnutý autorotační režim, LED kontrolka začne žhnout.

3. Signalizace kontrolky tlakového senzoru: Prstenec s kontrolkami informuje o úrovni přtlaku.  
Žlutá: 0 ~ 3 kg  
Oranžová: 3 ~ 6 kg  
Červená: více než 6 kg
4. Přístroj NEX Pro vypnete stiskem a přidržením vypínače po dobu, než dojde k jeho vypnutí.

Poznámka: Před prvním použitím nechte přístroj NEX Pro nabíjet po dobu 6 hodin.

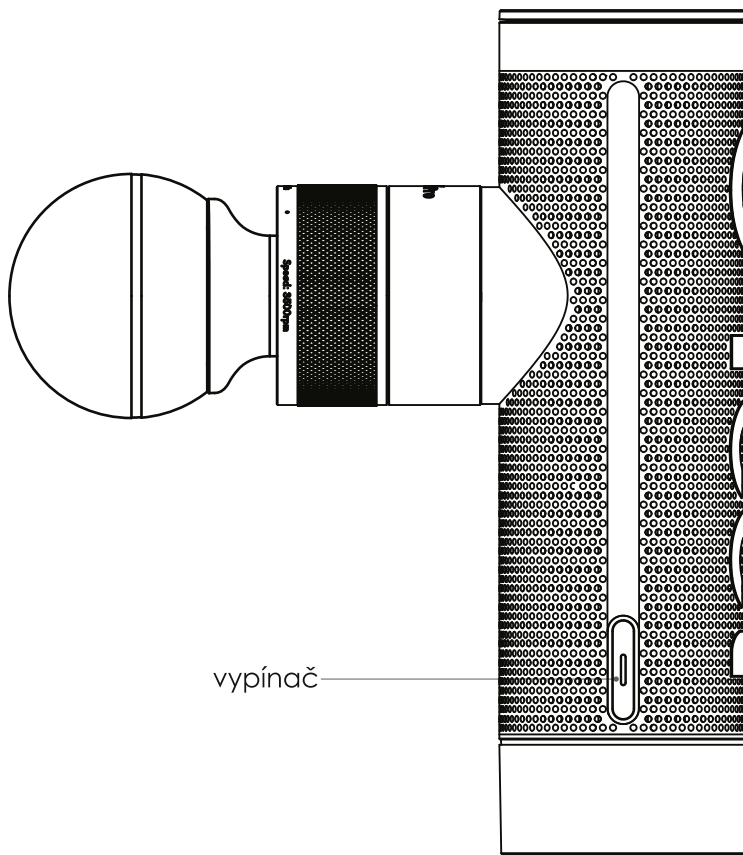


## PŘIPOJENÍ HLAVIC

Zarovnejte hlavici s koncem ramene přístroje a připojte ji zatlačením. Hlavici odpojte tak, že ji uchopíte prstem z každé strany plastového konektoru. Poté ji vysunete z nástavce.



Vidlicovou hlavici otočte značkou nahoru a zasuňte ji přitlačením.

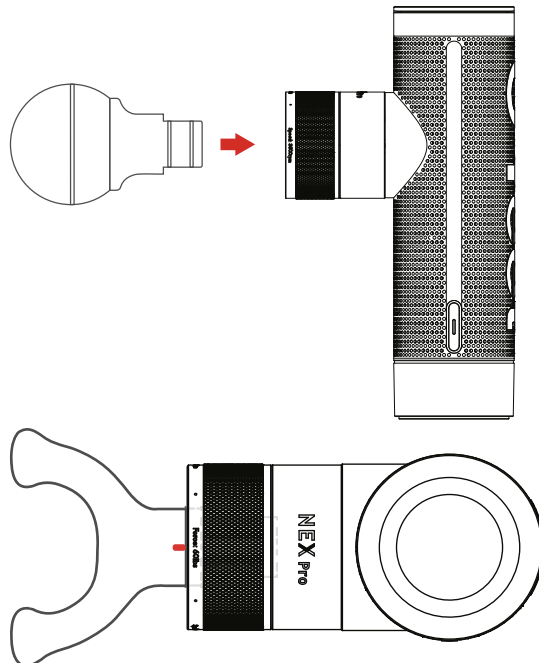

## NABÍJENÍ PŘÍSTROJE OYeeet NEX Pro

### NABÍJENÍ KABLEM

Přístroj NEX Pro lze nabíjet přímo pomocí kabelu. Kabel stačí připojit do nabíjecí zdířky a vidlici zasunout do elektrické zásuvky. Kontrolka napájení přístroj NEX Pro se vypne a kruh z LED začne žhnout, jakmile je přístroj správně připojený. Kontrolky žhnout přestanou a zůstanou rozsvícené, jakmile je přístroj nabitý.

### NABÍJENÍ POMOCÍ PODSTAVCE

Nabíjecí kabel připojte k bezdrátovému nabíjecímu podstavci a zapojte vidlici do elektrické zásuvky. Přístroj NEX Pro pak stačí ponechat na podstavci a začne se nabíjet.

Kontrolka napájení přístroj NEX Pro se vypne a kruh z LED začne žhnout, jakmile je přístroj správně připojený. Kontrolky žhnout přestanou a zůstanou rozsvícené, jakmile je přístroj nabitý.


### AKUMULÁTOR

Zelená – 50 % a více

Oranžová – 25–50 %

Červená – 5–25 %

Blikající červená – méně než 5 %, přístroj se vypne. Co nejdříve jej začněte nabíjet.

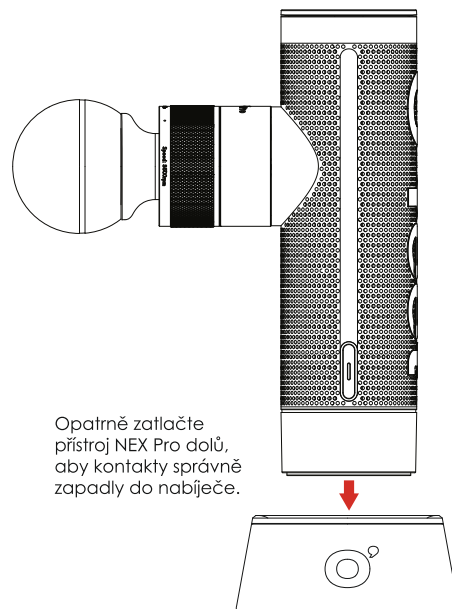

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství přístroje NEX Pro tvoří 8 nasazovacích hlavice určených pro specifickou péči.


### KOVOVÁ PLOCHÁ

Výborná pro skutečně husté svalové skupiny. Dokonalá pro silné lékaře.




### PROHNUTÁ S POLŠTÁŘKY

Simulovaná poklepávací masáž se stálou intenzitou např. na paže, stehna a další zakřivené části těla.

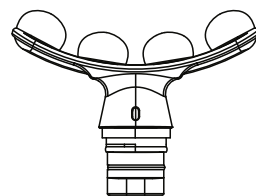


### KLÍNOVÁ

Skvělá pro iliotibiální trakt, lopatky a běžně používaná pro „škrábání“ a „stimulaci“, určená ke snížení množství kyseliny mléčné ve svazech.

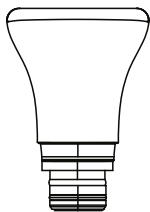


### VIDLICOVÁ

Zakulacené konce pracují kolem specifických svalových skupin.

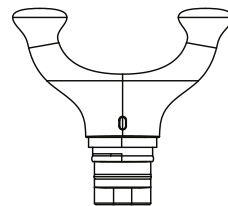

### MĚKKÁ KULOVÁ

Větší plocha, nejlepší pro začátek před zúžením záběru na místo bolesti.

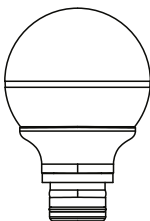


### PROJEKTILOVÁ

Řeší konkrétní místo a uvolňuje příčinu bolesti.



### KULOVÁ

Dokonalá pro všeobecné použití před zúžením záběru na místo bolesti.

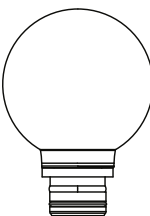

### KUŽELOVÁ

Běžně používaná k bodové péči o svaly včetně dlaní a chodidel.



### Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webových stránek <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



@oyeetgo



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)