

GLOX W8

masážna pištoľ



návod na použitie

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Vážime si vašu dôveru a dúfame, že budete s naším výrobkom spokojní. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúcu potrebu. Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným pokynom, ktoré sú kľúčové pre bezpečné a správne používanie produktu. Ak máte k prístroju akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa obrátiť na našu zákaznícku linku. Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme.

POKYNY K BATÉRII

Čas nabíjania: Keď je batéria vybitá, je potrebné ju nabíjať približne 3 hodiny, aby sa úplne nabila.

Výdrž batérie: Výdrž jednej batérie závisí od sily prítaku, ktorá sa môže počas používania líšiť.

čas používania: Závisí od úrovne tlaku počas používania.

nabíjacie zariadenie: Pri nabíjaní batérie použite špeciálne priložený nabíjací kábel určený pre tento prístroj. Uistite sa, že funguje s napätím 5V, ktoré spĺňa požadované normy.

adaptér: Na nabíjanie zariadenia používajte 15W adaptér.

Zobrazenie nabíjania: Počas nabíjania sa na displeji zobrazuje aktuálna úroveň nabitia batérie.

Signalizácia nabíjania: Pri trojtlačidlom modeli bliká počas nabíjania svetlo na displeji.

Dokončenie nabíjania: Keď batéria zobrazuje symbol „100%“, nabíjanie je dokončené. Pre vašu bezpečnosť nezačínajte nabíjanie znova.

Pred prvým použitím nabite batériu na **100%**.

NÁVOD NA POUŽITIE

Upozornenie: Je dôležité mať na pamäti, že pri akomkoľvek cvičení alebo terapeutickej aktivite existuje riziko fyzického zranenia. Každý cvičebný program vrátane tohto môže spôsobiť úraz. Pred začatím tohto alebo akéhokoľvek iného cvičebného či terapeutického programu sa odporúča konzultácia s lekárom. Pred použitím vložte masážnu hlavicu do predného otvoru zariadenia.

Hĺbková masáž môže rýchlo zmierniť bolesť, burzitídu, svalové kŕče, neuralgiu a ďalšie ochorenia kostrového svalstva. Takmer všetky ochorenia mäkkých tkanív súvisia s traumou, nadmerným používaním svalov alebo abnormálnym držaním tela.

Opatrenia pri používaní:

Vyhňte sa nadmernému tlaku a dlhodobej fyzikálnej terapii.

Vyhýbajte sa citlivým oblastiam, ako je hlava, tvár a krčná chrbtica.

Ak sa objaví zápal, opuch alebo zhoršenie bolesti, okamžite prestaňte zariadenie používať.

Súčasný výskum sa zaoberá účinkom vibračného tréningu na konkrétne zdravotné ochorenia, čo môže znížiť počet kontraindikácií.

Kombinácia vibračného tréningu s fyzikálnou terapiou sa často odporúča, mala by sa však vykonávať na základe rady alebo v prítomnosti lekára, špecialistu alebo fyzioterapeuta. Správna regenerácia a odpočinok sú kľúčové pre odstránenie svalovej únavy a obnovu sily. používaním svalov alebo abnormálnym držaním tela.

FUNKCIE

Prepínanie rýchlostí:

Zvýšenie rýchlosti: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  čím zapnete pištoľ na prvú rýchlosť. Ďalším dotykom vždy zvýšite rýchlosť o jeden stupeň. Celkovo je k dispozícii 6 rýchlostí.

Zobrazenie napájania:

Aktuálny stav napájania: Dolné percentá ukazujú aktuálnu úroveň nabitia, kde úplné nabitie je 100%. Hodnota sa mení podľa spotreby energie. Ak sa zobrazuje iba červených 25%, znamená to, že výkon zariadenia je nedostatočný a je potrebné ho nabiť.


Zapnutie / Vypnutie zariadenia:

Keď je prístroj v prevádzke, po siedmom dotyku sa prístroj vypne na rýchlosť 0. Úplné vypnutie prístroja spodným prepínačom ON/OFF.

Funkcia časovej ochrany:

Automatické vypnutie: Prístroj má funkciu časovej ochrany, ktorá spôsobí automatické vypnutie každých 15 minút. Ak potrebujete zariadenie znova použiť, prosím, reštartujte ho.

Indikácia funkcie

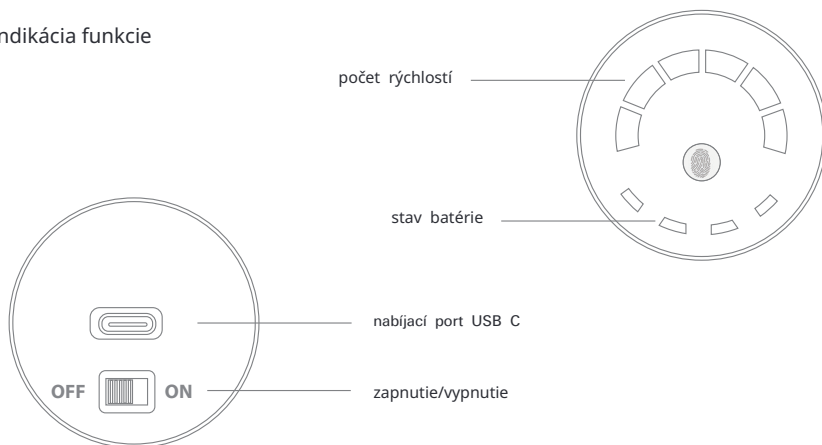

⚠ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

- Na nabíjanie produktu použite špeciálne priložený USB kábel s 5V napájacím adaptérom.
- Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným krytom alebo nesprávnym napätím, aby nedošlo k poškodeniu jednotky.
- Nedotýkajte sa nabíjacieho kábla a adaptéra mokрыmi rukami a netahajte za kábel pri odpájaní nabíjačky.
- Vyvarujte sa kontaktu s produktom alebo nabíjačkou mokрыmi rukami, aby ste predišli skratu, poruche alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Prestaňte používať adaptér, ak je vystavený dažďu, kvapaline alebo je silno vlhký.
- Tento produkt nie je určený na lekárske účely, slúži iba na osobnú masáž.
- Určité osoby, ako sú osoby s kardiostimulátorom, srdcovými chorobami, tehotné ženy, osoby s ochorením chrbta, zlomeninami, osteoporózou, ochoreniami kĺbov, zhubnými nádormi, kožnými poraneniami alebo ekzémom, s cukrovkou s komplikáciami, ako je neuropatia alebo poškodenie sietnice, po nedávnej operácii, s epilepsiou alebo migrénami, herniou platničiek, spondylolýzou, spondylolýzou alebo spondylózou, po nedávnej náhrade kĺbov, s vnútromaternicovými telieskami, kovovými čapmi alebo platničkami alebo ak existujú akékoľvek obavy o vaše fyzické zdravie, by produkt nemali používať. Ak máte zdravotné ťažkosti, konzultujte použitie s lekárom.
- Nevystavujte batériu vysokým teplotám ani ju neumiestňujte do blízkosti vykurovacích zariadení, ako je slnečné žiarenie alebo ohrievače, aby nedošlo k prehriatiu a výbuchu.
- Nerozoberajte ani neupravujte batérie, nevkladajte cudzie predmety a neponárajte ich do vody, aby nedošlo k úniku, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Batérie by mali byť bezpečne zlikvidované v súlade s platnými predpismi.
- Nedovoľte deťom ani osobám, ktoré nie sú samostatné, obsluhovať a používať tento produkt. Umiestnite ho mimo dosahu detí.
- Používajte iba na suchom a čistom povrchu. Možno použiť cez oblečenie, jemne pritlačte a pohybujte po pokožke, maximálne 60 sekúnd na každú časť.

- Nepoužívajte na temene hlavy ani na tvrdých kostnatých častiach tela. Ak nepocítujete bolesť ani nepohodlie, používajte iba na mäkké tkanivá tela.
- Nepoužívajte v oblastiach s modrinami, bolesťou alebo nepohodlím.
- Nestojte ani si nesadajte priamo na výrobok, aby nedošlo k pádu.
- Nadmerné používanie môže spôsobiť prehriatie a skrátiť životnosť produktu. Nechajte výrobok vychladnúť pred opakovaným použitím.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí, ako je kúpeľňa, a nekladajte výrobok do vody ani iných kvapalín, aby nedošlo ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Neumiestňujte výrobok blízko zdrojov tepla ani na priame slnečné svetlo.
- Nepoužívajte prístroj počas búrky.
- Nevkladajte ani nepúšťajte predmety do žiadnych otvorov výrobku.
- Neprikrývajte masážny prístroj počas používania, aby nedošlo k poruche spôsobenej zvýšením teploty motora.
- Nedovoľte, aby sa prsty, vlasy alebo iné časti tela priblížili k hriadeľu a zadnej časti vibračnej hlavice, aby nedošlo k ich zachyteniu.

Údržba

Povrch zariadenia utrite jemne vlhkým uterákom a následne ho osušte mäkkou handričkou. Tým zabezpečíte, že na povrchu nezostanú žiadne stopy vlhkosti.

Pri dlhodobom skladovaní alebo cestovaní uložte produkt do pôvodnej škatule. Dbajte na to, aby zariadenie zostalo suché, čo pomôže ochrániť ho pred poškodením a zachovať jeho funkčnosť.

ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu	Masážna pištoľ
Model produktu	GLOX W8
Menovitý výkon	18 W
Nabíjacie napätie	5V
Nabíjací prúd	2A
Kapacita batérie	1800 mAh
Čas nabíjania	2-3 hodiny
Výdrž batérie	až 6 hodín
Nastaviteľné úrovne	6 úrovní
Hmotnosť	770 g

Obsah balenia

- 6 typov masážnych nastavcvo
- Masážna pištoľ GLOX W8
- nabíjací kábel USB C
- Cestovné puzdro

POPIS a VYUŽITIE MASÁŽNYCH HLAVÍC



nadstavec „polmesiac“

Vhodné na masáž hlbokých tkanív, ako sú meridiánové body dlaní, chodidiel atď.



nadstavec „pazúry“

Vhodné na uvoľnenie mäkkých tkanív a citlivej pokožky



nadstavec „Y“

Vhodné na masáž krku súbežne na oboch stranách chrbtice a na masáž Achillovej šľachy



plochý nadstavec

Vhodné na masáž celého tela s uvoľnením svalov



nadstavec „nábojnica“

Vhodné na masáž hlbokých tkanív, ako sú meridiány, kĺby, dlane, chodidlá



nadstavec „gulôčka“

Vhodné na masáž paží a dolnej časti chrbta, veľkých svalových skupín, ako sú sedacie svaly, stehná a lýtko



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu.

Tým, že zabezpečíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky. Na uplatnenie záruky je dôležité dodržať nasledujúce podmienky:

Opravy a servis: V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku. Je nevyhnutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Podmienky, za ktorých nemožno reklamáciu uznať:

nesprávne použitie: Používanie výrobku na iný účel, ako na ktorý je určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis.

Poškodenie: Poškodenie spôsobené živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickým poškodením vinou kupujúceho (napr. pri preprave alebo čistení nevhodnými prostriedkami).

Opatrebovanie: Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérie).

Vonkajšie vplyvy: Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie, elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny alebo predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie, nesprávna polarita napätia, chemické procesy a podobne.

Úpravy a modifikácie: Akékoľvek úpravy, modifikácie alebo zmeny konštrukcie výrobku, ktoré menia jeho funkcie oproti zakúpenému vyhotoveniu, alebo použitie neoriginálnych súčastí.

Dovozca: LASER CUT s.r.o., 4.května 2186, 755 01 Vsetín.

4.května 2186, 755 01 Vsetín

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

.....

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca: LASER CUT s.r.o.

4. mája 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu/dovozcu.

Produkt: Fascial gun/Masážna pištoľ

Model/typ: **w8 gLOX**

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normami použitými na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach.

Directive (EU) 2011/65/EU & EU 2015/863

Príslušné harmonizované normy, na ktoré sa vzťahuje zhoda, sú:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+A15:2021

EN 62233:2008

EN IEC 60335-2-32:2021

Tento produkt nesie označenie CE:

Podpísal:

Meno a funkcia:

Dátum a miesto:

CE

Robert Fiala, konateľ spoločnosti

2. apríla, 2025 - Vsetín

Podpis



Vysvetlenie symbolov:

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a typovom štítku prístroja môžu byť použité nasledujúce symboly:

	nebezpečenstvo! Prístroj sa nesmie používať vo vode ani v jej blízkosti (umývadlo, sprcha, vaňa) - nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.		Značka na identifikáciu obalového materiálu: A - skratka materiálu B - číslo materiálu 1-7 plasty 20-22 papier a lepenka
	Prečítajte si pokyny.		Informácie o výrobku Upozornenie na dôležité informácie.
	Likvidácia podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)		Označenie CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.
	Batérie s obsahom škodlivých látok nepatrí do komunálneho odpadu.		Značka posudzovania zhody pre Veľkú Britániu
	Výrobca		Symbol dovozu

	Súčasť obalu roztriedte a zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.		Produkt a súčasti obalu roztriedte a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú technickým predpisom EEU.		Prístroj triedy ochrany II Prístroj má dvojité ochrannú izoláciu a spĺňa tak triedu ochrany II.

	NEBEZPEČENSTVO	Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak mu nezabráňte, dôjde k smrti alebo závažným zraneniam.
	VAROVANIE	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak mu nezabráňte, môže dôjsť k smrti alebo závažným zraneniam.
	POZOR	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak mu nezabráňte, môže dôjsť k ľahkým alebo drobným poraneniam.
	UPOZORNENIE	Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa jej nevyhnete, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo predmetov v okolí.

GLOX
www.glox.cz