


MULTIFUNKČNÍ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

TB-1718

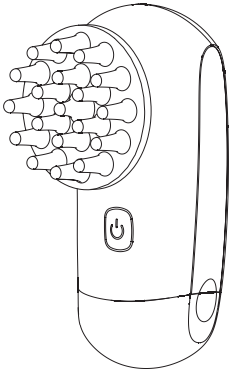

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Následující osoby by neměly používat toto zařízení:

- Těhotné, nebo kojící ženy; osoby s alergiemi; osoby s neurologickými nebo mentálními postiženími; osoby, které měly transplantace vlasů; osoby s otevřenými ranami, popraskanou nebo oteklou kůží v oblasti použití; osoby se onemocněními pokožky hlavy, jako je dědičná dermatitida, seboroičká dermatitida a ekzém; osoby s akutním onemocněním nebo zhoubnými nádory; osoby s poruchou krvácení, hemofilii a jinými nemocmi; osoby s hypertenzí atd.
- Netlačte na pokožku ani nepohybujte zařízením příliš rychle, aby se zabránilo zranění.
- Nepoužívejte zařízení nadměrně, aby nedošlo ke zranění pokožky hlavy.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Nepoužívejte jej, pokud je poškozeno.
- Pokud pocítíte při používání nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.

UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost. Nesdílejte jedno zařízení s více lidmi.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

SPECIFIKACE

- Typ TB-1718
- Napájení: 3 V / 2.4 W
- Typ baterie: 2x AA (není součástí dodávky)
- Podnikový standard: Q/XMMJ1001-2015 Q/XMMJ1019-2016

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)

- 1. Hlavice pro masáž hlavy
- 2. Tlačítko napájení / volby intenzity
- 3. Místo pro sejmутí krytu baterie
- 4. Kryt baterie
- 5. Hlava kartáčku na čišťení obličje
- 6. Měkčí masážní hlavice

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vložte baterie

Držte zařízení zadní stranou nahoru a sejměte kryt baterie. Vložte dvě baterie AA do prostoru pro baterie podle symbolů + a - (baterie nejsou součástí dodávky). (Obrázek 2)

2. Demontujte hlavu příslušenství

Připojte k přístroji kartáčovou hlavici na čišťení obličje nebo hlavici na masáž hlavy. Zatlačte na ní, dokud nezapadne na místo kliknutím. Chcete-li odstranit hlavici, přidržte zařízení a vytáhněte hlavici. (Obrázek 3)

3. Volba úrovně intenzity

Stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity zapnete zařízení. Stisknutím a podržením tlačítka napájení / volby intenzity postupně zvyšujete úroveň intenzity. Chcete-li postupně snižovat úroveň intenzity, stiskněte a podržte tlačítko napájení / rychlosti. Upravte úroveň intenzity podle svých potřeb.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro zajištění správného fungování tohoto zařízení si před použitím pečlivě přečtěte pokyny.

1. Masáž hlavy

1) Vyberte a nasadte vybranou hlavu příslušenství. Krátké stisknutí tlačítka napájení / volby intenzity pro zapnutí zařízení.

2) Jemně přiložte masážní hlavici na pokožku hlavy. Podle vašeho potřeby, stisknutím a podržením tlačítka napájení / volby intenzity upravte úroveň intenzity. Pomalu pohybujte masážní hlavici pro masáž pokožky hlavy.

3) Pořadí použití a pokyny:

- Přední část hlavy: Jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji pohybujte od line vlasů k temeni hlavy, opakujte 2–3krát. (Obrázek 4)
- Levá a pravá strana hlavy: Jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji přesouvejte od line vlasů k vrcholu hlavy. Opakujte 2–3krát. Při používání zařízení na pravé strany hlavy, držte ji pravou rukou a masírujte. Pokud používáte zařízení na levé straně hlavy, držte ji levou rukou a masírujte. (Obrázek 5)
- Zadní část hlavy: Jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji pohybujte od temene hlavy k zátylku, opakujte 2–3krát. (Obrázek 6)

4) Po použití vypněte krátkým stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity přístroj.

2. Čištění obličje

1) Namontujte kartáčovou hlavu na čišťení obličje a navlhčete obličej vodou.

2) Krátkým stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity zapnete zařízení a upravte úroveň intenzity podle svých potřeb. Navlhčete obličej vodou, na dlaň naneste čisticí gel nebo krém, do druhé ruky vezměte přístroj a třete jeho kartáčovou hlavou ruku s naneseným gelem/krémem, čímž vytvoříte pěnu.

3) Naneste pěnu na obličej a jemně krouživými pohyby pohybujte čisticí hlavici zevnitř ven. Doporučená čisticí plocha, pořadí a doba používání: T-zóna (čelo, oblast nosu) 20 s → levá a pravá tvář po 15 s (celkem 30 s) → brada 10 s → krk 30 s. (Obrázek 7)

4) Po použití zařízení vypněte a opláchněte obličej vodou a použijte své každodenní produkty péče o pleť.

5) Po každém použití umyjte hlavu kartáče čistou vodou a nechte působit uschnout na dobře větraném místě. Tělo přístroje ořeťte čistým mírně vlhkým hadříkem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čištění se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Očistěte tělo zařízení čistým mírně vlhkým hadříkem a osušte jej. Neponořujte toto zařízení do vody.
- Hlavy příslušenství omyjte vodou a nechte je uschnout na dobře větraném místě. Nesušte na přímém slunci.
- Na toto zařízení nikdy nepoužívejte maziva, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače.
- Při čištění hlav příslušenství nepoužívejte k čištění vodu s teplotou vyšší než 40 °C nebo agresivní kapalinu.
- Doporučuje se vyměnit kartáčovou hlavu každé 3 měsíce. Kartáčové hlavy jsou vhodné pouze pro multifunkční masážní zařízení TOUCHBeauty.

SKLADOVÁNÍ

Toto zařízení je napájeno z baterie. Neumísťujte ani neukládejte zařízení na delší dobu do horkého nebo vlhkého prostředí. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy

Baterie obsahují látky, které mohou znečistit životní prostředí. Při likvidaci tohoto zařízení jej prosím nevhazujte do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte toto zařízení odevzdáním místě sběru elektroodpadu, abyste přispěli k ochraně životního prostředí.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je téměř nebo úplně vybitá. Baterie byly vložené nesprávně.	Vyměňte baterie podle pokynů. Vložte baterie správně podle pokynů.
Zařízení při používání vydává neobvyklý hluk. Další problémy	Kartáčová hlava byla nainstalována nesprávně.	Vypněte zařízení a nainstalujte kartáčovou hlavu správně podle pokynů. Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.


VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.


DOVOZCE:

Elem s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.

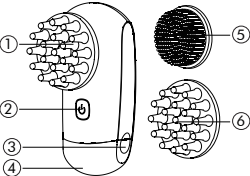

obrázek 1

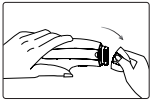


obrázek 2




obrázek 3



obrázek 4

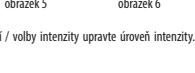

obrázek 5

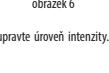


obrázek 6



obrázek 7

MULTIFUNKČNÍ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

TB-1718

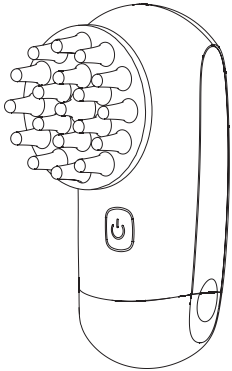

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Následující osoby by neměly používat toto zařízení:

- Těhotné, nebo kojící ženy; osoby s alergiemi; osoby s neurologickými nebo mentálními postiženími; osoby, které měly transplantace vlasů; osoby s otevřenými ranami, popraskanou nebo oteklou kůží v oblasti použití; osoby se onemocněními pokožky hlavy, jako je dědičná dermatitida, seboroičká dermatitida a ekzém; osoby s akutním onemocněním nebo zhoubnými nádory; osoby s poruchou krvácení, hemofilii a jinými nemocmi; osoby s hypertenzí atd.
- Netlačte na pokožku ani nepohybujte zařízením příliš rychle, aby se zabránilo zranění.
- Nepoužívejte zařízení nadměrně, aby nedošlo ke zranění pokožky hlavy.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Nepoužívejte jej, pokud je poškozeno.
- Pokud pocítíte při používání nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.

UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost. Nesdílejte jedno zařízení s více lidmi.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

SPECIFIKACE

- Typ TB-1718
- Napájení: 3 V / 2.4 W
- Typ baterie: 2x AA (není součástí dodávky)
- Podnikový standard: Q/XMMJ1001-2015 Q/XMMJ1019-2016

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)

- 1. Hlavice pro masáž hlavy
- 2. Tlačítko napájení / volby intenzity
- 3. Místo pro sejmутí krytu baterie
- 4. Kryt baterie
- 5. Hlava kartáčku na čišťení obličje
- 6. Měkčí masážní hlavice

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vložte baterie

Držte zařízení zadní stranou nahoru a sejměte kryt baterie. Vložte dvě baterie AA do prostoru pro baterie podle symbolů + a - (baterie nejsou součástí dodávky). (Obrázek 2)

2. Demontujte hlavu příslušenství

Připojte k přístroji kartáčovou hlavici na čišťení obličje nebo hlavici na masáž hlavy. Zatlačte na ní, dokud nezapadne na místo kliknutím. Chcete-li odstranit hlavici, přidržte zařízení a vytáhněte hlavici. (Obrázek 3)

3. Volba úrovně intenzity

Stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity zapnete zařízení. Stisknutím a podržením tlačítka napájení / volby intenzity postupně zvyšujete úroveň intenzity. Chcete-li postupně snižovat úroveň intenzity, stiskněte a podržte tlačítko napájení / rychlosti. Upravte úroveň intenzity podle svých potřeb.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro zajištění správného fungování tohoto zařízení si před použitím pečlivě přečtěte pokyny.

1. Masáž hlavy

1) Vyberte a nasadte vybranou hlavu příslušenství. Krátké stisknutí tlačítka napájení / volby intenzity pro zapnutí zařízení.

2) Jemně přiložte masážní hlavici na pokožku hlavy. Podle vašeho potřeby, stisknutím a podržením tlačítka napájení / volby intenzity upravte úroveň intenzity. Pomalu pohybujte masážní hlavici pro masáž pokožky hlavy.

3) Pořadí použití a pokyny:

- Přední část hlavy: Jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji pohybujte od line vlasů k temeni hlavy, opakujte 2–3krát. (Obrázek 4)
- Levá a pravá strana hlavy: Jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji přesouvejte od line vlasů k vrcholu hlavy. Opakujte 2–3krát. Při používání zařízení na pravé strany hlavy, držte ji pravou rukou a masírujte. Pokud používáte zařízení na levé straně hlavy, držte ji levou rukou a masírujte. (Obrázek 5)
- Zadní část hlavy: Jemně přitlačte masážní hlavici na pokožku hlavy a pomalu ji pohybujte od temene hlavy k zátylku, opakujte 2–3krát. (Obrázek 6)

4) Po použití vypněte krátkým stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity přístroj.

2. Čištění obličje

1) Namontujte kartáčovou hlavu na čišťení obličje a navlhčete obličej vodou.

2) Krátkým stisknutím tlačítka napájení / volby intenzity zapnete zařízení a upravte úroveň intenzity podle svých potřeb. Navlhčete obličej vodou, na dlaň naneste čisticí gel nebo krém, do druhé ruky vezměte přístroj a třete jeho kartáčovou hlavou ruku s naneseným gelem/krémem, čímž vytvoříte pěnu.

3) Naneste pěnu na obličej a jemně krouživými pohyby pohybujte čisticí hlavici zevnitř ven. Doporučená čisticí plocha, pořadí a doba používání: T-zóna (čelo, oblast nosu) 20 s → levá a pravá tvář po 15 s (celkem 30 s) → brada 10 s → krk 30 s. (Obrázek 7)

4) Po použití zařízení vypněte a opláchněte obličej vodou a použijte své každodenní produkty péče o pleť.

5) Po každém použití umyjte hlavu kartáče čistou vodou a nechte působit uschnout na dobře větraném místě. Tělo přístroje ořeťte čistým mírně vlhkým hadříkem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čištění se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Očistěte tělo zařízení čistým mírně vlhkým hadříkem a osušte jej. Neponořujte toto zařízení do vody.
- Hlavy příslušenství omyjte vodou a nechte je uschnout na dobře větraném místě. Nesušte na přímém slunci.
- Na toto zařízení nikdy nepoužívejte maziva, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače.
- Při čištění hlav příslušenství nepoužívejte k čištění vodu s teplotou vyšší než 40 °C nebo agresivní kapalinu.
- Doporučuje se vyměnit kartáčovou hlavu každé 3 měsíce. Kartáčové hlavy jsou vhodné pouze pro multifunkční masážní zařízení TOUCHBeauty.

SKLADOVÁNÍ

Toto zařízení je napájeno z baterie. Neumísťujte ani neukládejte zařízení na delší dobu do horkého nebo vlhkého prostředí. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy

Baterie obsahují látky, které mohou znečistit životní prostředí. Při likvidaci tohoto zařízení jej prosím nevhazujte do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte toto zařízení odevzdáním místě sběru elektroodpadu, abyste přispěli k ochraně životního prostředí.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je téměř nebo úplně vybitá. Baterie byly vložené nesprávně.	Vyměňte baterie podle pokynů. Vložte baterie správně podle pokynů.
Zařízení při používání vydává neobvyklý hluk. Další problémy	Kartáčová hlava byla nainstalována nesprávně.	Vypněte zařízení a nainstalujte kartáčovou hlavu správně podle pokynů. Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.


DOVOZCE:

Elem s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.

MULTIFUNKČNÉ MASÁŽNE ZARIADENIE

TB-1718

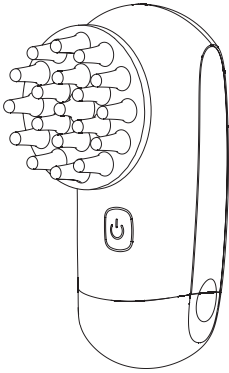

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

⚠ VÝSTRAHA

Nasledujúce osoby by nemali používať toto zariadenie:

- Tehotné a dojčiacie ženy; osoby s alergiou; osoby s neurologickými alebo psychickým postihnutím; osôb, ktoré podstúpili transplantáciu vlasov; osoby s otvorenými ranami, popraskanou alebo opuchnutou pokožkou v oblasti použitia; osoby s existujúcimi ochoreniami pokožky hlavy, ako je dedičná dermatitída, seboroická dermatitída a ekzém; osoby s akútnym ochorením alebo zhubnými nádormi; osoby s poruchou krvácania, hemofiliou a inými chorobami; osoby s hypertenziou atď.
- Netlačte na pokožku ani nehybte prístrojom príliš rýchlo aby sa zabránilo zraneniam.
- Nepoužívajte zariadenie nadmerne, aby nedošlo k poraneniu pokožky hlavy.
- Predtým, ako začnete zariadenie používať, otestujte ho. Nepoužívajte ho, ak došlo k poškodeniu.
- Ak pocítite nepríjemné pocity na hlave alebo tele, okamžite prestaňte zariadenie používať a vyhľadajte lekára.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať, rozoberať alebo opravovať.

⚠ UPOZORNENÍ


- Toto zariadenie nie je hračka, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predĺžili jeho životnosť. Nezdierajte to isté zariadenie s inými ľuďmi.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, prosím vyberte z neho batérie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Typ: TB-1718
- Napájanie: 3 V / 2,4 W
- Typ batérie: 2x AA (nie je súčasťou balenia)
- Podnikové označenie: Q/XMMU1001-2015 Q/XMMU1019-2016

POPIS ZARIADENIA (obrázok 1)

1. Hlavica pokožky hlavy
2. Tlačidlo napájania / intenzity
3. Miesto na odstránenie krytu batérie
4. Kryt batérie
5. Keľová hlavica na čistenie tváre
6. Hlavica na jemnú masáž hlavy

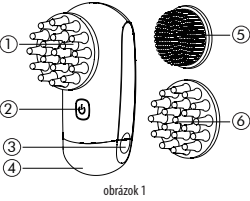


obrázok 1

POKYNY NA PRÍPRAVU

1. Vložte batérie

Držte zariadenie zadnou stranou nahor a odstráňte kryt batérie. Vložte dve AA batérie podľa symbolov v priestore pre batérie symboly + a - (batérie nie sú súčasťou balenia). (Obrázok 2)

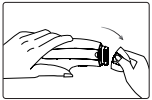

obrázok 2

2. Demontujte hlavice príslušenstva

Prípojte k prístroju hlavicu na čistenie tváre alebo hlavicu na masáž pokožky hlavy. Zatláčajte ho, až kým nezacvakne na miesto kliknutím. Ak chcete odstrániť hlavu, držte zariadenie a ťahajte za hlavu ju vyberte. (Obrázok 3)



obrázok 3

3. Voľba úrovne intenzity

Stlačením tlačidla napájania / voľby intenzity zapnete zariadenie. Stlačením a podržaním tlačidla napájania / voľby intenzity postupne zvyšujete úroveň intenzity. Ak chcete postupne znížiť úroveň intenzity, stlačte a podržte tlačidlo napájania / rýchlosti. Upravte úroveň intenzity podľa svojich potrieb.



obrázok 4

obrázok 5

obrázok 6

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre použitím si pozorne prečítajte pokyny, aby ste zaistili správne fungovanie tohto zariadenia.

1. Masáž hlavy

1) Vyberte a nainštalujte zvolenú hlavicu príslušenstva. Krátko stlačte zapnite zariadenie tlačidlom napájania / voľby intenzity.

2) Jemne priložte masážnu hlavicu na pokožku hlavy. Podľa svojich potrieb, stlačte a podržte tlačidlo napájania / intenzity a upravte úroveň intenzity. Pomaly pohybujte masážnou hlavou po pokožke hlavy.

3) Postup použitia a pokyny:

- Predná oblasť hlavy: Jemne pritlačte masážnu hlavicu na pokožku hlavy a pomaly ňou posúvajte od línie vlasov po temeno hlavy, opakujte 2–3 krát. (Obrázok 4)
- Čavá a pravá strana hlavy: Jemne pritlačte masážnu hlavicu na pokožku hlavy a pomaly ňou posúvajte od línie vlasov po temeno hlavy, opakujte 2–3 krát. Pri používaní zariadenia na masáž pravej strany hlavy ho držte pravou rukou. Pri používaní prístroja na masáž ľavej strany hlavy ho držte ľavou rukou. (Obrázok 5)
- Zadná časť hlavy: Jemne stlačte hlavu na masáž pokožky hlavy a pomaly ňou posúvajte od temena hlavy smerom k zátylku, opakujte 2–3 krát. (Obrázok 6)

4) Po použití vypnite krátkym stlačením tlačidla napájania / voľby intenzity zariadenie.

2. Čistenie tváre

1) Nainštalujte keľovú hlavicu na čistenie tváre a navlhčite tvár vodou.

2) Krátkym stlačením tlačidla napájania / voľby intenzity zapnete zariadenie a upravte úroveň intenzity podľa svojich potrieb. Naneste na dlaň čistiaci gél alebo krém, druhou rukou držte prístroj a trením keľovej hlavice čistiaci gél alebo krém vytvorte penu.

3) Naneste penu na tvár, jemne kruživými pohybmi posúvajte hlavu z vnútornej strany smerom k okraju tváre. Odporúčaná plocha čistenia, smer a čas použitia: T-zóna (oblasť čela, nosa) 20 s → ľavé a pravé líca každé 15 s (spolu 30 s) → brada 10 s → krk 30 s. (Obrázok 7)

4) Po dokončení čistenia vypnite prístroj a opláchnite tvár vodou a naneste svoje bežné produkty starostlivosti o pleť.

5) Po každom použití umyte keľovú hlavicu čistou vodou a nechajte ju usušiť na dobre vetranom mieste. Telo prístroja utrite čistou mierne vlhkou handričkou.



obrázok 7

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred začatím čistenia sa uistite, či je prístroj vypnutý.
- Telo zariadenia očistite čistou mierne vlhkou handričkou a osušte ho. Neponárajte toto zariadenie do vody.
- Hlavice umyte vodou a nechajte ich vysušiť na dobre vetranom mieste. Nesušte na priamom slnku.
- Na toto zariadenie nikdy nepoužívajte žiadne mazivá, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky alebo osviežovače na tomto zariadení.
- Pri čistení hlavic nepoužívajte na čistenie vodu s teplotou vyššou ako 40 ° C alebo žieravé kvapaliny.
- Odporúča sa vymeniť keľovú hlavicu každé 3 mesiace. Keľové hlavice sú vhodné iba pre multifunkčné masážne zariadenie TOUCHBeauty.

SKLADOVANIE

Toto zariadenie je napájané z batérie. Neumiestňujte a neskladujte zariadenie na dlhšiu dobu v horúcom alebo vlhkom prostredí. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, prosím vyberte z neho batérie.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

1. Typy ohľaduplné k životnému prostrediu

Batérie obsahujú látky ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Pri likvidácii tohto zariadenia ho prosím nevhadzujte do bežného domového odpadu. Zlikvidujte toto zariadenie odovzdaním v zbernom bode elektro odpadu, aby ste prispeli k ochrane životného prostredia.

2. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Batérie sú vybité alebo takmer vybité.	Vymenite batérie podľa pokynov.
	Batérie boli vložené nesprávne.	Vložte batérie správne podľa inštrukcií.
Pri používaní prístroj vydáva neobvyklý hluk.	Keľová hlavica bola nainštalovaná nesprávne.	Vypnite prístroj a nainštalujte keľovú hlavicu správne podľa inštrukcií.
Iné problémy.		Kontaktujte svojho predajcu.

Poznámka: Ak produkt ani po aplikovaní vyššie uvedených riešení nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.

VÝROBCA:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCA:


Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobené v Číne.



MULTIFUNKČNÉ MASÁŽNE ZARIADENIE

TB-1718

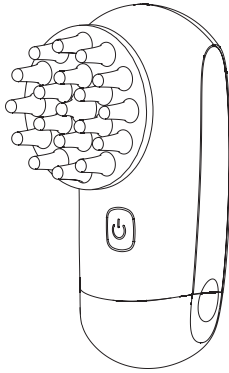

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

⚠ VÝSTRAHA

Nasledujúce osoby by nemali používať toto zariadenie:

- Tehotné a dojčiacie ženy; osoby s alergiou; osoby s neurologickými alebo psychickým postihnutím; osôb, ktoré podstúpili transplantáciu vlasov; osoby s otvorenými ranami, popraskanou alebo opuchnutou pokožkou v oblasti použitia; osoby s existujúcimi ochoreniami pokožky hlavy, ako je dedičná dermatitída, seboroická dermatitída a ekzém; osoby s akútnym ochorením alebo zhubnými nádormi; osoby s poruchou krvácania, hemofiliou a inými chorobami; osoby s hypertenziou atď.
- Netlačte na pokožku ani nehybte prístrojom príliš rýchlo aby sa zabránilo zraneniam.
- Nepoužívajte zariadenie nadmerne, aby nedošlo k poraneniu pokožky hlavy.
- Predtým, ako začnete zariadenie používať, otestujte ho. Nepoužívajte ho, ak došlo k poškodeniu.
- Ak pocítite nepríjemné pocity na hlave alebo tele, okamžite prestaňte zariadenie používať a vyhľadajte lekára.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať, rozoberať alebo opravovať.

⚠ UPOZORNENÍ


- Toto zariadenie nie je hračka, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predĺžili jeho životnosť. Nezdierajte to isté zariadenie s inými ľuďmi.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, prosím vyberte z neho batérie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Typ: TB-1718
- Napájanie: 3 V / 2,4 W
- Typ batérie: 2x AA (nie je súčasťou balenia)
- Podnikové označenie: Q/XMMU1001-2015 Q/XMMU1019-2016

POPIS ZARIADENIA (obrázok 1)

1. Hlavica pokožky hlavy
2. Tlačidlo napájania / intenzity
3. Miesto na odstránenie krytu batérie
4. Kryt batérie
5. Keľová hlavica na čistenie tváre
6. Hlavica na jemnú masáž hlavy

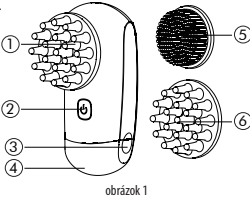


obrázok 1

POKYNY NA PRÍPRAVU

1. Vložte batérie

Držte zariadenie zadnou stranou nahor a odstráňte kryt batérie. Vložte dve AA batérie podľa symbolov v priestore pre batérie symboly + a - (batérie nie sú súčasťou balenia). (Obrázok 2)

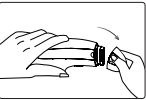

obrázok 2

2. Demontujte hlavice príslušenstva

Prípojte k prístroju hlavicu na čistenie tváre alebo hlavicu na masáž pokožky hlavy. Zatláčajte ho, až kým nezacvakne na miesto kliknutím. Ak chcete odstrániť hlavu, držte zariadenie a ťahajte za hlavu ju vyberte. (Obrázok 3)



obrázok 3

3. Voľba úrovne intenzity

Stlačením tlačidla napájania / voľby intenzity zapnete zariadenie. Stlačením a podržaním tlačidla napájania / voľby intenzity postupne zvyšujete úroveň intenzity. Ak chcete postupne znížiť úroveň intenzity, stlačte a podržte tlačidlo napájania / rýchlosti. Upravte úroveň intenzity podľa svojich potrieb.



obrázok 4

obrázok 5

obrázok 6

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre použitím si pozorne prečítajte pokyny, aby ste zaistili správne fungovanie tohto zariadenia.

1. Masáž hlavy

1) Vyberte a nainštalujte zvolenú hlavicu príslušenstva. Krátko stlačte zapnite zariadenie tlačidlom napájania / voľby intenzity.

2) Jemne priložte masážnu hlavicu na pokožku hlavy. Podľa svojich potrieb, stlačte a podržte tlačidlo napájania / intenzity a upravte úroveň intenzity. Pomaly pohybujte masážnou hlavou po pokožke hlavy.

3) Postup použitia a pokyny:

- Predná oblasť hlavy: Jemne pritlačte masážnu hlavicu na pokožku hlavy a pomaly ňou posúvajte od línie vlasov po temeno hlavy, opakujte 2–3 krát. (Obrázok 4)
- Čavá a pravá strana hlavy: Jemne pritlačte masážnu hlavicu na pokožku hlavy a pomaly ňou posúvajte od línie vlasov po temeno hlavy, opakujte 2–3 krát. Pri používaní zariadenia na masáž pravej strany hlavy ho držte pravou rukou. Pri používaní prístroja na masáž ľavej strany hlavy ho držte ľavou rukou. (Obrázok 5)
- Zadná časť hlavy: Jemne stlačte hlavu na masáž pokožky hlavy a pomaly ňou posúvajte od temena hlavy smerom k zátylku, opakujte 2–3 krát. (Obrázok 6)

4) Po použití vypnite krátkym stlačením tlačidla napájania / voľby intenzity zariadenie.

2. Čistenie tváre

1) Nainštalujte keľovú hlavicu na čistenie tváre a navlhčite tvár vodou.

2) Krátkym stlačením tlačidla napájania / voľby intenzity zapnete zariadenie a upravte úroveň intenzity podľa svojich potrieb. Naneste na dlaň čistiaci gél alebo krém, druhou rukou držte prístroj a trením keľovej hlavice čistiaci gél alebo krém vytvorte penu.

3) Naneste penu na tvár, jemne kruživými pohybmi posúvajte hlavu z vnútornej strany smerom k okraju tváre. Odporúčaná plocha čistenia, smer a čas použitia: T-zóna (oblasť čela, nosa) 20 s → ľavé a pravé líca každé 15 s (spolu 30 s) → brada 10 s → krk 30 s. (Obrázok 7)

4) Po dokončení čistenia vypnite prístroj a opláchnite tvár vodou a naneste svoje bežné produkty starostlivosti o pleť.

5) Po každom použití umyte keľovú hlavicu čistou vodou a nechajte ju usušiť na dobre vetranom mieste. Telo prístroja utrite čistou mierne vlhkou handričkou.



obrázok 7

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred začatím čistenia sa uistite, či je prístroj vypnutý.
- Telo zariadenia očistite čistou mierne vlhkou handričkou a osušte ho. Neponárajte toto zariadenie do vody.
- Hlavice umyte vodou a nechajte ich vysušiť na dobre vetranom mieste. Nesušte na priamom slnku.
- Na toto zariadenie nikdy nepoužívajte žiadne mazivá, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky alebo osviežovače na tomto zariadení.
- Pri čistení hlavic nepoužívajte na čistenie vodu s teplotou vyššou ako 40 ° C alebo žieravé kvapaliny.
- Odporúča sa vymeniť keľovú hlavicu každé 3 mesiace. Keľové hlavice sú vhodné iba pre multifunkčné masážne zariadenie TOUCHBeauty.

SKLADOVANIE

Toto zariadenie je napájané z batérie. Neumiestňujte a neskladujte zariadenie na dlhšiu dobu v horúcom alebo vlhkom prostredí. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, prosím vyberte z neho batérie.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

1. Typy ohľaduplné k životnému prostrediu

Batérie obsahujú látky ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Pri likvidácii tohto zariadenia ho prosím nevhadzujte do bežného domového odpadu. Zlikvidujte toto zariadenie odovzdaním v zbernom bode elektro odpadu, aby ste prispeli k ochrane životného prostredia.

2. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Batérie sú vybité alebo takmer vybité.	Vymenite batérie podľa pokynov.
	Batérie boli vložené nesprávne.	Vložte batérie správne podľa inštrukcií.
Pri používaní prístroj vydáva neobvyklý hluk.	Keľová hlavica bola nainštalovaná nesprávne.	Vypnite prístroj a nainštalujte keľovú hlavicu správne podľa inštrukcií.
Iné problémy.		Kontaktujte svojho predajcu.

Poznámka: Ak produkt ani po aplikovaní vyššie uvedených riešení nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.

VÝROBCA:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCA:

Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobené v Číne.

