

Používat digitální teploměr Thermoal je snadné. Poradíme vám jak na správné měření teploty.

Horečka je nejdůležitějším indikátorem zdravotního stavu a hovoříme o ní od cca 38 °C (při měření rektálně). Tělesná teplota kolísá v průběhu dne až o 2 °C a její naměřená hodnota vždy závisí na místě měření. Ovlivňují ji však také další faktory jako je vnější teplota, stáří, stres, spánek, hormony a tělesná aktivita.



• Měření v ústní dutině


Jednoduchá metoda, při níž dochází k mírnému zkreslení naměřených hodnot. Špičku teploměru je třeba vložit nalevo nebo napravo od uzdičky jazyka, tak aby byla v klidu a neustále v kontaktu se sliznicí. Při špatném umístění může být odchylka až 1 °C. Nesprávné

hodnoty mohou vzniknout, když měření předcházelo přijímání studených nebo teplých nápojů a pokrmů (min. 30 minut před začátkem měření), při žvýkání, kouření nebo vdechování vzduchu při nízké okolní teplotě.



• Rektální měření

Patří k nejpresnějším. Vykazuje nejmenší rozptyl naměřených hodnot. Metoda je obzvláště vhodná pro sledování průběhu horečky, měření bazální teploty a také pro měření při nízké okolní teplotě, při zánětu v okolí úst a u malých dětí. Pro správné měření se špička zavádí 1,5 cm do řitního otvoru.

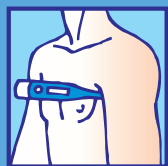

• Měření v podpaží

U dospělých se teplota ve srovnání s rektálním měřením značně liší, a proto se doporučuje pouze k orientačnímu měření. Při prodloužení doby měření na 5 minut lze získat přesné údaje. Měřicí špička se umístí vespod do nehlubšího a nejteplejšího místa podpažní jamky

a paže se pevně přiloží tak, aby byl teploměr fixován a chráněn před teplotou okolí.

Proč používat digitální teploměr Thermoal a ne rtuťový:

- umožňuje rychlé měření
- podává spolehlivé výsledky s přesností na 0,1 stupně
- velký displej s čitelnými údaji
- nerozbije se při pádu a neobsahuje nebezpečnou rtuť
- zobrazuje poslední naměřenou hodnotu



Zákaz prodeje rtuťových teploměrů se blíží!

Od roku 2009 se teploměry s rtutí – kovem vysoce toxickým pro lidský organismus a životní prostředí – nebudou v rámci EU prodávat.

Záruka

Vyřizování reklamace probíhá prostřednictvím prodejního místa. Záruční servis je zajištěn v laboratoři v sídle společnosti HARTMANN-RICO, a.s.

HARTMANN-RICO, a.s.
Masarykovo náměstí 77
664 71 Veverská Bítýška
Bezplatná telefonní linka:
800 100 333
www.hartmann.cz



Thermoal®

Přesné, rychlé a bezpečné digitální teploměry



Diagnostika HARTMANN

HARTMANN

Thermoval®

Bezpečné digitální teploměry
Thermoval – záruka přesného
a rychlého měření teploty

Thermoval® rapid flex

**Ještě nikdy nebylo měření teploty
tak šetrné, rychlé a pohodlné**

- přesnější a šetrnější měření díky pružné špičce
- rychlé měření teploty v desítkách sekund díky 10 sec. high speed technology
- extra velký displej
- paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty
- voděodolný
- s ochranným krytem zajišťujícím odolnost vůči pádu
- po 7 minutách se sám automaticky vypne
- moderní ergonomický design výrobku
- baterie s životností 4000 měření

Délka špičky
umožňuje lepší vodivost
a tím zkrácení doby měření



Přesnost
lepší přizpůsobivost
při měření v ústech
a podpaží

Pružnost

eliminuje vaše obavy z rektálního
měření teploty u dětí

Ocení zejména rodiče malých pacientů!



Thermoval® rapid

- rychlé měření teploty v desítkách sekund díky 10 sec. high speed technology
- extra velký displej
- paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty
- voděodolný
- po 9 minutách se sám automaticky vypne
- s ochranným krytem zajišťujícím odolnost proti pádu
- moderní ergonomický design výrobku
- v bílé barvě
- Thermoval rapid Disney – speciální limitovaná edice pro děti



Thermoval® classic

- rychlost měření je 60–90 sekund v závislosti na umístění teploměru
- extra velký displej
- paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty
- voděodolný
- po 10 minutách se sám automaticky vypne
- speciální zvukový signál při horečce
- s ochranným krytem zajišťujícím odolnost proti pádu
- v bílé, žluté, červené a modré barvě



Thermoval® basic

- rychlost měření je 60–90 sekund v závislosti na umístění teploměru
- paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty
- po 10 minutách se sám automaticky vypne
- speciální zvukový signál při horečce
- voděodolný



Výhody teploměrů Thermoval®

- plně automatický digitální teploměr
- určen pro měření teploty v konečniku, podpaží a ústní dutině
- přesnost měření $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- jednoduché použití
- součástí jsou vyměnitelné baterie s prodlouženou životností

* Pro získání přesnějších hodnot při měření teploty v podpaží doporučujeme prodloužit dobu měření až na 5 minut