


**AQUA PULSE**

**solac**

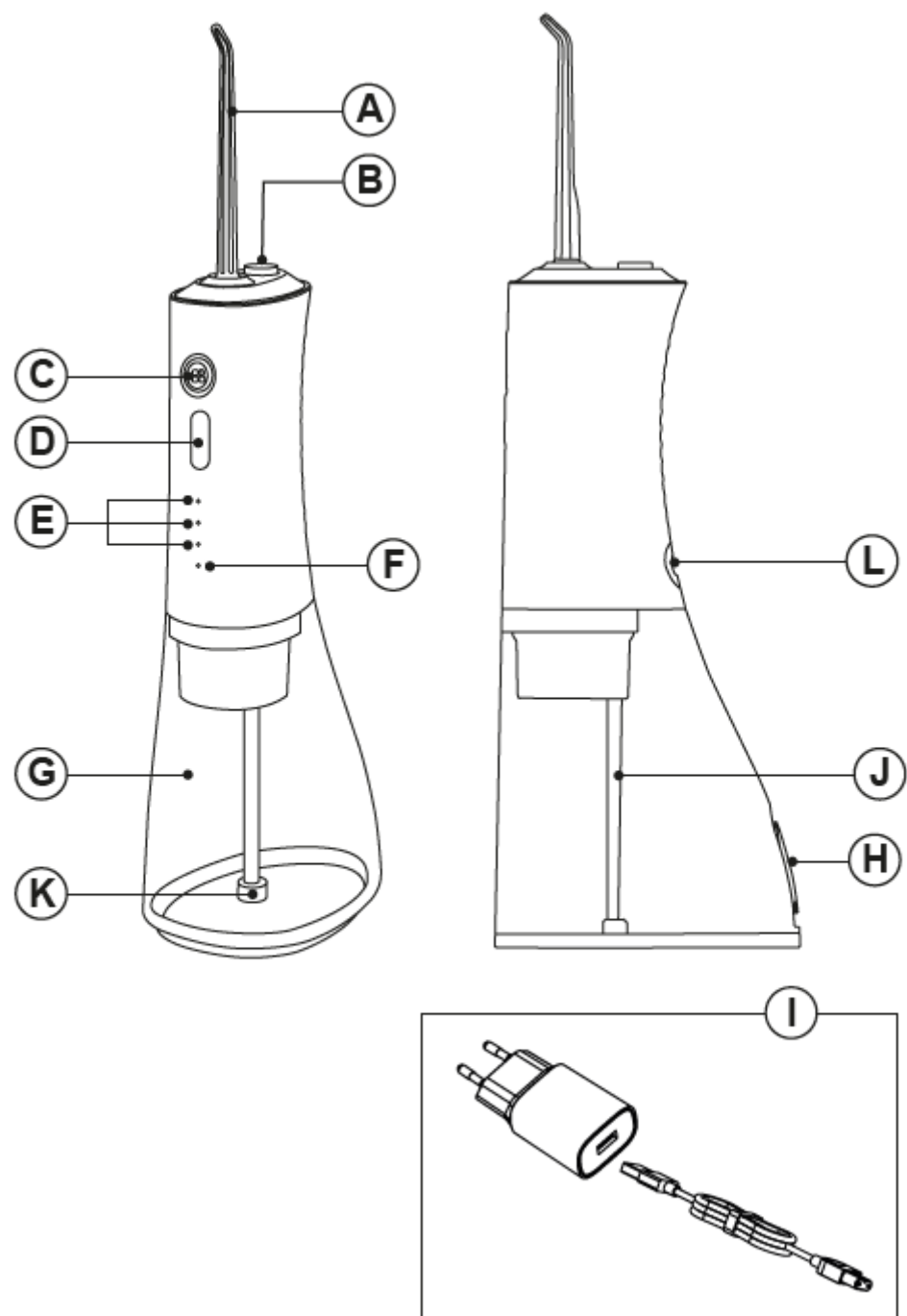

## **ZUBNÍ IRIGÁTOR**

### **AQUA PULSE**

#### **POPIS**

- A – Tryska
- B – Tlačítko pro uvolnění trysky
- C – Tlačítko ON/OFF
- D – Tlačítko režimu
- E – Kontrolky režimu
- F – Kontrolka baterie
- G – Odnímatelná nádrž na vodu
- H – Víčko nádržky na vodu
- I – Nabíječka
- J – Sací hadice
- K – Filtr
- L – Nabíjecí zásuvka

Pokud váš model přístroje nemá výše uvedené příslušenství, je možné je zakoupit samostatně u Servisu technické podpory.

---

#### **POUŽITÍ A ÚDRŽBA**

- Nepoužívejte přístroj, pokud nejsou součásti nebo příslušenství správně nasazeny.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je některé příslušenství nebo spotřební materiál poškozený. Ihned je vyměňte.
- Nepřepínejte přístroj bez vody.
- Nepoužívejte přístroj, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je převrácený, a nepřevracujte ho během provozu.
- Respektujte indikátor MAX hladiny vody.
- Pokud přístroj používáte v koupelně nebo podobném prostředí, vždy jej po použití odpojte ze sítě, i když jen na krátkou dobu, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj odpojen.
- Odpojte přístroj ze sítě, když jej nepoužíváte, a před čištěním, výměnou příslušenství nebo nastavením.
- Odpojte přístroj ze sítě před doplněním nádržky na vodu.
- Uchovávejte přístroj na suchém, bezprašném místě mimo přímé sluneční světlo.

- Udržujte přístroj v dobrém stavu. Kontrolujte, zda pohyblivé části nejsou vychýlené nebo zablokované a zda nejsou žádné poškozené části, které by mohly ovlivnit jeho správnou funkci.
- Používejte přístroj a jeho příslušenství podle těchto instrukcí a s ohledem na pracovní podmínky a zamýšlené použití. Používání přístroje k jiným účelům může být nebezpečné.
- Nikdy neotvírejte baterie.
- Nikdy nenechávejte přístroj připojený k síti bez dozoru. Šetříte tím energii a prodlužujete životnost přístroje.
- Nikdy nepokládejte přístroj na povrch během jeho používání.
- Přístroj má časovač 2 minuty, který se automaticky vypne po 2 minutách nepřetržitého použití. Pokud potřebujete pokračovat, jednoduše znovu stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Při plném naplnění nádržky (320 ml) se doba provozu liší podle zvoleného režimu čištění.
- Nepoužívejte přístroj se zvířaty.
- Baterii nabíjejte pouze nabíječkou dodanou výrobcem. Použití jiné nabíječky může způsobit výbuch nebo požár.
- Používejte přístroj pouze s bateriemi, pro které je určen. Použití jiných baterií může být nebezpečné.

---

## **NABÍJENÍ BATERIE**

Pozor: Nová baterie není plně nabitá a před prvním použitím ji je nutné nabít.

- Nabíjejte baterii při teplotě 0–45 °C.
- Ujistěte se, že přístroj i ruce jsou suché.
- Připojte nabíječku do nabíjecí zásuvky přístroje a do sítě.
- Rozsvítí se kontrolka, která signalizuje, že nabíjení začalo.
- Plné nabití baterie trvá cca 6 hodin. Nepokoušejte se baterii přebíjet.
- Připojte nabíjecí kabel do zásuvky na zadní straně přístroje.
- Kontrolka se rozsvítí a bliká – baterie se nabíjí.
- Po uplynutí doby odpojte kabel a nabíječku.

- Přístroj nelze používat během nabíjení.

## KONTROLA STAVU BATERIE

- Pokud kontrolka bliká, baterie je téměř vybitá.
- Při připojení k síti kontrolka bliká oranžově, pokud je baterie pod 20 %, nebo zeleně, pokud je mezi 20–100 %.
- Po úplném nabití se kontrolka rozsvítí na 30 sekund a poté zhasne.
- Při použití svítí kontrolka modře při 5–100 % nebo oranžově bliká, pokud je baterie pod 5 %.
- Při vybití na 0 % kontrolka rychle bliká oranžově.
- Pro delší životnost baterie je vhodné ji nabíjet až po úplném vybití.

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

### Před použitím:

- Odstraňte veškeré obaly.
- Pečlivě si přečtěte příručku „Bezpečnostní upozornění“.
- Před prvním použitím plně nabijte baterii.

### Plnění vodou:

- Nádržku naplňte před zapnutím přístroje.
- Přístroj držte vodorovně.
- Otevřete víčko a naplňte nádržku vodou, dodržujte MAX úroveň.
- Zavřete víčko.
- Doporučuje se používat teplou vodu pod 40 °C nebo tekoucí vodu z kohoutku.
- Přístroj je určen pouze pro vodu, nepoužívejte jiné tekutiny.

### Nasazení trysky:

- Příklad používá vyměnitelnou trysku.
- Trysku jednoduše zatlačte do úchyty.
- Pro vyjmutí stiskněte tlačítko uvolnění trysky a vytáhněte ji.
- Nepoužívejte tlačítko uvolnění během provozu.

**Použití:**

- Přístroj nepřipojujte k síti.
- Držte přístroj svisle, nakloňte se nad dřez a vložte trysku do úst.
- Směřujte proud vody požadovaným směrem.
- Zapněte přístroj krátkým stiskem tlačítka ON/OFF.
- Rozsvítí se kontrolka.
- Zvolte požadovaný režim.
- Přístroj se automaticky vypne po 2 minutách, ale můžete jej vypnout kdykoliv ručně.

**Po použití:**

- Vypněte přístroj tlačítkem ON/OFF.
  - Vypusťte zbytky vody z přístroje.
  - Přístroj vyčistěte.
- 

**ČIŠTĚNÍ**

- Přístroj odpojte ze sítě a nechte vychladnout.
  - Čistěte vlhkým hadříkem s kapkou mycího prostředku a potom osušte.
  - Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní chemikálie ani abrazivní prostředky.
- 

**VÝMĚNA BATERIÍ**

- Baterie mohou být vyměněny pouze odborně.
- V případě potřeby odnesete přístroj do autorizovaného servisu.
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat sami, je to nebezpečné.