



NECK4 – 60 SEKUNDOVÝ tvarovač brady - *Návod k použití CZ*


UPOZORNĚNÍ

- Důkladně si přečtěte všechny pokyny a návod si uschovejte pro případ, že byste si ho potřebovali přečíst znovu.
- Přečtěte si důkladně všechny pokyny a odložte si je pro budoucí použití.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jste těhotná nebo pokud máte následující: kardiostimulátor, léčíte se na nízký tlak, epilepsii, diabetes, sklerózu multiplex, nebo jste po operaci.
- NEPOUŽÍVEJTE na postižená místa kůže, akné, odřenou kůži, citlivou kůži, ani na jizvách a křečových žilách.
- Pokud se gel dostane do kontaktu s očima, důkladně je vypláchněte vodou. Pokud podráždění trvá, kontaktujte doktora.
- Držte mimo dosah dětí a zvířat.
- Doporučujeme používat přístroj maximálně 60 sekund na jedné oblasti a 3 minuty celkově na jedno ošetření.
- Tento spotřebič nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami bez odpovídajících zkušeností či znalostí, ledaže by tak činili pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly touto odpovědnou osobou o používání spotřebiče poučeny.
- Dohlédněte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

ÚVOD

Snadné cílené vytvarování brady a krku pouze za několik minut denně. Jemné EMS (elektro-svalová stimulace) impulsy udělají všechnu práci za vás, vytvarují podpěrné svalstvo, zvýší cirkulaci a vylepší profil vašeho krku. Ucítíte účinky ihned po použití a uvidíte výsledky po několika dnech.



POZNEJTE SVŮJ PŘÍSTROJ

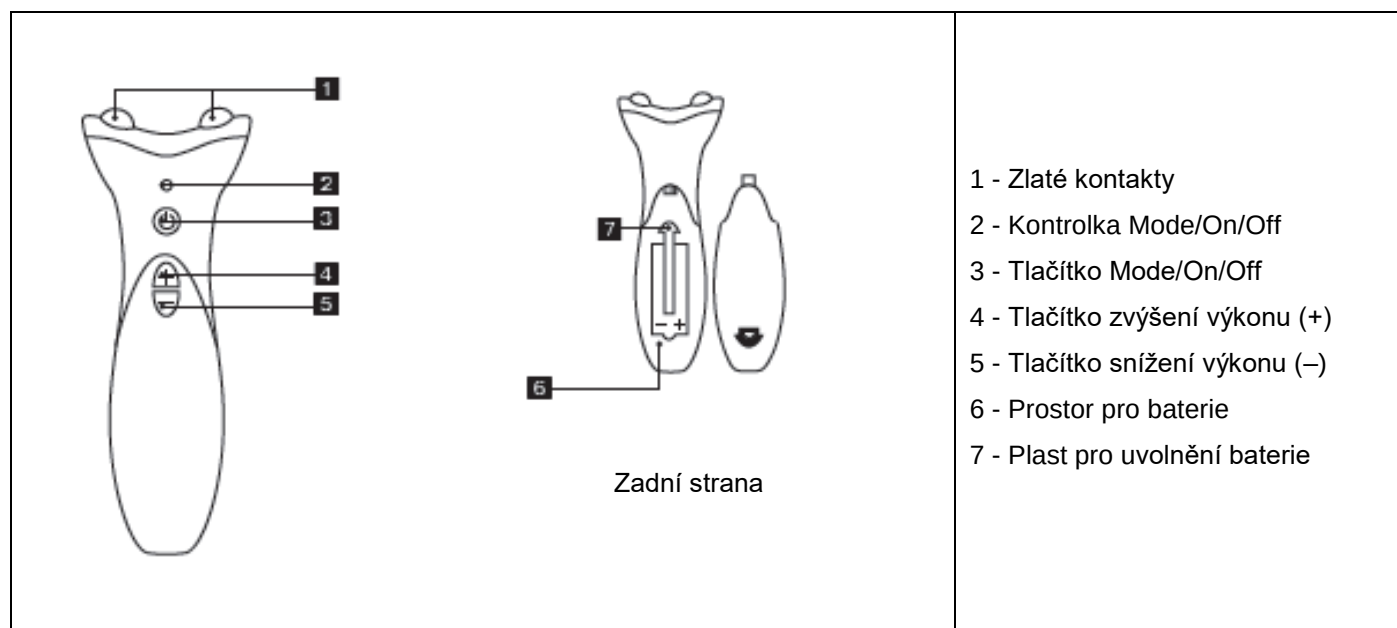

POKYNY

DŮLEŽITÉ - TEST VODIVOSTI

Dříve než začnete, musíte VŽDY provést test vodivosti na nenápadné oblasti kůže na možnou kožní reakci. Počkejte 24 hodin. Pokud se objeví reakce, přístroj nepoužívejte.

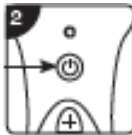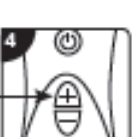	KROK 1 Je důležité aplikovat dostatečné množství vodivého gelu na zlaté kontakty. Bez gelu ucítíte silné kontrakce a ošetření může být bolestivé.
	KROK 2 Zapněte přístroj stisknutím tlačítka Mode/On/Off, rozsvítí se zelená kontrolka. Přístroj začne s programem 1, kontrolka Mode/On/Off blikne jednou. POZNÁMKA: Přístroj vždy začíná s nejnižší úrovní výkonu po zapnutí.
	KROK 3 Přístroj umístěte na ošetřovanou oblast, prst přidržíte nad tlačítkem +, zajistěte, aby oba zlaté kontakty byly v dobrém kontaktu s pokožkou.
	KROK 4 Stiskněte a uvolněte tlačítko + k zvýšení výkonu o jeden krok po každém stisknutí až po maximum 16. Zvyšujte, dokud neucítíte kontrakce svalů. POZNÁMKA: Přístroj vydává jemné EMS impulsy na nejnižším výkonu, u kterých někdo nemusí ucítit kontrakce. Po každém stisknutí tlačítka + zvýšíte intenzitu o jeden stupeň. U některých lidí bude potřeba intenzitu zvýšit o několik úrovní, aby požadované kontrakce ucítily.
	KROK 5 Opakujte kroky 1 až 4 pro ošetření oblasti 2 a 3. DŮLEŽITÉ: Pravidelně doplňujte vodivý gel k zajištění správné aplikace.

OBLASTI OŠETŘENÍ


U dlouhodobého ošetření je nutné správné použití. Prvních několik týdnů používejte přístroj denně. Poté postačuje dvakrát, nebo třikrát týdně k udržení dobrých výsledků.

	OBLAST OŠETŘENÍ 1 S oběma kontakty dotýkající se kůže, umístěte přístroj pod bradu. Neudělejte Adamovu bradku. Držte přístroj v pozici 60 sekund.
	OBLAST OŠETŘENÍ 2 S kontakty dotýkajícími se kůže, umístěte přístroj pod bradu směrem vlevo, do blízkosti, kde ucítíte puls. Držte přístroj v pozici 60 sekund.
	OBLAST OŠETŘENÍ 3 S kontakty dotýkajícími se kůže, umístěte přístroj pod bradu směrem vpravo, do blízkosti, kde ucítíte puls. Držte přístroj v pozici 60 sekund.

Na začátku pulsy nabízejí jemný pocit brnění a se zvyšující se intenzitou si všimnete kontrakce svalů. Kontrakce svalů jsou jemné a začínou se pomalu zvyšovat, podržte sval stažený v pozici na několik sekund a poté se sval pomalu uvolní. Pokud jsou kontakty správně umístěné, tento pocit brnění se sníží a ucítíte dobré kontrakce svalů. Může být nutné upravit pozici kontaktů, dokud neucítíte silnější kontrakce.

PROGRAMY

60 sekundový toner má 16 úrovní intenzity výkonu a 3 programy cvičení. Nejlepších výsledků dosáhnete střídáním programů. Doporučujeme použití programu 1 první den, poté program 2 druhý den, poté program 3 třetí den, poté zpět na program 1 na čtvrtý den, atd.

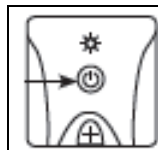

Přístroj vždy začíná na programu 1. Pro volbu jiného programu opakovaně krátce stiskněte tlačítko Mode/On/Off. Kontrolka dvakrát blikne k indikaci programu 2, nebo blikne 3 krát pro indikaci programu 3. Výkon je po každé změně programu na nejnižší úrovni.

PROGRAM 1 - ZPEVNĚNÍ


Rytmické kontrakce svalů k osvěžení svalů s krátkým intervalem mezi každým pulzem. Kontrakce svalů trvají 2 sekundy a následně je 3 sekundová pauza.

PROGRAM 2 - POSÍLENÉ ZPEVNĚNÍ

Nabízí prodloužené kontrakce svalů s předprogramovanou změnou intenzity pro maximalizaci cvičení. Prodloužená kontrakce trvá 9 sekund a poté je 4 sekundová pauza.

PROGRAM 3 - TVAROVÁNÍ

Rychlá stimulace k simulaci hloubkové masáže. Pulsní masáž trvá 5 sekund, poté je 3 sekundová pauza.

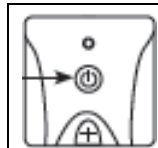


VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Stiskněte a podržte tlačítko On/Off na 1,5 sekundy. Pokud necháte přístroj zapnutý, automaticky se vypne po 10 minutách.

INFORMACE

- Během ošetření můžete ucítit zvýšenou citlivost zubů, je to zcela normální.
- Efektivní tvarování a masáž krku je na základě jemné a lehké stimulační masáže svalů na krku. Pokud ucítíte nepohodlí, přidejte vodivý gel, snižte intenzitu stisknutím tlačítka –, nebo přesuňte přístroj na jinou oblast.
- Přístroj vždy používejte s vodivým gelem. K zakoupení více gelu kontaktujte: zákaznický servis.
- Přístroj můžete čistit pomocí vlhké utěrky. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla.
- NEPONOŘUJE přístroj do vody.
- NEDEMONTUJTE ani se nepokoušejte přístroj sami opravovat. Pokud máte problém s přístrojem, kontaktujte náš zákaznický servis.
- Uvnitř přístroje se nenachází vámi opravitelné části.
- Pokud je přístroj poškozený, nepoužívejte jej. V případě závady jej Rio nebo jeho servisní technik musí vyměnit z bezpečnostních důvodů.
- NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti krátkovlnných nebo mikrovlnných přístrojů.
- Pokud si všimnete nestandardního chování přístroje, je možné, že byl vystaven externímu elektromagnetickému rušení. Odstraňte zdroj rušení a přístroj opět používejte.
- Váš 60 sekundový toner krku vyhovuje nejnovějším Evropským kosmetickým směrnici o bezpečnosti.

VÝMĚNA BATERIE

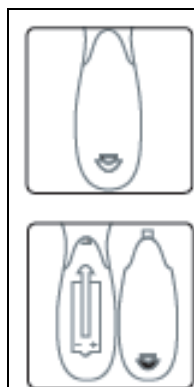

K vložení baterie uvolněte sponu a otevřete kryt. Připojte PP3 9V alkalickou baterii zajištěním správné polarity. Ujistěte se, že plast pro uvolnění baterie je pod baterií. Po vložení nasadte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt pevně nasazen.

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyndejte baterii.
- NEPOUŽÍVEJTE nabíjecí baterie.
- Zajistěte správnou likvidaci starých baterií podle místních předpisů.

LIKVIDACE

Směrnice o Likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů (WEEE) směrnice (2002/96/EC) platí pro recyklaci produktů použitím nejlepších technik k minimalizaci dopadu na životní prostředí, odstraněním nebezpečných látek a zabráněním zvyšování odpadu.



Výrobek je klasifikován jako Elektrické nebo elektronické zařízení, proto zajistěte na konci jeho životnosti správnou likvidaci správným způsobem v souladu s místními předpisy. Nesmí se likvidovat společně s běžným domovním odpadem.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

NECK4 – 60 SEKUNDOVÝ tvarovač brady - *Návod na použitie SK*


UPOZORNENIE

- Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a návod si uschovajte pre prípad, že by ste si ho potrebovali prečítať znova.
- Prečítajte si dôkladne všetky pokyny a odložte si ich pre budúce použitie.
- Nepoužívajte prístroj, ak ste tehotná alebo ak máte nasledujúce: kardiostimulátor, liečite sa na nízky tlak, epilepsiu, diabetes, sklerózu multiplex, alebo ste po operácii.
- NEPOUŽÍVAJTE na postihnuté miesta kože, akné, odretú kožu, citlivú kožu, ani na jazvách a kŕčových žilách.
- Ak sa gél dostane do kontaktu s očami, dôkladne ich opláchnite vodou. Pokiaľ podráždenie trvá, kontaktujte doktora.
- Držte mimo dosah detí a zvierat.
- Odporúčame používať prístroj maximálne 60 sekúnd na jednej oblasti a 3 minúty celkovo na jedno ošetrenie.
- Tento spotrebič nesmie byť používaný osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami bez zodpovedajúcich skúseností či znalostí, iba ak by tak robili pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo boli touto zodpovednou osobou o používaní spotrebiča poučené.
- Dohliadnite na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

ÚVOD

Ľahké cielené vytvarovanie brady a krku iba za niekoľko minút denne. Jemné EMS (elektro-svalová stimulácia) impulzy urobia všetku prácu za vás, vytvarujú podperné svalstvo, zvýšia cirkuláciu a vylepšia profil vášho krku. Ucítite účinky ihneď po použití a uvidíte výsledky po niekoľkých dňoch.



POZNAJTE SVOJ PRÍSTROJ

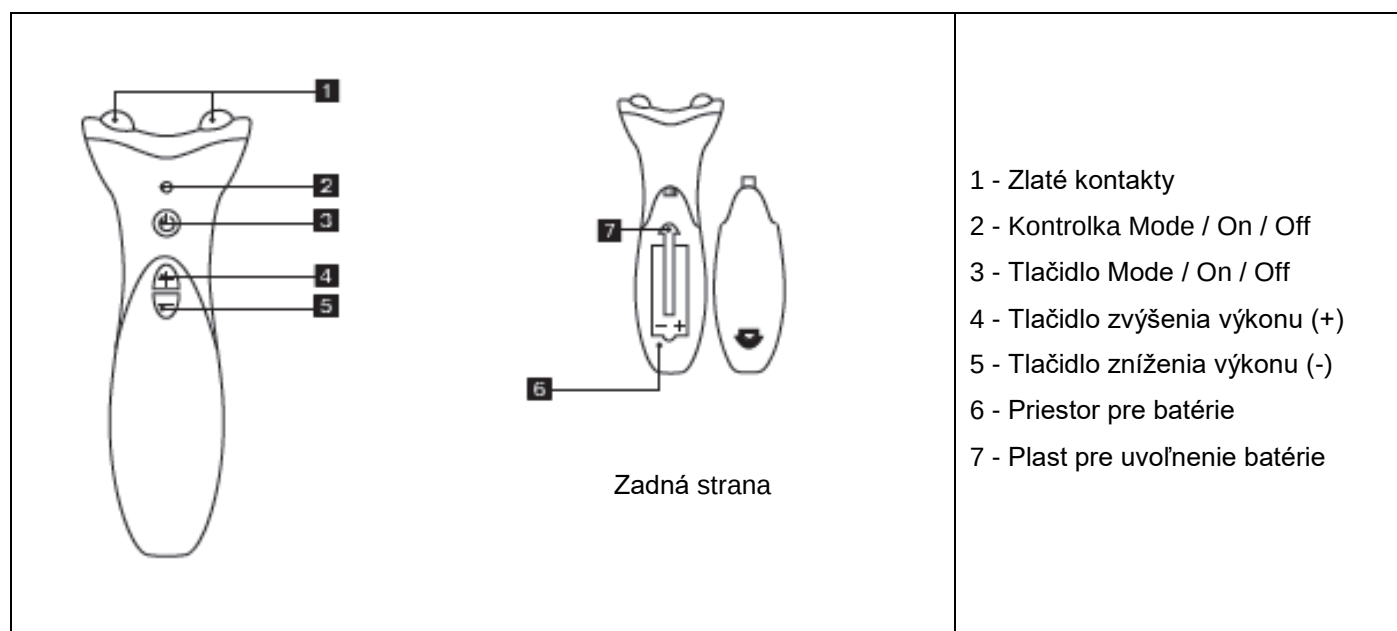

POKYNY

DÔLEŽITÉ - TEST VODIVOSTI

Skôr než začnete, musíte VŽDY vykonať test vodivosti na nenápadnej oblasti kože na možnú kožnú reakciu. Počkajte 24 hodín. Ak sa objavia reakcie, prístroj nepoužívajte.

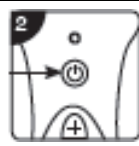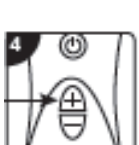	KROK 1 Je dôležité aplikovať dostatočné množstvo vodivého gélu na zlaté kontakty. Bez gélu ucítite silné kontrakcie a ošetrovanie môže byť bolestivé.
	KROK 2 Zapnite prístroj stlačením tlačidla Mode / On / Off, rozsvieti sa zelená kontrolka. Prístroj začne s programom 1, kontrolka Mode / On / Off blikne raz. POZNÁMKA: Prístroj vždy začína s najnižšou úrovňou výkonu po zapnutí.
	KROK 3 Prístroj umiestnite na ošetrovanú oblasť, prst pridržiavajte nad tlačidlom +, zaistíte, aby oba zlaté kontakty boli v dobrom kontakte s pokožkou.
	KROK 4 Stlačte a uvoľnite tlačidlo + k zvýšeniu výkonu o jeden krok po každom stlačení až po maximum 16. zvyšujte, kým neucítite kontrakcie svalov. POZNÁMKA: Prístroj vydáva jemné EMS impulzy na najnižšom výkone, pri ktorých niekto nemusí ucítiť kontrakcie. Po každom stlačení tlačidla + zvýšite intenzitu o jeden stupeň. U niektorých ľudí bude potrebné intenzitu zvýšiť o niekoľko úrovní, aby požadované kontrakcie zacítili.
	KROK 5 Opakujte kroky 1 až 4 pre ošetrovanie oblasti 2 a 3. DÔLEŽITÉ: Pravidelne dopĺňajte vodivý gél na zabezpečenie správnej aplikácie.

OBLASTI OŠETRENIA

U dlhodobého ošetrovania je nutné správne použitie. Prvých niekoľko týždňov používajte prístroj denne. Potom postačuje dvakrát, alebo trikrát týždenne na udržanie dobrých výsledkov.


	OBLASŤ OŠETRENIA 1 S oboma kontaktmi dotýkajúcimi sa kože, umiestnite prístroj pod bradu. Neurobte Adamovu briadku. Držte prístroj v pozícii 60 sekúnd.
	OBLASŤ OŠETRENIA 2 S kontaktmi dotýkajúcimi sa kože, umiestnite prístroj pod bradu smerom vľavo, do blízkosti, kde ucítite pulz. Držte prístroj v pozícii 60 sekúnd.
	OBLASŤ OŠETRENIA 3 S kontaktmi dotýkajúcimi sa kože, umiestnite prístroj pod bradu smerom vpravo, do blízkosti, kde ucítite pulz. Držte prístroj v pozícii 60 sekúnd.

Na začiatku pulzy ponúkajú jemný pocit brnenia a so zvyšujúcou sa intenzitou si všimnete kontrakcie svalov. Kontrakcie svalov sú jemné a začnú sa pomaly zvyšovať, podržia sval stiahnutý v pozícii na niekoľko sekúnd a potom sa sval pomaly uvoľní.

Ak sú kontakty správne umiestnené, tento pocit brnenia sa zníži a ucítite dobré kontrakcie svalov. Môže byť nutné upraviť pozíciu kontaktov, kým nepocítite silnejšie kontrakcie.

PROGRAMY

60 sekundový toner má 16 úrovní intenzity výkonu a 3 programy cvičenia. Najlepšie výsledky dosiahnete striedaním programov. Odporúčame použitie programu 1 prvý deň, potom program 2 druhý deň, potom program 3 tretí deň, potom späť na program 1 na štvrtý deň, atď.

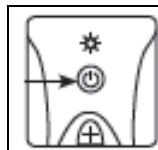

Prístroj vždy začína na programe 1. Pre voľbu iného programu opakovane krátko stlačte tlačidlo Mode / On / Off. Kontrolka dvakrát blikne na indikáciu programu 2, alebo blikne 3 krát pre indikáciu programu 3. Výkon je po každej zmene programu na najnižšej úrovni.

PROGRAM 1 - SPEVNENIE


Rytmické kontrakcie svalov na osvieženie svalov s krátkym intervalom medzi každým pulzom. Kontrakcie svalov trvajú 2 sekundy a následne je 3 sekundová pauza.

PROGRAM 2 - POSILNENÉ SPEVNENIE

Ponúka predĺžené kontrakcie svalov s predprogramovanou zmenou intenzity pre maximalizáciu cvičenia. Predĺžená kontrakcia trvá 9 sekúnd a potom je 4 sekundová pauza.

PROGRAM 3 - TVAROVANIE

Rýchla stimulácia k simulácii hlbkovej masáže. Pulzná masáž trvá 5 sekúnd, potom je 3 sekundová pauza.

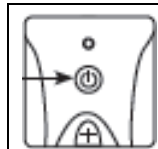


VYPNUTIE PRÍSTROJA

Stlačte a podržte tlačidlo On / Off na 1,5 sekundy. Ak necháte prístroj zapnutý, automaticky sa vypne po 10 minútach.

INFORMÁCIE

- Počas ošetrovania môžete cítiť zvýšenú citlivosť zubov, je to úplne normálne.
- Efektívne tvarovanie a masáž krku je na základe jemnej a ľahkej stimulačnej masáže svalov na krku. Ak pocítite nepohodlie, pridajte vodivý gél, znížte intenzitu stlačením tlačidla –, alebo presuňte prístroj na inú oblasť.
- Prístroj vždy používajte s vodivým gélom. K zakúpeniu viac gélu kontaktujte: zákaznícky servis.
- Prístroj môžete čistiť pomocou vlhkej utierky. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá.
- NEPONÁRAJTE prístroj do vody.
- NEDEMONTUJTE ani sa nepokúšajte prístroj sami opravovať. Ak máte problém s prístrojom, kontaktujte náš zákaznícky servis.
- Vo vnútri prístroja sa nenachádza vami opraviteľné časti.
- Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho. V prípade poruchy ho Rio alebo jeho servisný technik musí vymeniť z bezpečnostných dôvodov.
- NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti krátkovlnných alebo mikrovlnných prístrojov.
- Ak si všimnete neštandardného správania prístroja, je možné, že bol vystavený externému elektromagnetickému rušeniu. Odstráňte zdroj rušenia a prístroj opäť používajte.
- Váš 60 sekundový toner krku vyhovuje najnovším Európskym kozmetickým smerniciam o bezpečnosti.

VÝMENA BATÉRIE

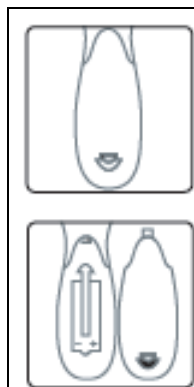

K vložení batérie uvoľníte sponu a otvorte kryt. Pripojte PP3 9V alkalickú batériu zaistením správnej polarít. Uistite sa, že plast pre uvoľnenie batérie je pod batériou. Po vložení nasadíte späť kryt batérie. Uistite sa, že je kryt pevne nasadený.

- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nebude používať, vyberte batériu.
- NEPOUŽÍVAJTE nabíjacie batérie.
- Zaisťte správnu likvidáciu starých batérií podľa miestnych predpisov.

LIKVIDÁCIA

Smernica o Likvidácii starých elektrických a elektronických prístrojov (WEEE) smernica (2002/96 / EC) platí pre recykláciu produktov použitím najlepších techník na minimalizáciu dopadu na životné prostredie, odstránením nebezpečných látok a zabránením zvyšovania odpadu.



Výrobok je klasifikovaný ako Elektrické alebo elektronické zariadenie, preto zaistíte na konci jeho životnosti správnu likvidáciu správnym spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01 Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz