


Naipo

Instruction Manual

FOOT MASSAGER

Unique heels massage available

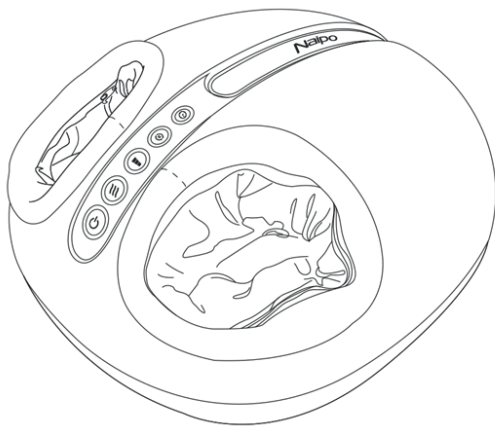

Model:MGF-F15

Popis výrobku a jeho vlastností

Vlastnosti výrobku

1. Masážní přístroj je navržen v módním tvaru brouka a díky odlehčené konstrukci se snadno přenáší.
2. Propracovaný design i technologie umožňují si dopřát profesionální masáže v pohodlí domova.
3. Dvojitá ochrana zajišťuje větší bezpečí.
4. Snadné ovládání pomocí pěti mechanických tlačítek (vypínač, volba programu, nastavení intenzity, vyhřívání, nastavení času).
5. Masážní přístroj v sobě kombinuje inovativní technologie s tradiční akupresurní masáží chodidel.
6. Díky odnímatelnému krytu zůstane přístroj čistý.

Důležitá bezpečnostní varování

- Dbejte na to, aby do mezery mezi masážní hlavou a krytem přístroje nevnikly žádné cizí látky či nečistoty.
- Zabraňte styku přístroje s vodou, předejdete tak možnému poškození či úrazu v důsledku zkratu.
- Pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozené, nepokoušejte se je rozebrat a opravit sami. Kontaktujte vašeho prodejce.
- Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá doporučenému napětí.
- Po použití nebo před čištěním výrobek odpojte od elektrické sítě, abyste předešli jeho poškození nebo poranění.
- Výrobek používejte v souladu s návodem k použití.
- Nepoužívejte jiné příslušenství ani náhradní díly, než jsou doporučené výrobcem.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jste požíli alkohol anebo se necítíte dobře.
- Výrobek nepoužívejte méně než jednu hodinu po jídle.
- Výrobek nepoužívejte bezprostředně poté, co došlo k výrazné změně okolní teploty.
- Výrobek nepoužívejte v prostředí, v němž se vyskytuje velké množství prachu nebo žíravých plynů.
- Výrobek nepoužívejte, jestliže je zakrytý přehozem, polštářem apod.
- Dbejte na to, abyste při používání výrobku neusnuli.

Výrobek by neměly používat níže uvedené osoby

- Osoby trpící infekčním kožním onemocněním.
- Osoby trpící osteoporózou.
- Osoby trpící kardiovaskulárním onemocněním a osoby s implantovanými elektrickými přístroji, jako např. kardiostimulátorem.
- Osoby s horečkou.
- Těhotné nebo menstrující ženy.
- Osoby s povrchovým poraněním nebo osoby trpící onemocněním kůže či podkoží.
- Povrch přístroje se zahřívá. Osoby citlivé na teplo by proto měly dbát zvýšené opatrnosti při jeho používání.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jste mokří.
- Výrobek nepoužívejte u zvířat.

Pokyny k obsluze a poznámky:

Masážní přístroj je určen k použití 1-2 denně po dobu 5-10 minut. Masáž ulevuje od bolesti svalů a zlepšuje krevní oběh, 5-15 minutová masáž před spaním může pomoci při nespavosti a zlepšit kvalitu spánku.

- Dbejte na to, abyste při používání výrobku neusnuli.
- Výrobek nepoužívejte k masáži déle než 30 minut.
- Výrobek nepoužívejte méně než 1 hodinu před jídlem či po něm.
- Pokud byl výrobek skladován v chladu a přenesen do teplého prostředí, může se v něm nahromadit vlhkost, která může bránit jeho normálnímu fungování a může zapříčinit i jeho poruchu. Po přemístění výrobku do prostředí s obvyklou pokojovou teplotou jej doporučujeme použít až po jedné hodině.



Tlačítko pro nastavení času

1. Tlačítko svítí modře a výchozí čas masáže je nastaven na 10 minut.
2. Po stisknutí svítí tlačítko červeně a čas masáže se nastaví na 15 minut.
3. Po opětovném stisknutí svítí tlačítko červeně a modře a čas masáže se nastaví na 20 minut.

Tlačítko pro výběr programů

1. Jako výchozí je nastaven program I, po stisknutí přepnete na program II a po opětovném stisknutí přepnete na program III.
2. Program I je indikován modrým světlem, program II červeným světlem a program III červeným a modrým blikajícím světlem.
3. Program I a program II zahrnuje masáž pat a vzduchovou masáž a program III pouze vzduchovou masáž.

Tlačítko pro nastavení intenzity

1. Jako výchozí je nastavena nízká intenzita masáže. Po stisknutí tlačítka se nastaví střední intenzita a po opětovném stisknutí se nastaví vysoká intenzita masáže.
2. Nízká intenzita je indikována modrým světlem, střední intenzita zeleným světlem a vysoká intenzita červeným světlem.

Tlačítko vyhřívání

Ve výchozím režimu se funkce vyhřívání spouští automaticky, což signalizuje červeně svítící indikátor. Pro vypnutí funkce vyhřívání stiskněte tlačítko a indikátor by měl zhasnout.

Vypínač

1. Po připojení k napájení je přístroj v pohotovostním režimu a svítí vypínač.
2. Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte vypínač. Všechna tlačítka (vyhřívání + vzduchová vlna a program 1) by měla svítit modře a čas masáže by měl být implicitně nastaven na 10 minut.
3. Po dokončení masáže nebo po stisknutí vypínače se masážní přístroj znovu přepne do pohotovostního režimu a svítí pouze vypínač.
4. Po použití masážní přístroj vypnete a odpojte z elektrické zásuvky.

Údržba

A. Skladování

- Pokud výrobek nepoužíváte, vložte jej zpět do krabice a skladujte jej na bezpečném, suchém, chladném a dobře větraném místě.
- Napájecí kabel nepřekrucujte.
- Za napájecí kabel nikdy netahejte.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povrchu výrobku ostrými předměty.
- Výrobek neumísťujte v dosahu přímého slunečního záření ani v prostředí s vysokou teplotou.

B. Čištění

- Před čištěním odpojte masážní přístroj od napájení.
- K čištění povrchu výrobku použijte suchý hadřík. Nepoužívejte žádné abrazivní či žíravé čisticí prostředky, jako např. benzen nebo rozpouštědla.

C. Údržba

- Udržujte výrobek v čistotě a mimo vlhké prostředí.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, zakryjte jej protiprachovým potahem (není součástí balení).
- Zabraňte zaprášení výrobku.

Masážní přístroj je vybaven teplotní pojistkou, která jej při překročení bezpečné teploty automaticky vypne. Odpojte přístroj od napájení, nechte vychladnout a poté použijte obvyklým způsobem.



NEOX GROUP s.r.o. www.nioxgroup.cz

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P05
Room 116, Longgang District, Shenzhen, China

CE FC RoHS   Made in China