


návod k použití

šiacu masážní přístroj pro krk a ramena

MGS-2301

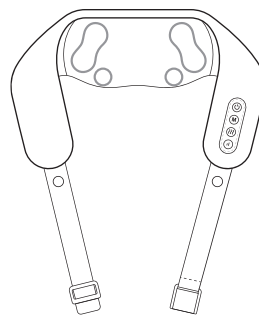

Důležité

Tento návod si ponechte, abyste se k němu mohli později vrátit. Před použitím tohoto přístroje si prosím bedlivě přečtete pokyny.


Bezpečnostní pokyny

01. Přístroj vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit.
02. Nesahejte na přístroj, který spadl do vody.
03. Nepoužívejte přístroj při koupeli nebo ve sprše.
04. Neumisťujte a neskladujte přístroj na místech, kde by hrozil pád do vany nebo umyvadla.
05. Nikdy pro tento přístroj nepoužívejte špendlíky nebo jiné kovové spojovací prvky.
06. Nepoužívejte v mokru nebo vlhku.
07. Je-li přístroj používán dětmi nebo zdravotně postiženými osobami, je nezbytný dohled dospělé osoby.
08. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu.
09. Nikdy nepoužívejte masážní přístroj, jste-li ospalí nebo při spánku.
10. Do otvorů přístroje nevkládejte a nepouštějte žádné předměty.
11. Nepoužívejte v místech, kde byly rozprášeny aerosoly (spreje) nebo kam je dodáván kyslík.
12. Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem. Přístroj pak může vydávat nadměrné teplo, způsobit požár, úraz elektrickým proudem a zranit osoby.
13. Nepřenášejte přístroj za přívodní kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť.
14. Tento přístroj je určen pouze pro soukromé neprofesionální použití.
15. Nepoužívejte na kojence, invalidy, spící osoby nebo osoby v bezvědomí.
16. Nepoužívejte na citlivou kůži nebo na osoby, které nejsou citlivé na teplo.
17. Za kabel přístroje, napájecího zdroje nebo ovládací jednotky netahejte a nepřekrucujte jej.

Upozornění

- Nedovolte, aby přístroj používaly nebo si s ním hrály děti.
- Cítíte-li během používání přístroje nepohodlí, přestaňte jej používat.
- Přístroj nesmí používat těhotné ženy, ženy při menstruaci, osoby s vysokou teplotou, s maligním nádorem, s onemocněním srdce, v rekonvalescenci po operaci, s akutními zdravotními problémy či jinými nemocemi.
- Tento výrobek nesmí být používán na následujících místech: koupelny, kuchyně atd., kde je vysoká teplota, vysoký tlak, vlhkost, blízkost vody nebo ohně.
- Uchovávejte přístroj mimo ostré předměty a zabraňte poškození krytu přístroje.
- Je přísně zakázáno přístroj používat, pokud má poškozený kryt. Do přístroje se nesmí zaplést vlasy, aby nedošlo k vážnému zranění.
- Přístroj před čištěním a po použití vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Je-li poškozen napájecí kabel, požádejte o opravu dodavatele nebo odbornou opravu.
- K nabíjení přístroje je třeba použít přiložený adaptér, jinak může dojít k poškození či dokonce požáru přístroje.
- Přístroj má vyhřívaný povrch, proto při jeho používání musí dbát zvýšené opatrnosti osoby citlivé na teplo.

Pokyny k používání

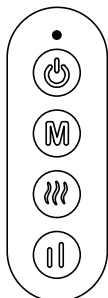

- vypínač
- režim: normální/hnětení
- vyhřívání: zapnuto/vypnuto
- rychlost masáže: nízká/vysoká

Poznámka

1. Přístroj před prvním použitím nabijte. Akumulátor je z bezpečnostních důvodů dodáván téměř vybitý.
2. Tento přístroj je vybaven dvěma akumulátory typu 18650/7,4 V, které lze nabíjet USB adaptérem 5 V/2 A typu C, avšak bez podpory rychlého nabíjení.
3. Při nabíjení nelze přístroj zapínat. Během této doby bliká kontrolka nabíjení.
4. Je-li akumulátor přístroje téměř vybitý, bliká po dobu 5 sekund červená kontrolka a pak dojde k vypnutí přístroje.

Návod k použití

1. Stiskem vypínače po dobu 2 sekund přístroj zapněte. Výchozí režim je normální s funkcí vyhřívání.
2. Upravte režim masáže stisky tlačítek režim, vyhřívání nebo rychlosti.
3. Stiskněte a po dobu 2 sekund podržte vypínač – tím přístroj vypnete.
4. Není-li přístroj vypnutý ručně, vypne se automaticky po 10 minutách.

Péče a údržba

1. Při každodenní údržbě používejte k otření těla přístroje neutrální čisticí prostředek a měkký hadr. Nečistěte vodou.
2. Při manipulaci se přístrojem dotýkejte zlehka a nepoužívejte nadměrný tlak.
3. Pozor, aby nedošlo k poškození těla přístroje velkým tlakem nebo ostrými a tvrdými předměty.
4. Po použití přístroj uchovávejte v originálním obalu na suchém a chladném místě.
5. Narazíte-li během používání na jakékoliv problémy, přístroj ihned vypněte a přestaňte používat. Sami neprovádějte demontáž přístroje.
6. Po skončení nabíjení přístroj odpojte od elektrické sítě a adaptéru.

Řešení problémů

Situace	Možná příčina	Náprava
nelze spustit	vybitý akumulátor	přístroj dobijte
přestane fungovat	skončil pracovní cyklus	spusťte prosím znovu
	přetížení přístroje	snižte zátěž
hluk při používání	rezonuje konstrukce přístroje	normální stav

Pokyny k likvidaci

Akumulátor typu lithium-ion, který je v tomto přístroji vestavěn, je cenným zdrojem surovin a může být recyklován. Před likvidací výrobku z něj lithium-iontový akumulátor vyjměte a odevzdejte jej na sběrném místě.

Nebezpečné látky, které výrobek obsahuje

Přehled nebezpečných látek						
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Barviva	○	○	○	○	○	○
Plastové části	○	○	○	○	○	○
Vodiče	○	○	○	○	○	○
Desky PCBA	○	○	○	○	○	○
Kovové části	○	○	○	○	○	○
Motor	○	○	○	○	○	○
Teplotní regulátor	○	○	○	○	○	○
Cínový vodič	○	○	○	○	○	○
Parametrický podstavec	○	○	○	○	○	○
Zárhovadlo	○	○	○	○	○	○
Tkaniny	○	○	○	○	○	○
Maziva	○	○	○	○	○	○
Tavná lepidla	○	○	○	○	○	○

Tato tabulka je v souladu s nařízením SJ/T11364:

O: Značí, že obsah jedovatých a nebezpečných látek ve všech materiálech obsažených ve výrobku splňuje požadavky GB/T26572-2011 „Objemové požadavky pro omezené látky v elektrických a elektronických výrobcích“.

X: Značí, že obsah jedovatých a nebezpečných látek v alespoň jednom homogenním materiálu obsažených ve výrobku překračuje požadavky GB/T26572-2011 „Objemové požadavky pro omezené látky v elektrických a elektronických výrobcích“.

„Doba využitelnosti“ tohoto výrobku je vyznačena symbolem napravo. Výrobci a dovozci zboží musí uvádět přehled nebezpečných látek obsažených ve výrobcích v souladu s požadavky a ve formátu odpovídajícím standardům a musí vyznačit ochrannou lhůtu použitelnosti výrobku. Jednájí tak na základě nařízení z 1. července 2016 o správně opatření pro omezení použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích a na základě nařízení čínské asociace výrobců domácích elektrických spotřebičů o ochraně životního prostředí.



Technické údaje

Název výrobku: masážní přístroj pro krk a ramena

Modelové číslo přístroje: MGS-2301

Příkon: 10 W

Napájení: 5 V

Pracovní cyklus: 10 minut

Kapacita akumulátoru: 2200 mAh

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobena v Číně.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz