


návod k použití dobíjecí masážní přístroj na nohy


MGF-701

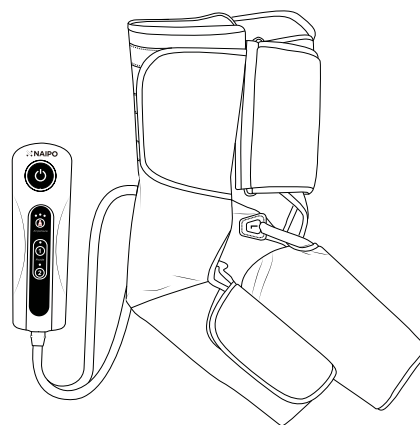

Vyjmutí vestavěného dobíjecího akumulátoru

Vestavěný akumulátor vyjměte před likvidací přístroje. Zajistěte, aby byl akumulátor odevzdán na k tomu určeném místě. Uvedené schéma je možné využít výhradně při likvidaci zařízení, nikoliv při jeho opravě. Pokud byste přístroj rozebírali sami, mohlo by dojít k jeho poškození.

- Před rozebíráním přístroje jej odpojte od elektriny.
- Přístroj zapněte vypínačem, a vyčkejte, než se akumulátor zcela vybije. Postupujte podle kroků (1) a (2), zvedněte akumulátor a poté jej vyjměte.
- Dbejte přitom, aby nedošlo ke zkratu na kontaktech akumulátoru. Přístroj je možné používat výhradně s adaptérem, který se k němu dodává.

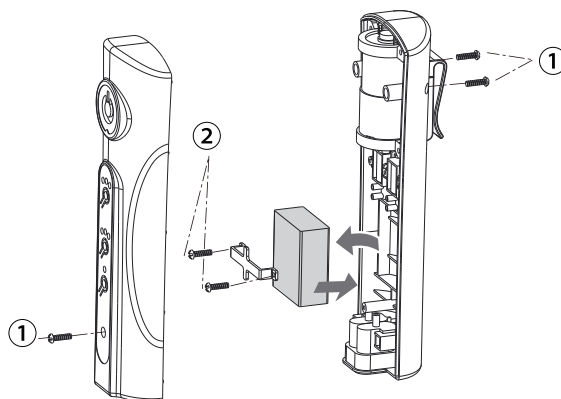

Důležité bezpečnostní pokyny

Když budete výrobek používat, je nezbytné dodržet všechny pokyny a bezpečnostní opatření, včetně následujících:

NEBEZPEČÍ

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem:

Přístroj vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit.

VAROVÁNÍ

Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob:

01. Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Stejně tak jej odpojte, pokud nasazujete nebo z něj odstraňujete některé součásti.
02. Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem. Přístroj pak může vydávat nadměrné teplo, způsobit požár, úraz elektrickým proudem a zranit osoby.
03. Nepřenášejte přístroj za přívodní kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť.
04. Nikdy nepracujte s přístrojem, má-li blokován přístup vzduchu. Přístupy vzduchu musí zůstat volné bez látek, vlasů apod.
05. Do otvorů přístroje nevkládejte a nepouštějte žádné předměty.
06. Nepoužívejte ve venkovních prostorách.
07. Nepoužívejte v místech, kde byly rozprášeny aerosoly (spreje) nebo kam je dodáván kyslík.
08. Odpojení proveďte tak, že nejprve vypnete všechny funkční prvky a pak přístroj odpojíte od elektrické zásuvky.
09. Je-li přístroj používán dětmi nebo v jejich blízkosti, invalidy či postiženými osobami, je nezbytný stálý dohled nad činností přístroje, aby nedošlo k jeho nesprávnému použití.
10. Přívodní kabel udržujte mimo vytápěné povrchy, mohlo by dojít k vážným popáleninám. Nepoužívejte nad citlivými částmi pokožky nebo nad místy se špatným krevním oběhem.
11. Osoby citlivé na teplo musí být při použití přístroje opatrné.
12. Přístroj musí být napájen výhradně elektrickým proudem s bezpečným nízkým napětím tak, jak je na něm vyznačeno.
13. Přístroj je možné používat výhradně s adaptérem, který se k němu dodává.
14. Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a nedostanou pokyny, jak přístroj používat, od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

15. Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem nejnáchylnějším k opotřebení. Vadné součástky doporučujeme okamžitě nahradit a přístroj nepoužívat, dokud není opraven.

16. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu.

17. Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody. Vraťte přístroj do servisu k přezkoumání a opravě.

	Zařízení není určeno ke komerčnímu využití ani k lékařským účelům.
	Používejte výhradně ve vnitřních prostorách!
	Nepoužívejte zařízení ve vlhkých místnostech (jako jsou koupelny nebo sprchy).
	- Nemyjte! - Nečistěte chemicky! - Po použití výrobku po dobu 15 minut si 30 minut odpočiňte, pak můžete přístroj použít znovu.

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE

Představení

Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky.

BALENÍ OBSAHUJE

- 1 x síťový adaptér
- 1 x návod k použití
- 1 x ruční ovladač

Technické údaje

Model	MGF-701
Název	dobíjecí masážní přístroj na nohy Naipo
Napájení	13,5 V $\equiv$ 1 A
Doba používání	3 hodiny
Doba nabíjení	2,5 hodiny
Akumulátor	stejnosměrný proud, 11,1 V / 1000 mAh


Důležité bezpečnostní pokyny

- Přístroj slouží pro vlastní masáž, nejedná se o lékařské zařízení a nesmí být použit na zraněné části těla. Lidé se zdravotními problémy by se před použitím přístroje měli poradit se svým lékařem.
- Používejte výhradně s dodávaným adaptérem.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí (například v koupelně), aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem či k jiným bezpečnostním problémům.
- Pokud přístroj používají děti nebo hendikepovaní, je nezbytný dozor.
- Těhotné ženy by přístroj používat neměly.
- Doporučujeme přístroj nepoužívat nepřetržitě déle než 15 minut.
- Přístroj neskladujte na přímém slunečním světle a na prašném místě.


Otázky a odpovědi

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj nelze normálně zapnout.	Nebylo stisknuto tlačítko napájení.	Stiskněte tlačítko napájení.
	Akumulátor je vybitý.	Před použitím přístroje nabijte.
Přístroj se zahřívá.	Přístroj byl příliš dlouho používán bez přerušení.	Před dalším použitím přístroje vyčkejte 30 minut.
Z přístroje uniká vzduch.	Vzduchové hadice nejsou správně vloženy.	Vložte správně vzduchové hadice.

Schéma přístroje

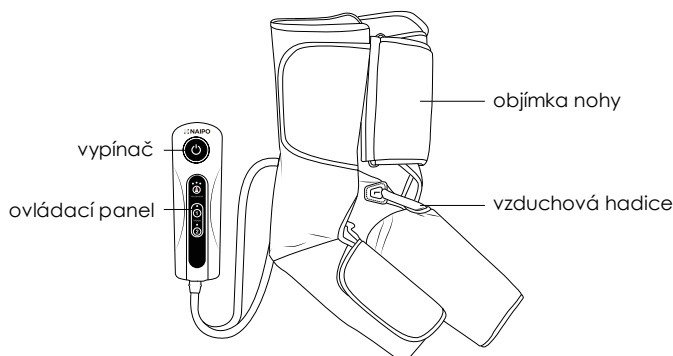

Ovládací panel

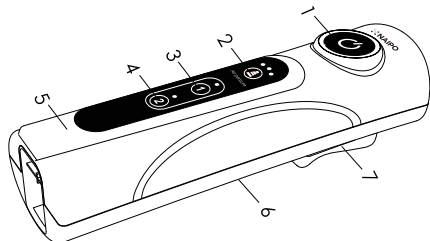

1. vypínač
2. tlačítko úpravy intenzity
3. tlačítko režimu 1
4. tlačítko režimu 2
5. horní skořepina
6. spodní skořepina
7. závěsné poutko

Návod k používání přístroje

Vypínač: Stiskem vypínače přístroj zapnete. Rozsvítí se kontrolka a automaticky se zapne režim 1. Dalším stiskem vypínače přístroj vypnete.

Tlačítko úpravy intenzity: Když je přístroj v činnosti stiskem tlačítka úpravy intenzity měníte postupně 3 úrovně: nízkou, střední a vysokou. Tlačítka volby režimu: Pomocí tlačítek režimů vybíráte jeden ze dvou režimů.

Po zapnutí přístroje je doba jeho chodu nastavena na 15 minut. Pokud přístroj nelze zapnout, nabijte jej a pokus opakujte.

Pokud přístroj není připojený prostřednictvím adaptéru do elektrické zásuvky, může pracovat na vestavěný lithiový akumulátor. Když se sníží kapacita energie v akumulátoru, kontrolka začne blikat a akumulátor je třeba nabít.

Je-li přístroj připojený prostřednictvím adaptéru do zásuvky, začne se nabíjet a přeruší masáž. Dokud se přístroj nabíjí, kontrolka napájení bliká. Až bude přístroj zcela nabitý, zůstane kontrolka rozsvícená. Doba nabíjení je zhruba 2,5 hodiny. Přístroj nabíjejte výhradně dodávaným adaptérem, abyste předešli nehodě.

Poznámka: Jestliže kontrolka zůstane při nabíjení dlouhou dobu rozsvícená (a neoznámí nabití na plnou kapacitu), odpojte adaptér ze zásuvky po šesti hodinách, abyste předešli nehodě.

Oblast masáže

Nohy a lýtko.

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobeno v Číně.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

