


eufy Smart Scale C20 – návod k použití (T9130)

1. Obsah balení



chytrá váha eufy Smart Scale C20

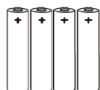


4× AAA baterie



uživatelský manuál

2. Vložení baterií

- 1) Otočte váhu spodní stranou nahoru a položte ji na rovný povrch.
- 2) Posuňte kryt bateriového prostoru směrem nahoru a vložte 4× AAA baterie. Dbejte na správnou polaritu dle označení v prostoru pro baterie.
- 3) Posuňte kryt zpět dolů a ujistěte se, že je pevně uzavřen. Po vložení baterií se rozsvítí TFT displej.

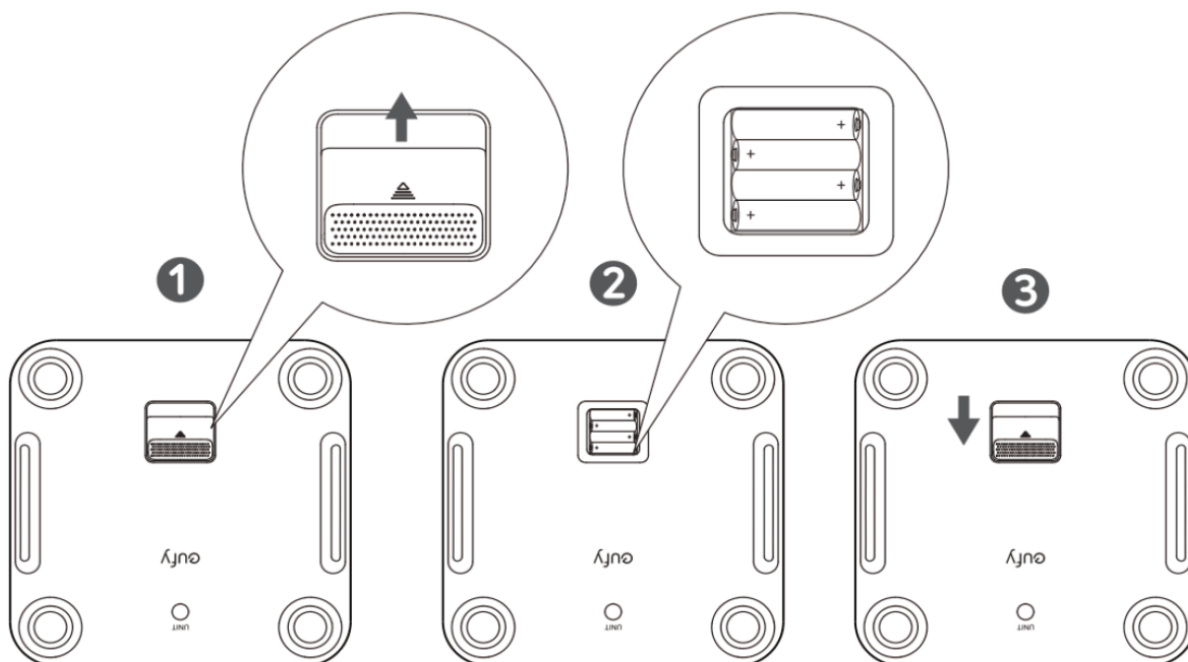


„Low Battery“ se zobrazí na TFT displeji, když jsou baterie vybité. Vyměňte všechny baterie najednou. Nemíchejte nové a použité baterie.

Pokud zařízení neměří, TFT displej se po 10 sekundách nečinnosti automaticky vypne.

3. Výběr měrné jednotky

Stiskněte tlačítko UNIT na spodní straně váhy pro přepínání mezi jednotkami: lb (libry) / kg (kilogramy).
Měrnou jednotku lze zvolit i přímo v aplikaci eufy.

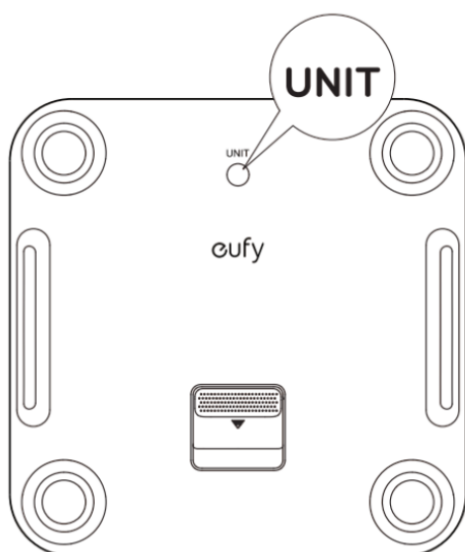

Pro obnovení továrního nastavení stiskněte a podržte tlačítko UNIT po dobu 5 sekund, čímž vstoupíte do menu. Vyberte možnost „Resetting“, poté znovu stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, dokud nebude proces obnovení dokončen.

4. Instalace aplikace eufy a párování



- 1) Stáhněte aplikaci **eufy** z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).
- 2) Na telefonu povolte Bluetooth a Wi-Fi.
- 3) Otevřete aplikaci a vytvořte si uživatelský účet. Vyplňte přesně svůj profil.
- 4) Na stránce Me zvolte Add Device a postupujte podle pokynů k přidání eufy Smart Scale C20.




1



2



3

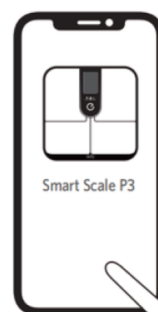

4

Po spárování se aplikace a váha při příštím otevření připojí automaticky.

	Stavová ikona	Význam
	Bliká	Párování
	Trvale svítí	Připojeno


Kompatibilita: iOS 11.0 a novější / Android 6.0 a novější.

Poznámka: Váhu nespárujete z nabídky Bluetooth telefonu. Vždy používejte párování přímo v aplikaci **eufy**.

5. Zahájení měření

- 1) Umístěte váhu na tvrdý, rovný povrch.
- 2) Při prvním měření se ujistěte, že máte vybraný svůj uživatelský profil.
- 3) Stoupněte si bosí na váhu.

- Analýza složení těla začne automaticky.
- Po měření se hmotnost a další údaje zobrazí na TFT displeji. Detailní analýzu složení těla najdete v aplikaci **eufy**.

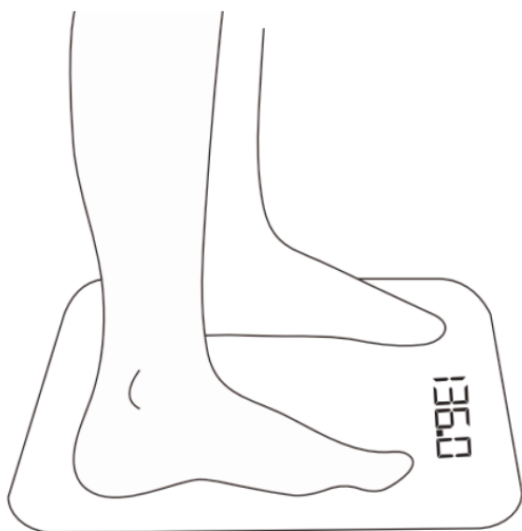



- Stoupněte bosí na váhu. Stůjte v klidu, dokud není měření dokončeno.
- Váha dokáže automaticky rozpoznat uživatele na základě jejich předchozích údajů.
- Pokud aktuální uživatel není rozpoznán, jednoduše poklepejte nohama, abyste přepnuli mezi uživateli.

6. Podporované biometrické údaje

Hmotnost	kg
Tělesný tuk	%
BMI	-
Srdeční tep	bpm
Voda	%
Svalová hmota	kg
Tuková hmota	kg
Beztuková hmota	kg
Bazální metabolismus	kcal
Kostní hmota	kg
Viscerální tuk	-
Bílkoviny	%
Kosterní svalová hmota	kg
Podkožní tuk	%
Věk těla	-
Typ těla	-

7. Měření více uživatelů

Pokud váhu sdílíte s jiným uživatelem, jehož hmotnost je v rozmezí ± 3 kg od vaší, zařízení nemusí správně rozpoznat uživatele automaticky. V takovém případě se na displeji zobrazí stránka pro výběr uživatele. Klepněte jednou nohou na plochu váhy pro přepnutí na správného uživatele.

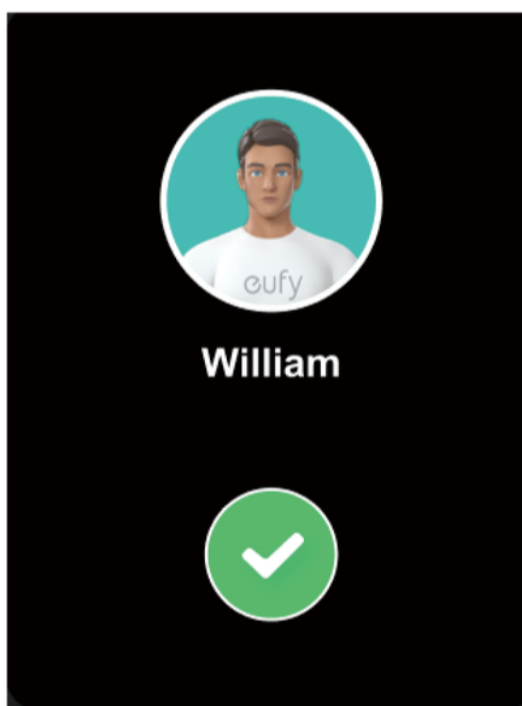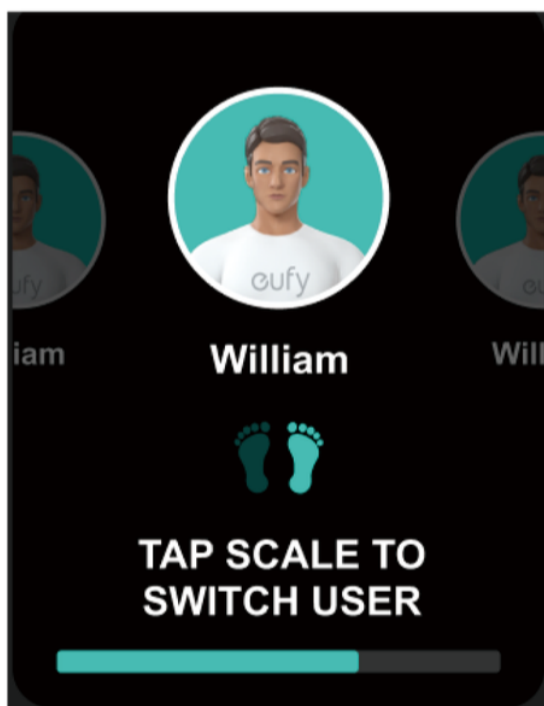


8. Výběr měřicích režimů

Podržte tlačítko UNIT po dobu 5 sekund pro výběr různých režimů. Režim můžete změnit také v aplikaci eufy.

8.1 Jednoduchý režim

Režim Simple Mode podporuje pouze běžné měření hmotnosti. Jednoduše se postavte na váhu a změřte svou aktuální hmotnost.

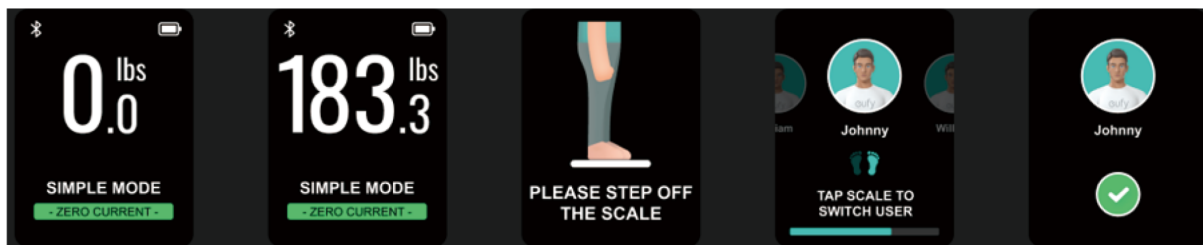


8.2 Režim hosta

V režimu Guest Mode můžete změřit svou hmotnost bez nutnosti přihlášení k uživatelskému účtu. V takovém případě se vaše údaje o hmotnosti neuloží.



8.3 Režim dítěte (pouze v aplikaci)


Váha eufy Smart Scale C20 podporuje měření hmotnosti vašeho miminka. Klepněte na [...] v pravém horním rohu hlavní obrazovky a poté vyberte [Weight with Baby]. Postupujte podle pokynů v aplikaci, abyste dokončili proces měření.

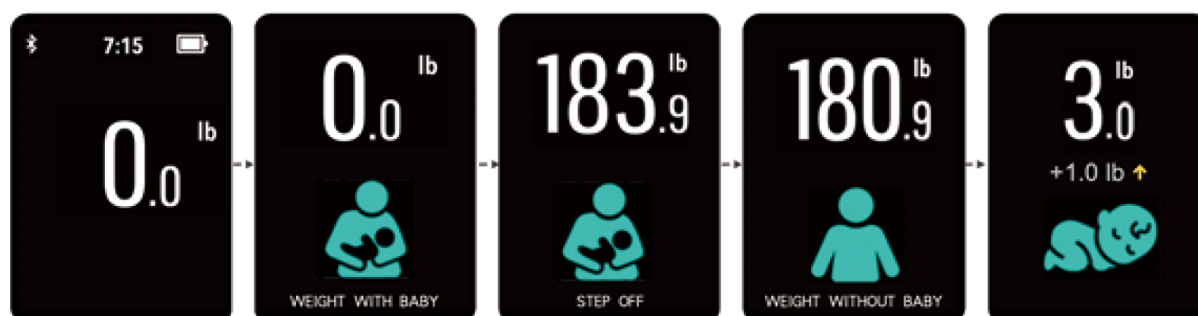


8.4 Režim zvířete (pouze v aplikaci)

Váha eufy Smart Scale C20 dokáže zvážit i vašeho mazlíčka. Můžete ho nechat postavit se přímo na váhu, nebo se na váhu postavit vy s mazlíčkem v náručí. Postupujte podle pokynů v aplikaci, abyste dokončili proces měření.

S mazlíčkem:

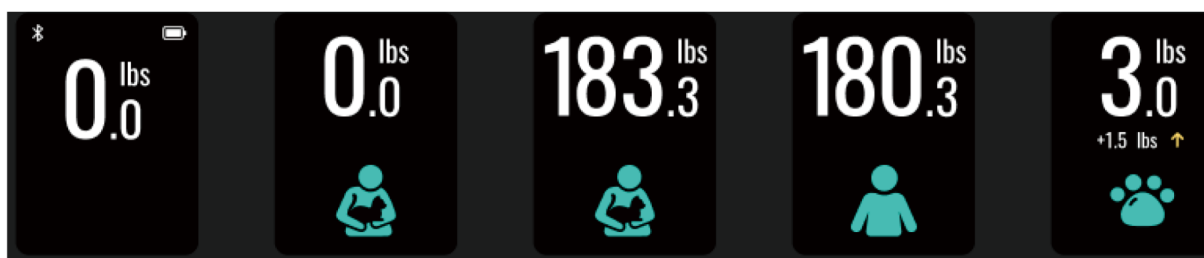

Mazlíček samostatně:

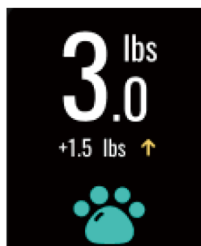

9. Služby dat

Propojení aplikací třetích stran

Aplikace **eufy** podporuje Apple Health, Google Fit a Fitbit. V aplikaci na stránce Me otevřete Third Party Services a povolte synchronizaci.


Poznámka: Synchronizována budou pouze data registrovaných účtů. Data členů rodiny se nesynchronizují.

Export dat

V aplikaci můžete exportovat kopii svých dat: Me → Privacy and Data → Export All Data.



10. Údržba

Váhu pravidelně čistěte suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem.

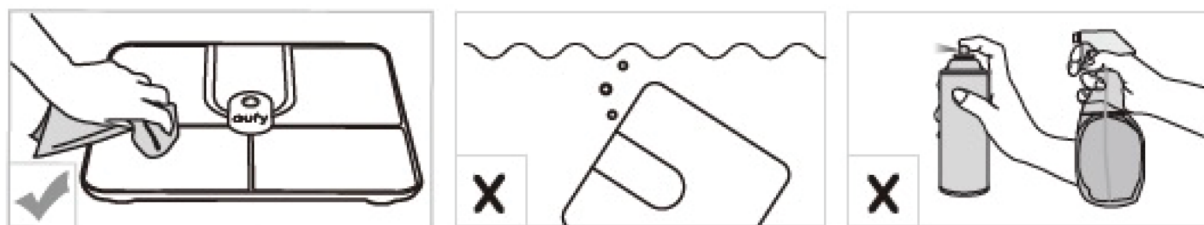

- Nikdy váhu neomývejte vodou ani ji neponořujte do vody.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky k čištění váhy, protože by to mohlo způsobit její poškození nebo změnu barvy.

11. Řešení problémů

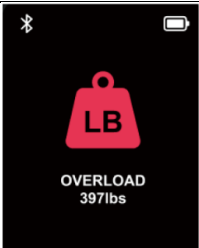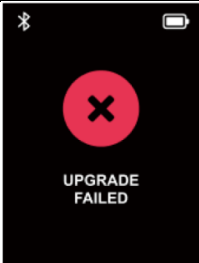Chybové hlášení	Popis	Řešení
	Overload / Přetížení zařízení se vypne	Přestaňte měřit a sejměte zátěž
	Low battery / Slabé baterie zařízení se vypne	Vyměňte všechny 4 baterie najednou
	Upgrade Failed / Aktualizace firmwaru se nezdařila	Otevřete aplikaci eufy , klepněte na Nastavení zařízení a poté vyberte Aktualizace firmwaru

Když měříte

Problém	Možná příčina	Řešení
Abnormální výsledky - příliš vysoké - nízké - velký rozdíl ve dvou měřeních po sobě	Nesprávný postoj	Stůjte bosí a nehybně
	Nesprávný uživatelský profil	Zkontrolujte profil
	Váha je na měkkém nebo nerovném povrchu	Umístěte zařízení na rovný tvrdý povrch
TFT displej se po našlápnutí nezapne	Baterie nejsou vloženy	Vložte 4 nové AAA baterie
	Baterie jsou vybité	Vyměňte všechny baterie najednou
Analýza složení těla neproběhne	Měříte v obuvi či ponožkách	Stůjte bosí na váze
	V aplikaci eupy je aktivní Jednoduchý režim	Přepněte režim v aplikaci, nebo dlouhým stiskem tlačítka UNIT po dobu 5s.
	Nesprávný postoj	Stůjte bosí a nehybně
	Nesprávný uživatelský profil	Zkontrolujte profil

12. Technické specifikace

Model produktu	Eufy Smart Scale C20
Napájení	4× AAA baterie
Displej	TFT
Měrné jednotky	lb / kg

13. Zákaznický servis

Kontaktujte podporu: support@eufy.com

Web: www.eufy.com

(US/CA) +1 (800) 994 3056 · (UK) +44 (0) 1604 936 200 · (DE) +49 (0) 69 9579 7960 · (JP)

+81 03 4455 7823 · (CN) +86 400 0550 036

Záruka: 24měsíční omezená záruka.

Další informace, video návody, FAQ a zásady záruky: <https://support.eufy.com/>

Prohlášení o souladu s předpisy PSTI (UK): Zařízení vyhovuje požadavkům The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Prohlášení o souladu je dostupné na webu výrobce.