


Návod

Manuál pro profesionální ústní sprchu
Waterpik Water Flosser WP-70/260

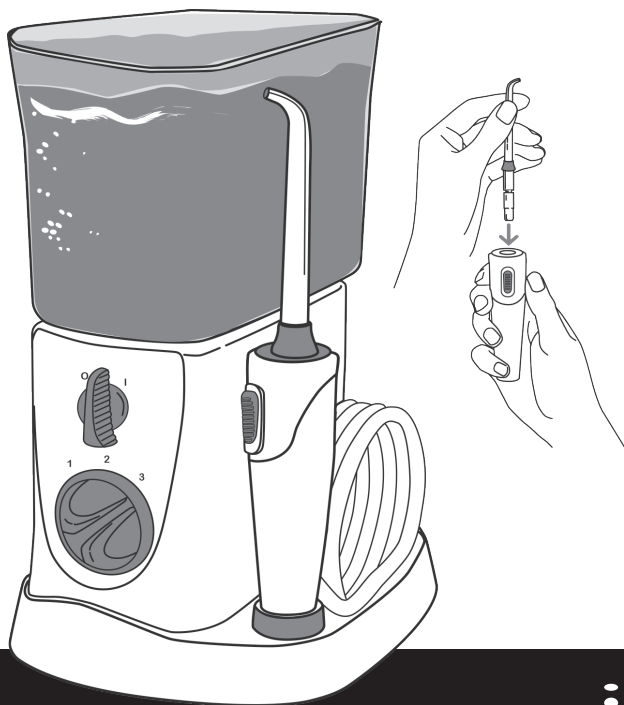

waterpik®

Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Water Flosser WP-250/260/300

Obsah:

Bezpečnostní upozornění	str. 1
Popis produktu	str. 2
Použití ústní sprchy – začínáme	str. 3
Doporučená technika	str. 4
Údržba, servis přístroje	str. 5
Likvidace	str. 6
Poruchy a jejich řešení	str. 6
Záruční doba	str. 7

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Stejně jako u použití jiných elektrických přístrojů tak i u Waterpik Water Flosser je třeba dbát na vyšší bezpečnost při manipulaci, obzvláště jsou – li v blízkosti dětí. Níže uvedená bezpečnostní doporučení by měla být vždy dodržována. Přečtěte si prosím celý návod před použitím přístroje.

NEBEZPEČÍ

- NIKDY nepoužívejte přístroj, jestliže máte mokré nebo vlhké ruce.
- NIKDY neumisťujte a neskladujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou.
- NIKDY nepoužívejte přístroj při koupání či sprchování.
- PO UKONČENÍ PRŮVODNÍ KABEL vytáhněte ze zásuvky.
- NESAHTE na přístroj pokud spadne do vody. Okamžitě vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky.
- KONTROLUJTE pravidelně přírodní elektrický kabel, zda není poškozený.

UPOZORNĚNÍ


Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem, požáru, vážnějších zranění a škod dodržujte následující:

- Nepoužívejte přístroj, jestliže má poškozený elektrický kabel, přípojku nebo v případě pádu přístroje do jakékoliv tekutiny.
- Důkladně proskočte a dohlédněte na děti při užívání přístroje, aby si s přístrojem nehrály.
- Nestříkejte vodu přímo pod jazyk, do oblasti uší, nosu a dalších citlivých oblastí. Bez příloženého příslušenství doporučeného společností WaterPik Technologies může tento přístroj způsobit vážná poranění v zasažené oblasti.
- Používejte tento přístroj pouze tak, jak je uvedeno v manuálu nebo dle doporučení lékaře.

- Používejte pouze trysky, které jsou doporučovány společností WaterPik Technologies.
- Neodstraňujte flexibilní špičku u Pik Pocket trysky z průhledného nástavce. Pokud se špička z jakýchkoliv důvodů sama odděljuje, celou trysku znehodnotte a použijte novou.
- Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Plňte nádržku pouze vodou nebo jiným roztokem (ústní vodou apod.) doporučeným stomatologem. Poměr ústní vody a vody je 1:1. Nepoužívejte pokud současně manipulujete s aerosolovým sprayem.
- Vyvarujte se používání tekutin obsahujících pevné částice, jinak může dojít k ucpání trysky nebo irigačního systému.
- Nepoužívejte ústní vodu obsahující alkohol, bělicí prostředky a ve vodě nerozpustné esenciální oleje.
- Nepoužívejte pokud máte jakýkoliv typ orálního šperku. Před použitím irigátoru orální šperk odstraňte.
- Maximální délka provozu je 5 minut po dvouhodinové pauze. Používání výrobku déle, než doporučeno, by mohlo způsobit přehřátí motoru a následné poškození výrobku.
- Jestliže Vám Váš lékař doporučí užívání antibiotik před plánovaným dentálním zákrokem, měli byste s ním konzultovat použití přístroje i ostatních dentálních pomůcek.
- Osoby s kardiostimulátory by měly užívání přístroje konzultovat s lékařem.

TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Popis produktu

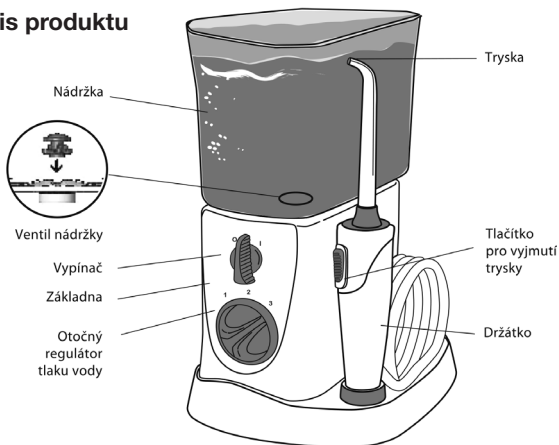


Každý model obsahuje jiné typy trysek



Tryska
pro irigaci



Tryska
pro očistu jazyka

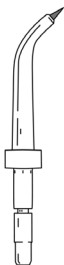

Tryska
PIK Pocket



Ortodontická
tryska



Tryska
Zubní kartáček



Tryska
Plaque Seeker

Použití ústní sprchy - začínáme


Zasuňte kabel do elektrické zásuvky.

Nádrž:

Vyjměte nádrž ze základny. Naplňte ji vlažnou vodou. Umístěte nádrž na základnu irigátoru a pevně zatlačte směrem dolů.

Trysky:

Vyberte si svoji barevně odlišenou trysku a vložte ji do středu otvoru na konci držátka. Pokud je tryska správně usazena, barevný kroužek trysky je pevně nasazen na konci držátka. Trysku vyjměte z držátka tlačítkem pro vyjmutí trysky. Tlačítko lehce zmáčkněte, posuňte směrem nahoru a trysku vytáhněte.

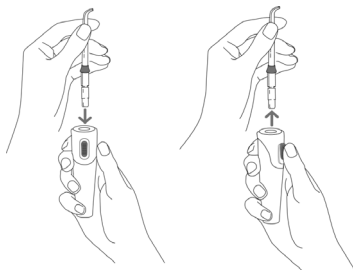

Před prvním použitím:

Před prvním použitím výrobku nastavte kontrolku tlaku na nejvyšší stupeň, trysku otočte směrem do umyvadla a volnou rukou zapněte přístroj dokud nezačne z trysky stříkat voda. Poté přístroj vypněte.

Nastavení tlaku vody:

Při prvním použití nastavte regulátor tlaku vody na nejnižší stupeň (na základně). Postupně zvyšujte tlak na úroveň, která vám vyhovuje nebo na úroveň, kterou určí odborník.

Vložení trysky do úst:

Vložte trysku do úst tak, aby její ústí směřovalo na zuby. Jemně stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem a volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje.

Doporučená technika

Ved'te vodní paprsek v pravém úhlu podél dásní. Vodu z úst nechte odtékat volně do umyvadla. Začněte s očistou molárů (zadních stoliček) a systematicky pokračujte směrem k předním zubům. Posunujte trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte u mezizubních prostorů. Pokračujte dokud nejsou všechny zuby a mezizubní prostory očištěny.

Ukončení irigace:

Po ukončení irigace přístroj vypněte, sejměte nádržku a vyprázdněte ji, tekutinu z přístroje nechte vykat. Vyměňte trysku z držátka. Tlačítko pro vyjmutí trysky lehce zmáčkněte, posuňte směrem nahoru a trysku vytáhněte. Nádržku již na tělo přístroje (sací ventil) nenasazujte. Nechejte ji volně položenou tak, aby se těsnění (gumička) nenamáhala. Odpojte přístroj z el. zásuvky.



Speciální trysky:

Tryska Pik Pocket

Speciální tryska pro výplach parodontálních chobotů vodou nebo antibakteriálními roztoky. Vložte trysku do úst tak, aby gumová špička směřovala k linii dásní (45° k zubu). Jemně špičku zaveďte pod úroveň dásně do chobotu. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte **nejnižší** hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistěte dásňový žlábek okolo všech zubů a případné parodontální choboty.


Tryska pro očistu jazyka

Speciální tryska pro očistu jazyka. Vložte trysku na jazyk. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte **nejnižší** hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně trysku posuňte do středu jazyka přibližně v polovině délky a jemným tlakem táhněte dopředu. Celý postup několikrát opakujte.

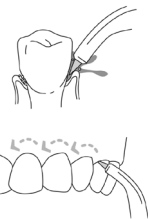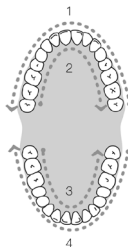

Ortodontická tryska

Speciální tryska pro očištění ortodontických zámečků a těžko dostupných ploch v jejich okolí. Pulsující proud vody společně s kartáčkem na konci trysky vyčistí okolí drátků, kroužků, spon apod. Přiložte trysku k zámečku. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou očistíte zámeček a jeho okolí. Tryskou proudí voda, která odstraní případné zbytky jídla.

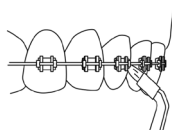

Tryska Plaque Seeker

Unikátní tryska se třemi svazky soft vláken z nylonu napomáhá odstranit plak z dásňového žlábků a mezizubí. Vložte trysku do úst a přiložte ji v úhlu 90° k zubu tak, aby se vlákna jemně dotýkala zubů. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Posunujte trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte u mezizubních prostor.



Tryska Zubní kartáček

Speciální tryska ve tvaru zubního kartáčku s vodním paprskem v jednom. Tryska současně čistí a oplachuje povrch zubu. Vložte trysku do úst, hlavicí kartáčku na zub u okraje dásní. Trysku můžete používat bez i se zubní pastou. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistíte postupně všechny zuby s mírným tlakem jako s manuálním kartáčkem.



Antibakteriální roztoky

Účinek irigace se zvýší, budete-li používat přístroj WaterPik® spolu s ústní vodou nebo jiným vhodným antibakteriálním roztokem doporučeným zubním lékařem. Některé antibakteriální roztoky mohou zkrátit životnost Vašeho přístroje! Pokud používáte roztoky, vypláchněte nádrž po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou vodou z vodovodu a tryskou namířte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho, až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje. Antibakteriální roztok nesmí obsahovat alkohol, nebo esenciální oleje.

Údržba přístroje

- Pokud používáte roztoky, nádrž vypláchněte po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou vodou z vodovodu a násadu s tryskou namířte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho, až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje. Sundejte trysku z násady a uložte ji do úložného prostoru.
- V případě potřeby očistěte přístroj měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čisticím prostředkem. Přístroj nenamáčejte.
- Před čištěním odpojte přístroj ze sítě.

- V případě, že by přístroj byl vystaven teplotám pod bodem mrazu, vyprázdněte obsah nádrže a mějte přístroj zapnutý tak dlouho, dokud se voda nedostane z celého systému.

Pravidelně přístroj odvápnujte pomocí přípravku Redesept. Tento přípravek zbaví přístroj vodního kamene a zároveň jej dezinfikuje.

Servis

Opravu elektrické části irigátoru WaterPik® včetně napájecího kabelu je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis. Nepokoušejte se sami o opravu. V případě poruchy přístroje se obraťte na autorizovaný servis, kde vám výrobek opraví nebo vymění. Přístroj nevyhazujte do koše s běžným odpadem, ale odevzdejte jej ve sběrně recyklovatelného odpadu. Pomáháte tak chránit životní prostředí.

Likvidace

Přístroj nevyhazujte do koše s běžným odpadem, ale odevzdejte jej ve sběrně recyklovatelného odpadu. Pomáháte tak chránit životní prostředí.



Poruchy a jejich řešení

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Trysky: Voda vytéká mezi tryskou a kroužkem násady	Tryska není správně nasazena	Sejměte trysku a znovu ji nasadte
Tělo ústní sprchy: Z hadičky vedoucí k násadě teče voda	Poškozená hadička	Musí být vyměněna autorizovaným servisem
Nádrž teče	Chybí zátka nebo je zátka obráceně nasazená	Vyměňte zátku nádoby Obraťte zátku
Nedostatečný tlak	Nádrž není správně usazena	1) Vyměňte a znovu nasadte nádržku 2) Napiňte nádržku tekutinou 3) Napiňte nádržku horkou vodou z vodovodu a přidejte do ní Redesept. Přístroj nechte zapnutý, dokud se nádrž nevyprázdní. Poté vypláchněte nádrž pouze čistou vodou. 4) Nastavte vyšší tlak prostřednictvím otočného regulátoru.
Není slyšet motor	Motor neběží	Ujistěte se, že elektrická zásuvka je funkční, zkontrolujte ji pomocí jiného přístroje. Přepněte vypínač do polohy ON s větší razancí.

Záruční doba

Záruční list platí pouze pro přímého kupujícího tohoto výrobku. Záruka se nevztahuje na trysky ústní sprchy atd.

Záruka platí dva roky od data prodeje. Jestliže se během doby platnosti záruční lhůty poškodí funkce držátka (výjma zjevného poškození špatným zacházením nebo použitím nepředepsaného zdroje napětí či transformátoru), firma WaterPik si vymíní právo výrobek posoudit a dle svého uvážení opravit nebo vyměnit vadné části výrobku. Zkontrolujte si proto, zda Vám prodejce doplnil razítko a datum prodeje na zadní stranu tohoto návodu. Uložte si účtenku jako doklad o koupi. Tato záruka zahrnuje všechny ostatní, ať již písemné nebo vyřčené, včetně všech na trhu běžných či svému účelu přizpůsobených záruk.

Pokud máte jakýkoli dotaz, pište na e-mailovou adresu: info@profimed.cz, www.profimed.cz.

Záruční list

PRODUKT	RAZÍTKO	DATUM