

VITAMMY®

Infant



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

⚠ Před použitím si pozorně přečtete pokyny.

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali naši digitální dětskou váhu. Před prvním použitím přístroje si přečtěte návod k obsluze a upozornění. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům, abyste předešli nehodám a/ nebo poškození produktu při jeho používání.

Toto elektronické zařízení je domácí zařízení pro kontrolu hmotnosti dítěte, užitečné zejména při vážení kojenců a předčasně narozených dětí. Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byl výrobek té nejvyšší kvality, pohodlný pro miminka, snadné použití a bezpečný při vážení.

POPIS ZAŘÍZENÍ



1. Tlačítko Zapnout / Vypnout / Tare
2. Tlačítko změny jednotky UNIT
3. LCD obrazovka
4. Výsledek vážení
5. Vybraná jednotka hmotnosti (kg / lb / st / g)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALACE BATERIÍ

⚠ Před prvním použitím vložte baterie.

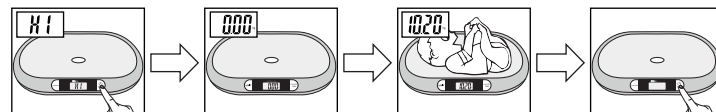
1. Otevřete kryt baterie a vyjměte izolátor z příhrádky na baterie.
2. Vložte 2 baterie AAA (1,5 V) v souladu s vyznačenou polaritou.
3. Zavřete kryt baterie.

VÁŽENÍ

1. Položte váhu na tvrdý, rovný a rovný povrch.

⚠ Váhu neumísťujte na měkké povrchy, jako jsou podložky nebo koberce, protože to může ovlivnit výsledek měření.

2. Váhu zapnete tlačítkem Zapnout(ON) / Vypnout (OFF) / Tare. Na obrazovce se zobrazí „Hi“.
 3. Když se na obrazovce objeví pouze nuly a jednotka vážení, lze spustit kontrolní vážení.
 4. Chcete-li změnit jednotku hmotnosti, stiskněte tlačítko (kg / lb / st / g) UNIT
 5. Položte dítě na váhu, výsledek se zobrazí na displeji. Pokud nechcete dítě položit přímo na váhu, nejprve položte na váhu ručník, stiskněte tlačítko. ON/OFF/Tare, pro resetování hmotnosti pak dítě položte na váhu.
 6. Vypněte váhu stisknutím tlačítka ON / OFF / Tare, nebo počkejte, dokud se váha po 30 sekundách nevypne.
- ⚠ Chcete-li provést další vážení, po složení dítěte z váhy vynulujte váhu před dalším vážením stisknutím tlačítka ON/OFF/Tare.

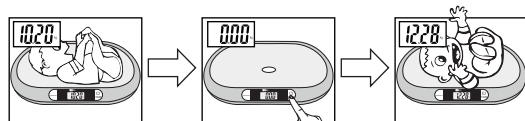


FUNKCE AUTOLOCK

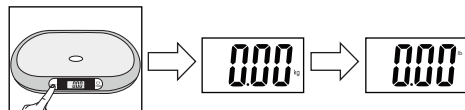
Když dítětko leží na váze a je stále v pohybu, váha se po trojitém zablikání na displeji automaticky stabilizuje a zobrazí výsledek.

TARE

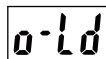
I další děti můžete vážit na váze VITAMMY INFANT. Před dalším vážením odeberte dítě z váhy, stiskněte tlačítko ON/OFF/Tare, které resetuje (vynuluje) váhu, a poté na něj položte další dítě.

**ZMĚNA JEDNOTKY HMOTNOSTI**

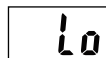
Chcete-li změnit jednotku hmotnosti (kg / lb / st / g), stiskněte tlačítko UNIT

**INDIKÁTOR PŘESAHUJÍCÍ LIMIT**

Pokud hmotnost dítěte přesáhne maximum pro tuto váhu (20 kg), na displeji se zobrazí „0-Ld“.

**NÍZKÝ STAV BATERIE**

Váha signalizuje nízký stav baterie zobrazením symbolu „Lo“ na obrazovce.

**UPOZORNĚNÍ**

- ⚠ Při používání by měla být váha umístěna na rovném, suchém, stabilním a tvrdém povrchu. Tento
- ⚠ spotřebič používejte doma podle určení.
- ⚠ Váhu nepřetěžujte, maximální nosnost je 20 kg.
- ⚠ Vyhněte se otřesům nebo nárazům do váhy.
- ⚠ Neponořujte do vody.
- ⚠ Při skladování na váhu nic nepokládejte.
- ⚠ Optimální teplota pro manipulaci a skladování je mezi 5 a 30 °C.
- ⚠ K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani abrazivní prostředky.

ŠPECIFIKACE

- ⚠ Jakékoliv úpravy na zařízení nejsou povoleny

MODEL	SBS-30860
VÁHY	1600 g
TYP ZOBRAZENÍ	LCD 60×21 mm
ROZMĚRY	550 × 330 × 27 mm
OBSAH BALENÍ	Váha, manuál, 2 baterie AAA 1,5V
PROVOZNÍ PODMÍNKY	Teplota: 5–40 °C; Vlhkost: 15–93 %; Atmosférický tlak: 70–106 kPa
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ DOPRAVA	Teplota: -25-70 °C Vlhkost: ≤93 %; Atmosférický tlak: 70–106 kPa
SNÍMAČE	4 přesné snímače
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ	zatížení 20kg
PŘESNOST	0,01 kg
NAPÁJENÍ	2 baterie AAA 1,5V

ZÁRUKA

ZAŘÍZENÍ: VITAMMY infant (model SBS-30860)

RUČITEL: MLongauer, sro Farská 12, 949 01, Nitra

Provoz: Baby's, Hlavní 43, 951 53 Babindol

TECHNICKÁ PODPORA: TEL. +421940404831 E-

MAIL: reklamacie@mlongauer.sk

ZÁRUKA: Ručitel ujišťuje kupujícího, že zařízení VITAMMY, na které se vztahuje tato záruka, bylo navrženo a vyrobeno v souladu s vysokými standardy kvality a dobré kvality zařízení, bez materiálových nebo výrobních chyb, které by mohly bránit jeho správné funkci. V případě závad, poškození a závad odhalených během této záruční doby, garant bezplatně a v co nejkratším čase, maximálně do 30 dnů, opraví nebo vymění nové zařízení.

TYP ZÁRUKY: Tato záruka předpokládá, že reklamované zařízení bude dodáno do servisu na náklady Kupujícího, bezplatně opraveno a bezplatně dodáno zpět kupujícímu.

ZÁRUČNÍ DOBA: 24 měsíců.

Bez záruky na díly a příslušenství podléhající opotřebení při běžném používání: baterie

ZÁRUČNÍ LHŮTA: Záruka je platná ode dne nákupu potvrzeného dokladem koupi, který musí být přiložen k záručnímu listu.

OBLAST ZÁRUKY: Tato záruka platí na území Slovenska.

POSTUP V PŘÍPADĚ PORUCHY VÝROBKU:

Pro využití záruky kontaktujte technickou podporu do 14 dnů od zjištění závady,

za účelem získání pomoci av případě potřeby zahájení reklamačního řízení. V rámci reklamačního řízení je třeba reklamované zařízení zaslat na adresu servisního střediska s přiložením tohoto záručního listu a dokladu o koupi.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Aby záruka zůstala v platnosti, je třeba spolu s reklamovaným zařízením předat tento záruční list (správně vyplněný a podepsaný) a doklad o koupi s datem nákupu spolu s názvem zakoupeného zařízení.

OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ZÁRUK:

- * Záruka neposkytuje žádnou kompenzaci za přímé nebo nepřímé škody způsobené osobám nebo zařízením, když zařízení nefunguje nebo nebylo v provozu.
- * Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení, jakož i na vady a poškození vyplývající z:
 - * nevhodného používání (v rozporu s určeným použitím) nebo používání způsobem, který není v souladu s návodem k použití
 - * nesprávnou manipulací nebo manipulací v rozporu s pokyny pro skladování a údržbu (např. použití nevhodných čisticích prostředků) a používání nevhodného spotřebního materiálu
 - * neoprávněné zásahy servisu, neoprávněné opravy, změny a konstrukční změny
 - * vnější příčiny (atmosférické jevy, nesprávné napájení atd.)
- * Záruka se nevztahuje na poruchy výrobku v důsledku změn vlastností (zhoršení kvality) prvků, které podléhají přirozenému opotřebení.
- * Záruční opravy nezahrnují činnosti související s údržbou a čištěním zařízení popsané v Návodů k obsluze.

Razítko a podpis

dodavatele zákazníka

Datum

Podpis

LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO ZAŘÍZENÍ DOMÁCIMI UŽIVATELI EVROPSKÉ UNIE



Přítomnost tohoto symbolu na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nelze likvidovat stejným způsobem jako domácí odpad. Odpovídáte proto za likvidaci elektrických a elektronických zařízení a jste povinni je předat do autorizovaného recyklačního místa pro odpad z elektrických a elektronických zařízení. Třídění, likvidace a recyklace uvedených zařízení přispěje k ochraně přírodních zdrojů a zajistí, aby recyklace probíhala v souladu se zásadami respektování lidského zdraví a životního prostředí. Další informace o sběrných místech pro vaše elektrická a elektronická zařízení vám poskytne místní úřad nebo místní služba likvidace domovního odpadu.

Výrobek je certifikován CE



KONTAKTNÍ INFORMACE

VROBCE:

 AEAMAXXCO., LTD

4F, BuildingA, Donghu Industrial Park, No61, DongpuEr Road, Tianhe District, Guangzhou, Čínská lidová republika

DISTRIBUTOR:

MLongauer, sro Farská 12, 949 01, Nitra Provoz:

Baby's, Hlavní 43, 951 53 Babindol

Vyrobeno v Číně / Made in China

Verze manuálu: 01.06 / 14.05.2021