


## návod k použití

# masážní přístroj pro krk a záda s vyhříváním a vibracemi

MGBK-C2030

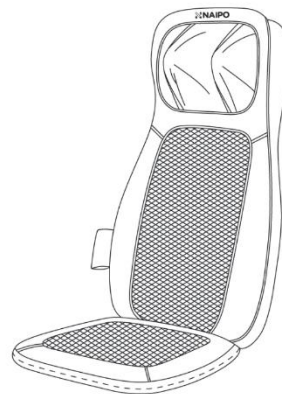

## Představení

Děkujeme, že jste si zakoupili masážní přístroj pro masáž krku a zad s vyhříváním a vibracemi. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky.

## Balení obsahuje

- 1 x masážní přístroj krku a zad
- 1 x návod k použití
- 1 x síťový adaptér
- 1 x autoadaptér

## Technické údaje

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Model           | MGBK-C2030                                                     |
| Název           | masážní přístroj pro masáž krku a zad s vyhříváním a vibracemi |
| Napájení        | DC 12V 4A                                                      |
| Spotřeba        | 50,4 W                                                         |
| Výchozí časovač | 15 minut                                                       |

## Důležité bezpečnostní pokyny

- Děti, těhotné ženy a staří lidé by přístroj používat neměli.
- Přístroj by neměli používat lidé s osteoporózou, s poškozenou páteří, s výronem, s nataženými svaly a dalšími podobnými potížemi.
- Když přístroj přestanete používat, odpojte jej od zdroje elektřiny.
- Přístroj používejte výhradně s dodávaným síťovým adaptérem nebo autoadaptérem.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí (například v koupelně), aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem či k jiným bezpečnostním problémům.
- Přístroj přestaňte používat, jakmile pocítíte neobvyklou nebo palčivou bolest; pak se neprodleně obraťte na odbornou opravnu.
- Nepoužívejte přístroj, má-li poškozený vnější obal nebo napájecí kabel.
- Přístroj nepoužívejte vícekrát než dvakrát bezprostředně po sobě, abyste zachovali jeho vysokou účinnost. Chcete-li přístroj používat dále, vypněte jej a po 30 minutách znovu zapněte. Nadměrné používání přístroje může zkrátit jeho životnost a může vést k poruše přístroje.
- Nepoužívejte přístroj při řízení.


## Návod k používání přístroje

### (1) Vypínač

- a. Tlačítko „Power“ (vypínač): Stiskem tohoto tlačítka přístroj zapnete. Rozsvítí se kontrolka napájení. Dalším stisknutím se přístroj resetuje (kontrolka bliká) a pak se vypne (kontrolka zhasne).
- b. Tlačítko „Heating“ (vyhřívání): Stiskem tohoto tlačítka zapnete funkci vyhřívání (kontrolka se rozsvítí). Dalším stiskem tlačítka funkci vypnete (kontrolka zhasne).

### (2) Krk

- a. Tlačítko „Neck Kneading“ (hnětení krku): Stiskem tohoto tlačítka necháte masážní uzly pracovat v jednom směru (kontrolka svítí). Dalším stiskem tlačítka se směr chodu uzlů obrátí (kontrolka bliká). Stisknete-li tlačítko potřetí, masáž ustane.
- b. Tlačítko „Up“ (nahoru): Dlouhým stiskem tohoto tlačítka přesunete masážní uzly pro krk nahoru.
- c. Tlačítko „Down“ (dolů): Dlouhým stiskem tohoto tlačítka přesunete masážní uzly pro krk dolů.

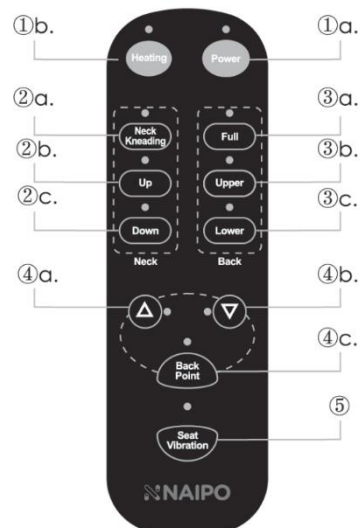

### (3) Záda

- a. Tlačítko „Full“ (celá): Stiskem tlačítka masážní uzly pracují nahoru a dolů po celých zádech (kontrolka svítí). Dalším stiskem tlačítka masáž zastavíte (kontrolka zhasne).
- b. Tlačítko „Upper“ (horní): Stiskem tlačítka masážní uzly pracují nahoru a dolů v horní části zad (kontrolka svítí). Dalším stiskem tlačítka masáž zastavíte (kontrolka zhasne).
- c. Tlačítko „Lower“ (dolní): Stiskem tlačítka masážní uzly pracují nahoru a dolů ve spodní části zad (kontrolka svítí). Dalším stiskem tlačítka masáž zastavíte (kontrolka zhasne).

### (4) Masáž zvolené oblasti

- a. Tlačítko „A“: Dlouhým stiskem tlačítka masážní uzly pro záda posunete nahoru (kontrolka bliká). Když se uzly posunou zcela nahoru, zastaví se. Když stisk tlačítka uvolníte (kontrolka svítí), přístroj začne masírovat zvolenou oblast. Masáž by měla probíhat v oblasti označené okamžikem kdy jste tlačítko stiskli a kdy jste jej uvolnili.
- b. Tlačítko „V“: Dlouhým stiskem tlačítka masážní uzly pro záda posunete dolů (kontrolka bliká). Když se uzly posunou zcela dolů, zastaví se. Když stisk tlačítka uvolníte (kontrolka svítí), přístroj začne masírovat zvolenou oblast. Masáž by měla probíhat v oblasti označené okamžikem kdy jste tlačítko stiskli a kdy jste jej uvolnili.
- c. Tlačítko „Back Point“ (místo na zádech): Stiskem tohoto tlačítka zahájíte bodovou masáž (kontrolka svítí). Masážní uzly se pohybují nahoru a dolů v určitém místě v malém rozsahu. Dalším stiskem tlačítka bodovou masáž zastavíte (kontrolka zhasne).

### (5) Masáž boků

Tlačítko „Seat Vibration“ (vibrace sedáku): Stiskem tohoto tlačítka zapnete vibrační funkci ve spodní části (kontrolka pomalu bliká). Dalším stiskem tlačítka spustíte vibrační funkci ve střední části (kontrolka rychle bliká). Třetím stiskem tlačítka zapnete vibrační funkci v horní části (kontrolka svítí). Stisknete-li tlačítko počtvrté, tuto funkci vypnete (kontrolka zhasne).

## Otázky a odpovědi

| Problém                                                           | Řešení                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přístroj nelze zapnout.                                           | Zkontrolujte, zda je přístroj správně propojený s napájecím adaptérem.<br>Zkontrolujte, zda je síťový adaptér správně zasazen do zásuvky.                                                                                             |
| Přístroj během činnosti přestane pracovat.                        | Po 15 minutách nepřetržitého používání se přístroj automaticky vypne.<br>Přístroj je přetížený. Uvolněte zatížení přístroje.<br>Zapnula se vestavěná teplotní ochrana. Vyčkejte nejméně 30 minut, než přístroj budete znovu používat. |
| Masáž je v nesprávné výšce.                                       | Upravte polohu masážních uzlů pro krk postupem uvedeným v Návodu k používání.                                                                                                                                                         |
| Přístroj na sedadle řidiče v autě nepracuje vyhovujícím způsobem. | Doporučujeme přístroj používat na zadním sedadle.                                                                                                                                                                                     |
| Při používání je cítit bolest.                                    | Vyhněte se přímému kontaktu pokožky s přístrojem.                                                                                                                                                                                     |
| Funkce vyhřívání nepracuje.                                       | Ujistěte se, zda jste funkci vyhřívání zapnuli (kontrolka svítí).<br>Po zapnutí funkce vyhřívání trvá 2–3 minuty, než se přístroj rozehřeje.                                                                                          |

## Údržba výrobku

- 1) Před čištěním výrobek odpojte od elektrické sítě.
- 2) Ovladač otírejte suchým hadrem.
- 3) Povrch umělé kůže setřete mírně vlhkou houbou nebo suchým hadrem.
- 4) Po použití přístroj odpojte od zdroje napájení a uložte jej na suchém a dobře větraném místě.

## Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobena v Číně.



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)



RoHS  
Made in China

